



# Instrucciones de uso

## RadiForce® MX217

Monitor LCD en color

### Importante







Lea las instrucciones de uso y el manual de instalación antes de usar el dispositivo.

- Consulte el manual de instalación para ver la configuración y los ajustes del monitor.
- Encontrará la información más reciente del producto, incluidas las instrucciones de uso, en nuestro sitio web.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

# SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

En este manual y en este producto se utilizan los símbolos de seguridad que aparecen a continuación. El significado de estos símbolos es importante. Lea con atención la información siguiente.

 <b>ADVERTENCIA</b>	Hacer caso omiso de la información contenida en una ADVERTENCIA puede provocar lesiones graves y poner en riesgo la vida.
 <b>PRECAUCIÓN</b>	Hacer caso omiso de la información contenida en una PRECAUCIÓN puede provocar lesiones leves y/o daños materiales o en el producto.
	Indica una advertencia o precaución. Por ejemplo,  indica que existe un riesgo de "descarga eléctrica".
	Indica una acción no permitida. Por ejemplo,  significa "No desmontar".

Este producto se ha adaptado específicamente para su uso en la región a la que se ha enviado originalmente.

Si se usa fuera de dicha zona, es posible que el producto no funcione con arreglo a lo indicado en las especificaciones.

---

No se permiten la reproducción, el almacenamiento en cualquier sistema de recuperación de información ni la transmisión en forma alguna o a través de medios electrónicos, mecánicos o de cualquier otro tipo de ninguna parte de este manual sin el consentimiento previo por escrito de EIZO Corporation.

EIZO Corporation no tiene ninguna obligación de mantener la confidencialidad del material o de la información suministrados, salvo que así se acuerde previamente en función de la recepción de dicha información por parte de EIZO Corporation. Aunque se ha hecho todo lo posible por garantizar que la información contenida en este manual esté actualizada, es preciso tener en cuenta que las especificaciones del producto EIZO están sujetas a cambios sin previo aviso.

---


## PRECAUCIONES

### Importante

Este producto se ha adaptado específicamente para su uso en la región a la que se ha enviado originalmente. Si se usa fuera de dicha zona, es posible que el producto no funcione con arreglo a lo indicado en las especificaciones.

Para garantizar su seguridad y un mantenimiento adecuado, lea atentamente la sección de "PRECAUCIONES" y las precauciones relativas al monitor.

### Ubicación de las notas de precaución

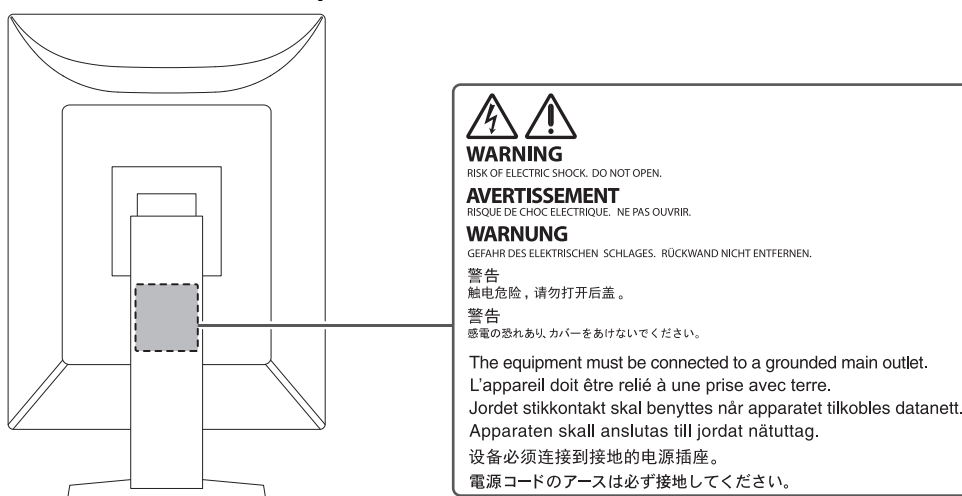

### Símbolos que aparecen la unidad

Símbolo	Este símbolo indica
	Interruptor de alimentación principal: Presione este botón para apagar la alimentación principal del monitor.
	Interruptor de alimentación principal: Presione este botón para encender la alimentación principal del monitor.
	Botón de alimentación: Presione para encender o apagar la alimentación del monitor.
	Corriente alterna
	Alerta de riesgo de descarga eléctrica
	PRECAUCIÓN: Consulte <a href="#">SÍMBOLOS DE SEGURIDAD [▶ 2]</a>
	Marcado RAEE: Los productos deberán eliminarse por separado; los materiales pueden reciclarse.
	Marcado CE: Marca de conformidad de la UE de acuerdo con las disposiciones de la Directiva o Reglamento del Consejo (UE).
	Fabricante
	Fecha de fabricación

## PRECAUCIONES

---

Símbolo	Este símbolo indica
<b>Rx only</b>	Precaución: la ley federal (EE. UU.) establece que este dispositivo solo puede venderlo un profesional médico autorizado y que solo puede venderse por orden de este.
<b>EU Medical Device</b>	Dispositivo médico en la UE
EU Importer	Importador en la UE
<b>UK CA</b>	Marca que indica el cumplimiento de los reglamentos de Reino Unido
<b>UK Responsible Person</b>	Persona responsable en Reino Unido
<b>CH REP</b>	Representante autorizado en Suiza
<b>EC REP</b>	Representante autorizado en la Comunidad Europea

**ADVERTENCIA** **ADVERTENCIA**

**Si la unidad empieza a echar humo, huele a quemado o hace ruidos extraños, desconecte inmediatamente todas las conexiones de alimentación y póngase en contacto con el representante de EIZO.**

Intentar utilizar una unidad defectuosa puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

 **ADVERTENCIA**

**No desmonte ni modifique la unidad.**

Abrir la carcasa podría provocar una descarga eléctrica o quemaduras causadas por la alta tensión o la alta temperatura de las piezas. Modificar la unidad podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

 **ADVERTENCIA**

**Todas las reparaciones necesarias debe realizarlas un técnico cualificado.**

No intente reparar este producto por su cuenta, puesto que abrirlo o quitar las cubiertas podría causar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

 **ADVERTENCIA**

**Mantenga los líquidos y los objetos extraños alejados de la unidad.**

Si alguna pieza metálica, material inflamable o líquido penetrara accidentalmente en la carcasa, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

Si algún objeto o líquido caen dentro de la unidad, desconéctela inmediatamente. Asegúrese de que un técnico cualificado revise la unidad antes de volver a utilizarla.

 **ADVERTENCIA**

**Coloque la unidad en un lugar sólido y estable.**

Si la unidad se coloca sobre una superficie inadecuada, puede caerse y provocar lesiones.

Si la unidad se cae al suelo, desconéctela inmediatamente y póngase en contacto con el representante local de EIZO. No siga utilizando una unidad dañada. Si usa una unidad dañada, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

## PRECAUCIONES

### **ADVERTENCIA**

#### **Utilice la unidad en una ubicación adecuada.**

De lo contrario, pueden producirse incendios, descargas eléctricas o daños en el equipo.

- No la instale al aire libre.
- No la instale en ningún medio de transporte (barco, avión, tren, automóvil, etc.).
- No la instale en entornos húmedos o polvorientos.
- No la instale en lugares en los que la pantalla pueda sufrir salpicaduras (baño, cocina, etc.).
- No la instale en lugares en los que el vapor de agua esté en contacto directo con la pantalla.
- No la instale cerca de humidificadores ni de aparatos que generen calor.
- No la instale en lugares en los que el producto reciba luz solar directa.
- No la instale en entornos con gas inflamable.
- No la instale en entornos con gases corrosivos (como dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, dióxido de nitrógeno, cloro, amoníaco y ozono).
- No la instale en entornos con polvo, componentes que aceleran la corrosión en la atmósfera (como cloruro de sodio y azufre), metales conductores, etc.



### **ADVERTENCIA**

#### **Mantenga las bolsas de plástico del embalaje fuera del alcance de los niños.**

Las bolsas de plástico del embalaje pueden causar asfixia.

### **ADVERTENCIA**

#### **Utilice el cable de alimentación que acompaña al equipo y conéctelo a la toma de corriente estándar de su país.**

Asegúrese de no superar la tensión nominal del cable de alimentación. De lo contrario, podrían producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Alimentación eléctrica: 100-240 VCA 50/60 Hz

### **ADVERTENCIA**

#### **Para desconectar el cable de alimentación, sujete el enchufe con firmeza y tire de él.**

Si tira directamente del cable, puede dañarlo y provocar un incendio o una descarga eléctrica.













### **ADVERTENCIA**

#### **El equipo debe conectarse a una toma de corriente con toma de tierra.**

De lo contrario, se pueden producir un incendio o una descarga eléctrica.



 <b>ADVERTENCIA</b>	
<b>Utilice la tensión adecuada.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta unidad ha sido diseñada para su uso exclusivo con una tensión determinada. Si se conecta a una tensión distinta de la especificada en estas "Instrucciones de uso", puede provocarse un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo. Alimentación eléctrica: 100-240 VCA 50/60 Hz</li> <li>• No sobrecargue el circuito de alimentación, ya que ello podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.</li> </ul>	
 <b>ADVERTENCIA</b>	
<b>Maneje el cable de alimentación con cuidado.</b>	
No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, ni tampoco lo ate ni tire de él. Si usa un cable de alimentación dañado, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.	
 <b>ADVERTENCIA</b>	
<b>El operario no debería tocar al paciente mientras toca el producto.</b>	
Este producto no se ha diseñado para que lo toquen los pacientes.	
 <b>ADVERTENCIA</b>	
<b>No toque nunca el enchufe ni el cable de alimentación si empiezan a caer truenos.</b>	
De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica.	
 <b>ADVERTENCIA</b>	
<b>Para instalar un soporte con brazo, consulte el Manual del usuario del soporte y coloque la unidad de forma segura.</b>	
De lo contrario, la unidad se podría soltar y podrían producirse lesiones o daños en el equipo.	
Antes de la instalación, asegúrese de que los escritorios, las paredes y demás superficies tengan la suficiente resistencia mecánica.	
Si la unidad se cae al suelo, desconéctela inmediatamente y póngase en contacto con el representante local de EIZO. No siga utilizando una unidad dañada. Si usa una unidad dañada, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para volver a instalar el soporte inclinable, utilice los mismos tornillos y apriételes con firmeza.	
 <b>ADVERTENCIA</b>	
<b>No toque con las manos desnudas un panel LCD que haya sufrido daños.</b>	
Si alguna parte de la piel entra en contacto directo con el panel, lávese a fondo.	
Si el cristal líquido entra en contacto con los ojos o la boca, lávese inmediatamente con abundante agua y solicite atención médica. De lo contrario, podría sufrir una reacción tóxica.	

## PRECAUCIONES

---



### **ADVERTENCIA**

**Para instalarlo en lugares elevados, solicite la ayuda de un profesional.**

Al instalar el monitor en un lugar elevado, existe el riesgo de que el producto o alguna de sus piezas caigan y provoquen lesiones. Solicite nuestra ayuda o la de un profesional especializado en trabajos de construcción al instalar el monitor, incluida una inspección del producto en busca de daños o deformidades tanto antes como después de instalar el monitor.



**PRECAUCIÓN** **PRECAUCIÓN****Compruebe el estado operativo antes de usar la unidad.**

Inicie su uso después de asegurarse de que no hay problemas con la imagen visualizada.

Cuando utilice múltiples unidades, inicie su uso después de asegurarse de que las imágenes se visualizan correctamente.

 **PRECAUCIÓN****Fije de forma segura los cables que dispongan de una opción de fijación.**

Si no se fijan de forma segura, los cables podrían desconectarse y, por tanto, las imágenes podrían cortarse y sus operaciones podrían quedar interrumpidas.



 **PRECAUCIÓN****Desconecte los cables y retire los accesorios al trasladar la unidad.**

De lo contrario, los cables o los accesorios podrían soltarse durante el traslado, lo que podría causar lesiones.

 **PRECAUCIÓN****Traslade o instale la unidad conforme a los métodos especificados.**

- Cuando desplace el producto, sujete con firmeza la parte inferior del monitor.
- Los monitores de 30 pulgadas o más son pesados. Al desempaquetar y/o transportar el monitor, asegúrese de que lo hacen al menos dos personas.
- Si su modelo de dispositivo dispone de un asa en la parte posterior del monitor, utilícela y sujete con firmeza el asa y la parte inferior del monitor.

Si la unidad cae al suelo, podrían producirse lesiones o daños en el equipo.

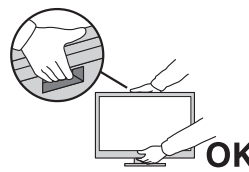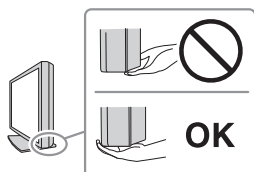 **PRECAUCIÓN****Proceda con cuidado para no pellizcarse las manos.**

Si aplica fuerza sobre el monitor de forma repentina para ajustar su altura o ángulo, podría pellizcarse las manos y sufrir lesiones.

 **PRECAUCIÓN****No tape las ranuras de ventilación del aparato.**











- No coloque ningún objeto sobre las ranuras de ventilación.
- No instale la unidad en un lugar con mala ventilación o en un espacio inadecuado.
- No utilice la unidad en posición tumbada ni boca abajo.

Cubrir las ranuras de ventilación impide la adecuada circulación del aire y podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.



## PRECAUCIONES

---

 <b>PRECAUCIÓN</b>
<p><b>No toque el enchufe de corriente con las manos mojadas.</b> De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica.</p>  
 <b>PRECAUCIÓN</b>
<p><b>No coloque ningún objeto alrededor del enchufe de corriente.</b> De este modo, podrá desconectar el enchufe de corriente fácilmente en caso de que haya algún problema para evitar un incendio o una descarga eléctrica.</p> 
 <b>PRECAUCIÓN</b>
<p><b>Limpie periódicamente la zona alrededor del enchufe de corriente y la ranura de ventilación del monitor.</b> El polvo, el agua o el aceite adheridos en esta zona pueden provocar un incendio.</p>
 <b>PRECAUCIÓN</b>
<p><b>Desenchufe la unidad antes de limpiarla.</b> Si limpia la unidad mientras está conectada a una toma de corriente, puede sufrir una descarga eléctrica.</p>
 <b>PRECAUCIÓN</b>
<p><b>Por razones de seguridad y para ahorrar energía, si tiene previsto no utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, apáguela y desconecte el enchufe de corriente de la toma de corriente.</b></p>
 <b>PRECAUCIÓN</b>
<p><b>Deseche este producto cumpliendo la legislación de la localidad o el país de residencia.</b></p>
 <b>PRECAUCIÓN</b>
<p><b>Para usuarios dentro del territorio del Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza: Informe de cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo al Fabricante y la Autoridad competente del Estado Miembro en el que reside el usuario o paciente.</b></p>

## Aviso sobre este monitor

### Indicaciones de uso

Este producto está indicado para utilizarse en la visualización de imágenes radiológicas para la revisión, el análisis y el diagnóstico por parte de profesionales médicos cualificados. No ha sido concebido para su uso en mamografías.

#### Atención

- Si el producto se usa con fines distintos de los descritos en este manual, podría perderse la cobertura de la garantía.
- Las especificaciones estipuladas en este manual solo se aplican al usar los cables de alimentación suministrados con el producto y los cables de señal especificados por EIZO.
- Con este producto deben usarse únicamente los accesorios y productos EIZO especificados por EIZO.

### Precauciones de uso

- Algunas piezas (como el panel LCD y el ventilador) pueden deteriorarse si se utilizan durante largos períodos de tiempo. Compruebe periódicamente que funcionan con normalidad.
- Cuando se cambia en pantalla la imagen que se ha estado visualizando durante un periodo de tiempo prolongado, es posible que permanezca una imagen. Utilice el salvapantallas o la función de ahorro de energía para evitar que la misma imagen se vea en pantalla durante periodos prolongados. Esta imagen persistente podría aparecer incluso después de un breve tiempo, en función de su naturaleza. Para eliminar este tipo de fenómenos, cambie la imagen o mantenga el botón de alimentación apagado durante varias horas.
- Son necesarios varios minutos para que la visualización del monitor se estabilice. Antes de utilizar el monitor, espere unos minutos o más después de encender la alimentación o después de activar el monitor a partir del modo de ahorro de energía.
- Si el monitor está en funcionamiento continuo durante un largo período de tiempo, pueden aparecer manchas o quemaduras. Para maximizar la vida útil del monitor, se recomienda apagarlo periódicamente.
- La luz de fondo del panel LCD tiene una vida útil fija. Según el patrón de uso, como el funcionamiento continuo durante largos períodos de tiempo, es posible que la vida útil de la luz de fondo se agote antes, por lo que requerirá una sustitución. Cuando la pantalla se oscurezca o comience a parpadear, póngase en contacto con el representante local de EIZO.
- La pantalla puede tener píxeles defectuosos o un reducido número de puntos luminosos. Esto se debe a las características del panel LCD en sí y no es un mal funcionamiento del producto.
- No ejerza una presión fuerte sobre la superficie del panel LCD ni sobre los bordes del marco, ya que podría provocar fallos en la visualización, como patrones de muaré, etc. Una presión constante aplicada sobre la superficie del panel LCD puede deteriorar el cristal líquido o dañar el panel. Si quedan marcas de presión en el panel LCD, deje el monitor con una pantalla blanca o negra; puede que el síntoma desaparezca.
- No arañe ni presione el panel LCD con objetos afilados, ya que esto podría dañarlo. No intente limpiar el panel con pañuelos de papel, ya que podría rayarlo.
- No toque el sensor de calibración incorporado (Sensor delantero integrado). De lo contrario, podría reducir la precisión de la medición o provocar daños en el equipo.

- El valor medido por el sensor de iluminancia integrado podría diferir del valor que se muestra en un luminómetro independiente según el entorno.
- Se puede formar condensación en la superficie o el interior de este producto cuando se coloca en una habitación fría, cuando la temperatura aumenta de forma repentina o cuando se traslada de una habitación fría a una caliente. En tal caso, no encienda el producto. En lugar de ello, espere a que desaparezca la condensación; de lo contrario, podrían producirse daños en el producto.

## Uso del monitor durante periodos de tiempo prolongados

### Control de calidad

- La calidad de visualización de los monitores depende del nivel de calidad de las señales de entrada y la degradación del producto. Realice comprobaciones visuales y pruebas de estabilidad periódicas (incluida la comprobación de escala de grises) para cumplir con los estándares/directrices médicos según su aplicación y lleve a cabo la calibración cuando sea necesario. El software de control de calidad del monitor RadiCS (opcional) le permite llevar a cabo un control de calidad que cumpla con los estándares/directrices médicos.
- Espere 15 minutos o más después de encender el monitor o de activarlo a partir del modo de ahorro de energía antes de realizar pruebas de control de calidad, calibraciones o ajustes de pantalla.
- Se recomienda ajustar el brillo de los monitores al nivel recomendado o más bajo con el fin de reducir los cambios en la luminosidad provocados por el uso prolongado y para mantener un brillo estable.
- Para ajustar los resultados de medición del sensor de calibración integrado (Sensor delantero integrado) a los del sensor externo EIZO (sensor UX2) que se vende por separado, realice correlaciones entre el Sensor delantero integrado y el sensor externo utilizando RadiCS (accesorio opcional)/RadiCS LE (incluido). Las correlaciones periódicas le permiten mantener el resultado de medición del Sensor delantero integrado en un nivel equivalente al del sensor externo. La precisión del Sensor delantero integrado de este producto está optimizada para la visualización vertical en la configuración de fábrica. Al realizar el control de calidad con el Sensor delantero integrado en la visualización horizontal, asegúrese de realizar la correlación. Para obtener más información sobre la correlación, consulte el Manual del usuario de RadiCS / RadiCS LE.

### Atención

- El estado de visualización del monitor puede cambiar inesperadamente debido a un error de funcionamiento o un cambio inesperado en los ajustes. Una vez ajustada la pantalla del monitor, se recomienda utilizarlo con los interruptores de funcionamiento bloqueados. Para obtener información detallada sobre la configuración, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

### Limpeza

- Se recomienda realizar una limpieza periódica para mantener el producto como nuevo y prolongar su vida útil.
- Las manchas en los productos se pueden eliminar humedeciendo parte de un paño suave con agua, o con nuestro ScreenCleaner, y frotando con suavidad.

**Atención**

- No permita que el producto entre en contacto directo con líquidos. En ese caso, límpielo de inmediato.
- No permita que se introduzcan líquidos por los huecos del producto o dentro del mismo.
- Algunos productos químicos de limpieza o desinfección, como el alcohol o el desinfectante, pueden provocar variaciones en el brillo, pérdidas de lustre y decoloraciones, además de deterioros en la calidad de la imagen. No use productos químicos de forma habitual.
- No utilice nunca disolventes, benceno, cera ni limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar el producto.
- Para obtener más información sobre limpieza y desinfección, consulte nuestro sitio web.  
Cómo buscar: Acceda a [www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com) y escriba "disinfect" en el cuadro de búsqueda del sitio

### Desinfección con productos químicos

- A la hora de desinfectar productos, se recomienda utilizar productos químicos que hayamos puesto a prueba (consulte la tabla siguiente). Tenga en cuenta que el uso de estos elementos no garantiza que el producto no pueda resultar dañado o deteriorado.

Categoría	Tipo de producto químico	Producto de ejemplo
Con base de alcohol	Etanol de frotar (alcohol etílico)	Etanol
Con base de alcohol	Isopropanol	Alcohol isopropílico (IPA)
Cloro	Hipoclorito de sodio	Purelox
Biguanida	Gluconato de clorhexidina	Solución Hibitane
Con base de alcohol	Cloruro de benzalconio	Welpas
Con base de aldehído	Glutaral	Sterihyde
Con base de aldehído	Glutaral	Cidex Plus28
Surfactante anfótero	Hidrocioruro de alquildiaminoetilglicina	Solución de Satenidin

### Para un uso cómodo del monitor

- Una pantalla demasiado oscura o brillante puede afectar a sus ojos. Ajuste el brillo del monitor según las condiciones ambientales.
- Mirar el monitor durante periodos prolongados de tiempo cansa la vista. Haga una pausa de 10 minutos cada hora.
- Mire la pantalla desde la distancia y el ángulo adecuados.

### Responsabilidades y advertencias de ciberseguridad

- La actualización del firmware debe llevarse a cabo a través de EIZO Corporation o de su distribuidor.
- Si EIZO Corporation o su distribuidor le indican que debe actualizar el firmware, hágalo inmediatamente.

# ÍNDICE

<b>PRECAUCIONES</b> .....	<b>3</b>
Importante .....	3
Ubicación de las notas de precaución .....	3
Símbolos que aparecen la unidad .....	3
<b>Aviso sobre este monitor</b> .....	<b>11</b>
Indicaciones de uso .....	11
Precauciones de uso.....	11
Uso del monitor durante periodos de tiempo prolongados .....	12
Control de calidad .....	12
Limpieza.....	12
Desinfección con productos químicos .....	14
Para un uso cómodo del monitor .....	14
Responsabilidades y advertencias de ciberseguridad .....	14
<b>1 Introducción</b> .....	<b>17</b>
1.1 Características .....	17
1.1.1 Visualización híbrida monocromo y color .....	17
1.1.2 Cableado sencillo.....	17
1.1.3 Control de calidad .....	17
1.1.4 Uso del monitor con el ratón y el teclado.....	18
1.2 Contenido del paquete .....	18
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk.....	18
1.2.2 RadiCS LE .....	18
1.2.3 Cómo utilizar RadiCS LE .....	19
1.3 Controles y funciones.....	20
1.3.1 Parte delantera .....	20
1.3.2 Parte trasera .....	21
<b>2 Instalación y conexión</b> .....	<b>22</b>
2.1 Antes de la instalación .....	22
2.1.1 Condiciones de instalación .....	22
2.2 Conexión de los cables .....	23
2.3 Encendido .....	24
2.4 Ajuste de la altura y el ángulo de la pantalla.....	25
<b>3 No aparece ninguna imagen</b> .....	<b>26</b>
<b>4 Especificaciones</b> .....	<b>28</b>
4.1 Lista de especificaciones .....	28
4.1.1 Panel LCD.....	28
4.1.2 Señales de vídeo .....	28
4.1.3 USB.....	28

## ÍNDICE

---

4.1.4	Alimentación .....	29
4.1.5	Especificaciones físicas .....	29
4.1.6	Requisitos ambientales de operación .....	29
4.1.7	Condiciones de transporte y almacenamiento .....	29
4.2	Resoluciones compatibles .....	30
4.3	Accesorios .....	30
	<b>Apéndice .....</b>	<b>31</b>
	Estándar médico .....	31
	Clasificación del equipo .....	31
	Información sobre compatibilidad electromagnética (CEM) .....	32
	Entornos de uso previsto .....	32
	Descripciones técnicas .....	33



# 1 Introducción

Gracias por haber elegido un monitor LCD en color de EIZO.

## 1.1 Características


### 1.1.1 Visualización híbrida monocromo y color

Si la función Hybrid Gamma PXL está habilitada, este producto diferencia automáticamente entre las partes monocromática y a color de la misma imagen a nivel de píxeles, y las muestra respectivamente en gradientes óptimos.

### 1.1.2 Cableado sencillo

Además de un terminal de entrada DisplayPort, se proporciona también un terminal de salida.

Las señales pueden salir del conector de salida DisplayPort a otros monitores.

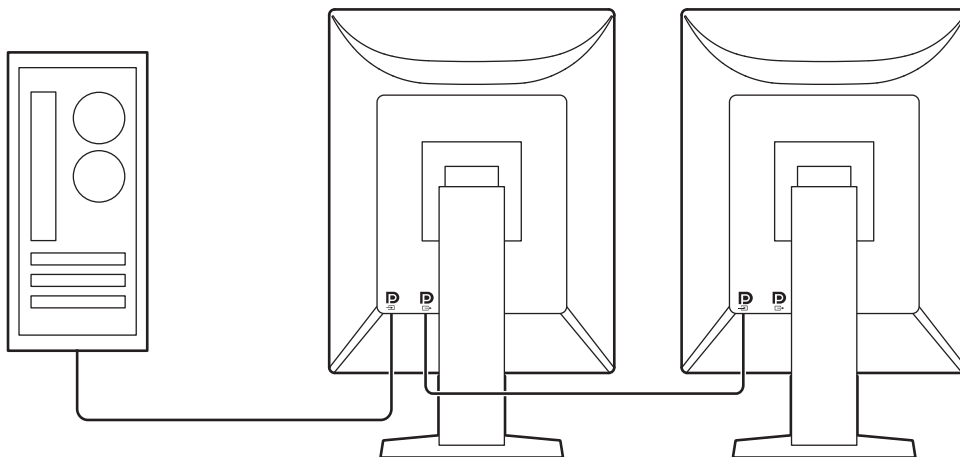

### 1.1.3 Control de calidad

- El monitor tiene un sensor de calibración incorporado (Sensor delantero integrado). Este sensor permite al monitor realizar la calibración (SelfCalibration) y la Compr. esc. grises por separado.



- Con RadiCS LE (incluido), podrá realizar la calibración del monitor y gestionar el historial.
- El software de control de calidad del monitor RadiCS le permite llevar a cabo un control de calidad que cumpla con los estándares/directrices médicos.

### 1.1.4 Uso del monitor con el ratón y el teclado

Con el software de control de calidad del monitor RadiCS/RadiCS LE puede realizar las siguientes operaciones del monitor con el ratón y el teclado:

- Cambiar los modos CAL Switch
- Cambiar las señales de entrada
- Función que asigna cualquier modo CAL Switch a una parte de la pantalla y muestra una imagen (Point-and-Focus)
- Pasar al modo de ahorro de energía (Backlight Saver)

## 1.2 Contenido del paquete

Compruebe que todos los elementos siguientes estén incluidos en el paquete. Si falta alguno o cualquiera de ellos presenta daños, póngase en contacto con su distribuidor o un representante local de EIZO.

### Nota

- Se recomienda guardar los materiales de embalaje y la caja para poder utilizarlos en caso de tener que mover o transportar el producto más adelante.

- Monitor
- Cable de alimentación



- Cable de señal digital (DisplayPort - DisplayPort): PP300 x 1



- Cable USB: UU300 x 1



- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Instrucciones de uso

### 1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

El CD-ROM contiene los elementos siguientes. Consulte "Readme.txt" en el disco para obtener información sobre los procedimientos para iniciar el software o consultar los archivos.

- Archivo Readme.txt
- Software de control de calidad del monitor RadiCS LE (para Windows)
- Manual del usuario
  - Instrucciones de uso de este monitor
  - Manual de instalación del monitor
  - Manual del usuario de RadiCS LE
- Dimensiones exteriores

### 1.2.2 RadiCS LE

RadiCS LE le permite realizar las siguientes operaciones del monitor y de control de calidad. Para obtener más información sobre el software o los procedimientos de configuración, consulte el Manual del usuario de RadiCS LE.

**Control de calidad**

- Ejecutar la calibración
- Mostrar los resultados de las pruebas en una lista y crear un informe de pruebas
- Configurar el objetivo de SelfCalibration y el programa de ejecución

**Operaciones del monitor**

- Cambiar los modos CAL Switch
- Cambiar las señales de entrada
- Función que asigna cualquier modo CAL Switch a una parte de la pantalla y muestra una imagen (Point-and-Focus)
- Pasar al modo de ahorro de energía (Backlight Saver)
- Una función que ajusta automáticamente el brillo del monitor para adaptarse a la luz ambiente cuando se establece el modo de texto (Auto Brightness Control)

**Atención**

- Las especificaciones de RadiCS LE están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Puede descargar la versión más reciente de RadiCS LE de nuestro sitio web: ([www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com))


**1.2.3 Cómo utilizar RadiCS LE**


Para obtener información sobre cómo instalar y utilizar RadiCS LE, consulte el Manual del usuario de RadiCS LE (en el CD-ROM).

Al utilizar RadiCS LE, conecte el monitor al PC con el cable USB suministrado. Para obtener más información sobre cómo conectar el monitor, consulte [2.2 Conexión de los cables](#) [▶ 23].


## 1.3 Controles y funciones

### 1.3.1 Parte delantera

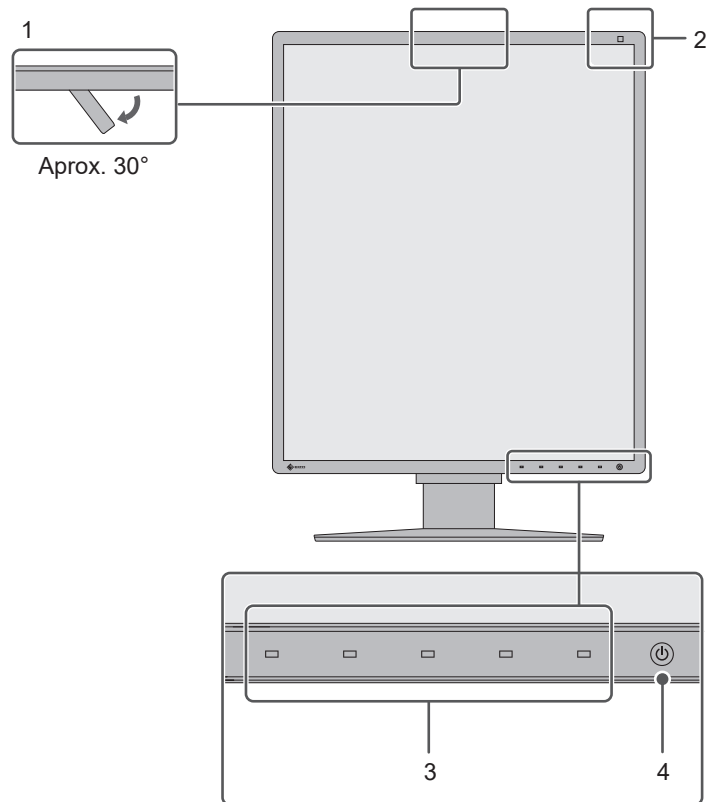

<b>1. Sensor delantero integrado (móvil)</b>	Este sensor se emplea para realizar la calibración y la Compr. esc. grises.
<b>2. Sensor de iluminancia</b>	Este sensor mide la iluminación del entorno. La medición de la iluminación del entorno se lleva a cabo mediante el software de control de calidad RadiCS/RadiCS LE.
<b>3. Interruptores de funcionamiento</b>	Muestra la guía de funcionamiento. Configure los menús de acuerdo con la guía de funcionamiento.
<b>4. Interruptor </b>	Enciende o apaga la unidad.  El indicador del interruptor se enciende cuando se conecta la alimentación. El color del indicador varía según el estado operativo del monitor.  Verde: modo de funcionamiento normal; Naranja: modo de ahorro de energía, apagado: alimentación principal o alimentación apagada

## 1.3.2 Parte trasera

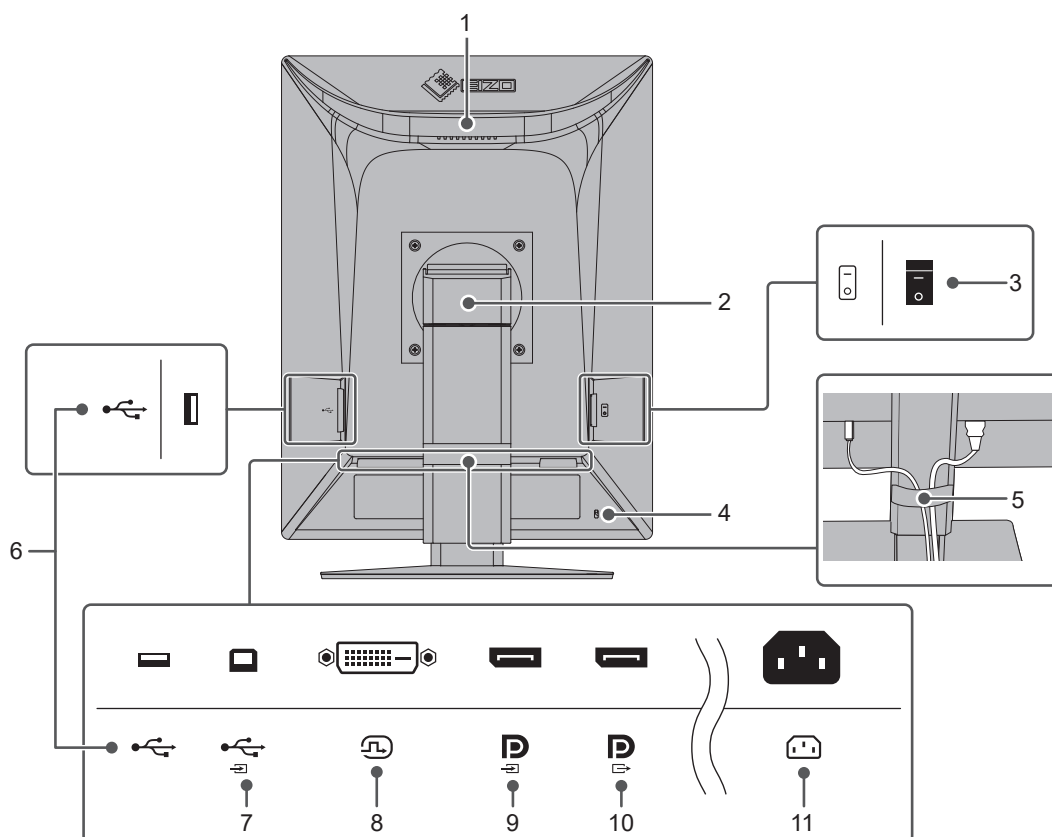

<b>1. Asa</b>	Esta asa se utiliza para el transporte. <b>Atención</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sujete firmemente el monitor por la parte inferior mientras agarra el asa mientras lo transporta. No ejerza presión en el panel LCD ni deje caer el monitor. No lo sujete por la sección del sensor, en el lado delantero.</li> </ul>
<b>2. Soporte</b>	Ajusta la altura y el ángulo (inclinación, giro o rotación) del monitor.
<b>3. Interruptor de alimentación principal</b>	Enciende o apaga la alimentación principal. ○ : apagado,   : encendido
<b>4. Ranura de bloqueo de seguridad</b>	Admite el sistema de seguridad MicroSaver de Kensington.
<b>5. Portacables</b>	Sujeta los cables del monitor.
<b>6. Conector USB tipo A (puerto USB de conexión de flujo descendente)</b>	Conéctelo a un dispositivo USB. Para establecer una conexión en cadena margarita, conecte el cable al puerto USB de conexión de flujo ascendente de otro monitor.
<b>7. Conector USB tipo B (puerto USB de conexión de flujo ascendente)</b>	Conecte este puerto al PC cuando utilice software que requiera una conexión USB o cuando conecte un dispositivo USB (un dispositivo periférico compatible con USB) al puerto USB de conexión de flujo descendente.
<b>8. Conector DVI-D</b>	Conéctelo al PC.
<b>9. Conector de entrada DisplayPort</b>	
<b>10. Conector de salida DisplayPort</b>	Para establecer una conexión en cadena margarita, conecte el cable al conector de entrada DisplayPort de otro monitor.
<b>11. Conector de alimentación</b>	Conecta el cable de alimentación.

## 2 Instalación y conexión

### 2.1 Antes de la instalación

Lea atentamente las [PRECAUCIONES \[► 3\]](#) y siga siempre las instrucciones.

Si instala este producto sobre un escritorio lacado, el color puede adherirse a la parte inferior del soporte debido a la composición de la goma. Compruebe la superficie del escritorio antes de usarlo.

#### 2.1.1 Condiciones de instalación

Cuando instale el monitor en un estante, asegúrese de que haya suficiente espacio a los lados, detrás y encima del monitor.

<b>Atención</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Coloque el monitor de forma que la luz no interfiera con la pantalla.</li></ul>


## 2.2 Conexión de los cables

### Atención

- Compruebe que el monitor, el PC y los periféricos están apagados.
- Si sustituye su monitor actual por este otro, consulte [4.2 Resoluciones compatibles \[▶ 30\]](#) para cambiar en el PC los valores de configuración de la resolución y la frecuencia de barrido vertical por los que estén disponibles para este monitor antes de proceder a la conexión del PC.

### 1. Conecte los cables de señal.

Compruebe las formas de los conectores y conecte los cables. Una vez conectado el cable DVI, apriete los elementos de sujeción para fijar el conector.

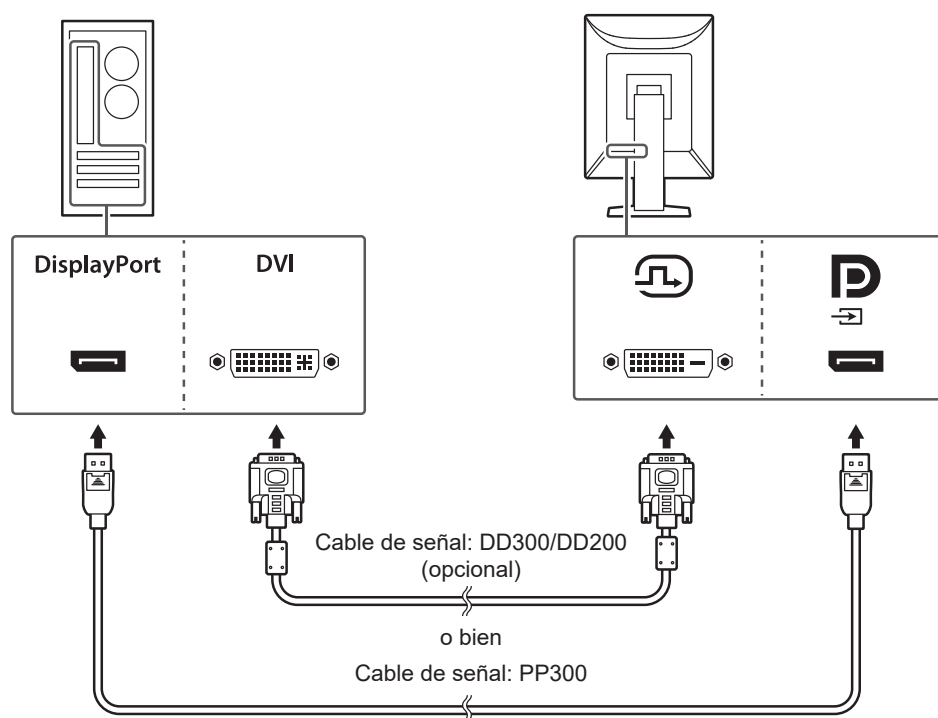

### Atención

- Los conectores DisplayPort del monitor cuentan con conectores de entrada y salida. Cuando conecte el monitor a un PC, conecte el cable al conector de entrada.
- Cuando conecte a varios PC, cambie la señal de entrada. Para obtener más información, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

### Nota


- Si resulta difícil insertar los cables, ajuste el ángulo de la pantalla.

### Al conectar otros monitores mediante una conexión en cadena margarita


La señal de entrada al conector de entrada DisplayPort puede salir a otro monitor.

**Atención**


- Visite el sitio web de EIZO para obtener más información sobre los monitores y tarjetas gráficas que pueden utilizarse para una conexión en cadena margarita: ([www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com))
- Para establecer una conexión en cadena margarita, asegúrese de que "DisplayPort" en el menú de ajustes de administrador esté ajustado en "Version 1.2". Para obtener más información, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
- Retire la tapa del conector de salida DisplayPort antes de conectar el cable de señal.

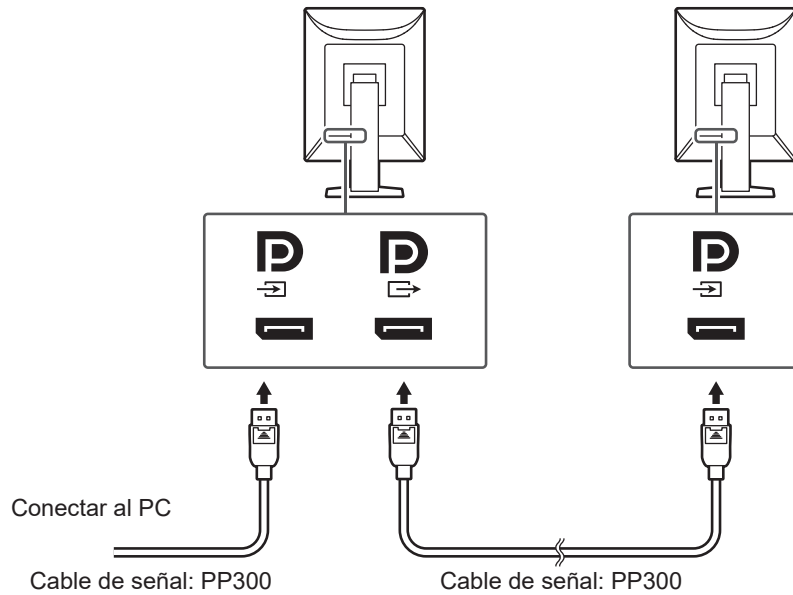



2. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente y al conector de alimentación del monitor.  
 Inserte el cable de alimentación correctamente en el monitor.
3. Conecte el cable USB al puerto USB de conexión de flujo ascendente del monitor y al puerto USB de conexión de flujo descendente del PC, respectivamente.  
 La conexión del cable es necesaria cuando utiliza RadiCS/RadiCS LE, o cuando conecta al monitor un dispositivo USB (dispositivo periférico conectado por USB).

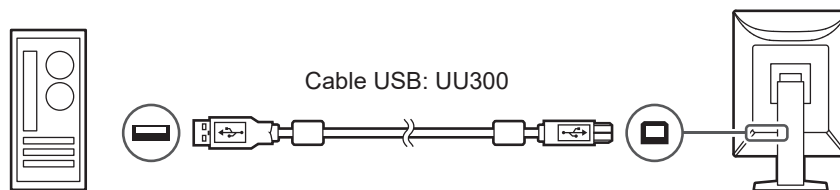

## 2.3 Encendido

1. Pulse  para encender el monitor.  
 El indicador del interruptor de alimentación del monitor se enciende en verde.  
 Si el indicador no se enciende, vea [3 No aparece ninguna imagen \[▶ 26\]](#).

**Nota**

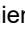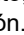- Si con el monitor apagado toca cualquiera de los interruptores de funcionamiento, excepto ,  empieza a parpadear para indicarle dónde está el interruptor de alimentación.



2. Encienda el PC.

Aparece la imagen de pantalla.

Si no aparece ninguna imagen, vea [3 No aparece ninguna imagen \[▶ 26\]](#) para obtener más información.

**Atención**


- Al conectar por primera vez o cambiar el método de conexión, algunos ajustes de visualización, como la resolución y la escala, pueden no ser los apropiados. Compruebe que la configuración del PC sea correcta.
- Se recomienda apagar el monitor por medio del botón de alimentación para ahorrar energía. Cuando no utilice el monitor, puede apagarlo o desconectarlo del enchufe de corriente de forma que se corte la alimentación eléctrica completamente.

**Nota**

- Para maximizar la vida útil del monitor, evitar la degradación del brillo y reducir el consumo eléctrico, lleve a cabo lo siguiente:
  - Use la función de ahorro de energía del PC o el monitor.
  - Cuando haya terminado de utilizar el monitor, apáguelo.

## 2.4 Ajuste de la altura y el ángulo de la pantalla

Sujete con ambas manos los extremos superior e inferior o izquierdo y derecho del monitor para regular la altura, la inclinación y el giro de la pantalla, y conseguir la posición de trabajo óptima.

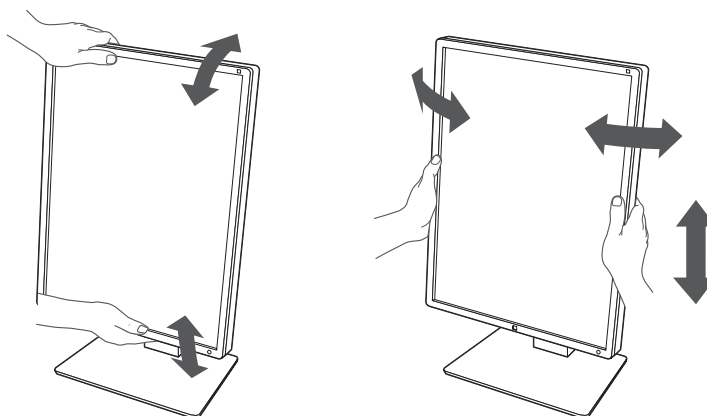


**Atención**

- Cuando se haya completado el ajuste, asegúrese de que los cables estén bien conectados.
- Después de ajustar la altura y la inclinación, introduzca los cables en el portacables.

## 3 No aparece ninguna imagen

### El indicador del interruptor de alimentación no se enciende.

- Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente.
- Encienda el interruptor de alimentación principal.
- Toque .
- Desconecte la alimentación principal y vuelva a conectarla.

### El indicador del interruptor de alimentación se enciende: Verde

- Aumente "Brillo", "Contraste", o "Ganancia" en el menú Ajustes (no se puede ajustar en los modos 1-DICOM, 2-CAL1 y 3-CAL2). Para obtener más información, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
- Desconecte la alimentación principal y vuelva a conectarla.

### El indicador del interruptor de alimentación se enciende: Naranja


- Cambie la señal de entrada. Para obtener más información, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
- Mueva el ratón o pulse cualquier tecla del teclado.
- Compruebe si el PC está encendido.
- Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. Conecte al conector de entrada DisplayPort cuando introduzca una señal DisplayPort. El conector de salida DisplayPort se utiliza para la salida cuando se establece una conexión en cadena margarita.
- Desconecte la alimentación principal y vuelva a conectarla.

### El indicador del interruptor de alimentación parpadea: Naranja, Verde

- Conecte mediante los cables de señal especificados por EIZO. Desconecte la alimentación principal y vuelva a conectarla.
- Si el cable de señal está conectado a DisplayPort, intente cambiar la versión de DisplayPort. Para obtener más información, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

### El mensaje "Señal no" aparece en pantalla.

Ejemplo:

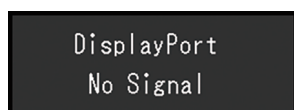


- Es posible que aparezca el mensaje mostrado anteriormente, ya que algunos PC no emiten esta señal inmediatamente después de haberse encendido.
- Compruebe si el PC está encendido.

- Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. Conecte los cables de señal a los conectores de la señal de entrada correspondiente.
- Cambie la señal de entrada. Para obtener más información, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
- Si el cable de señal está conectado a DisplayPort, intente cambiar la versión de DisplayPort. Para obtener más información, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
- Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. Compruebe que el cable de señal está conectado al conector de entrada DisplayPort cuando introduzca una señal DisplayPort. El conector de salida DisplayPort se utiliza para la salida cuando se establece una conexión en cadena margarita.
- Desconecte la alimentación principal y vuelva a conectarla.

## El mensaje "Error de señal" aparece en pantalla

El mensaje "Error de señal" aparece en pantalla.

Ejemplo:

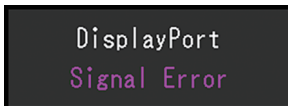

- Compruebe si el PC está configurado para satisfacer los requisitos de resolución y frecuencia de barrido vertical del monitor (vea [4.2 Resoluciones compatibles](#) ▶ 30]).
- Reinicie el PC.
- Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar la configuración adecuada. Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener más información.
- Si el cable de señal está conectado a DisplayPort, intente cambiar la versión de DisplayPort. Para obtener más información, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

## 4 Especificaciones

### 4.1 Lista de especificaciones

#### 4.1.1 Panel LCD

Tipo	IPS (antirreflejos)
Luz de fondo	LED
Tamaño	21,3 " (54,0 cm)
Resolución	1200 puntos x 1600 líneas
Área de visualización (H x V)	324,0 mm x 432,0 mm
Tamaño de píxel	0,270 mm x 0,270 mm
Colores de visualización	Color de 10 bits (DisplayPort): hasta 1070 millones de colores (de una paleta de aproximadamente 543 000 millones de colores) 8 bits (DisplayPort/DVI): 16,77 millones de colores (de una paleta de aproximadamente 543 000 millones de colores)
Ángulo de visualización (H/V, típico)	178°/178°
Brillo recomendado	270 cd/m <sup>2</sup>
Tiempo de contraste (típico)	1800:1
Tiempo de respuesta (típico)	20 ms (negro -> blanco -> negro)

#### 4.1.2 Señales de vídeo

Conectores de entrada	DisplayPort x 1, DVI-D (single link) x 1	
Terminales de salida	DisplayPort x 1	
Frecuencia de barrido horizontal	31 kHz – 100 kHz	
Frecuencia de barrido vertical <sup>*1</sup>	59 Hz–61 Hz (720 x 400: 69 Hz–71 Hz)	
Modo de sincronización de trama	59 Hz–61 Hz	
Frecuencia del reloj de puntos	DisplayPort	25 MHz – 164,5 MHz
	DVI	25 MHz – 164,5 MHz

\*1 La frecuencia de barrido vertical que es compatible varía de acuerdo con la resolución. Para obtener más información, vea [4.2 Resoluciones compatibles](#) [▶ 30].

#### 4.1.3 USB

Puerto	Conexión de flujo ascendente	USB-B x 1
	Conexión de flujo descendente	USB-A x 2
Estándar	Especificación USB revisión 2.0	
Corriente de suministro	Conexión de flujo descendente (USB-A)	Máx. 500 mA por puerto

#### 4.1.4 Alimentación

Entrada	100–240 VAC $\pm$ 10 %, 50/60 Hz, 0,85–0,45 A
Consumo energético máximo	54 W o menos
Modo de ahorro de energía	0,6 W o menos <sup>*1</sup>
Modo de espera	0,6 W o menos <sup>*2</sup>

\*1 Cuando se usa la entrada DisplayPort y el puerto USB de conexión de flujo ascendente no está conectado, "DP Power Save": "On", "DisplayPort", "Version 1.1 10bit", "Version 1.1 8bit", no hay ninguna carga externa conectada

\*2 Cuando el puerto USB de conexión de flujo ascendente no está conectado, "DP Power Save": "On", "DisplayPort", "Version 1.1 10bit", "Version 1.1 8bit", no hay ninguna carga externa conectada

#### 4.1.5 Especificaciones físicas

Dimensiones (anch. x alt. x prof.)	356,5 mm x 482,3 mm – 572,3 mm x 200,0 mm (Inclinación: 0°) 356,5 mm x 506,1 mm – 596,1 mm x 260,9 mm (Inclinación: 30°)
Dimensiones (anch. x alt. x prof.) (sin soporte)	356,5 mm x 464,5 mm x 70,5 mm
Peso neto	Aprox. 7,2 kg
Peso neto (sin soporte)	Aprox. 4,3 kg
Rango de ajuste de altura	90 mm (inclinación: 0°)
Inclinación	Hacia arriba 30°, hacia abajo 5°
Giro	70°
Rotación	90° (en el sentido contrario a las agujas del reloj)

#### 4.1.6 Requisitos ambientales de operación

Temperatura	0 °C–35 °C
Humedad	20 %–80 % H.R. (sin condensación)
Presión atmosférica	540 hPa–1060 hPa

#### 4.1.7 Condiciones de transporte y almacenamiento

Temperatura	-20 °C–60 °C
Humedad	10 %–90 % H.R. (sin condensación)
Presión atmosférica	200 hPa–1060 hPa

## 4.2 Resoluciones compatibles

El monitor admite las siguientes resoluciones.

✓: Admitida, -: No admitida

Resolución	Frecuencia de barrido vertical (Hz)	DisplayPort		DVI	
		Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
720 x 400	70,087	✓	✓	✓	✓
640 x 480	59,940	✓	✓	✓	✓
800 x 600	60,317	✓	✓	✓	✓
1024 x 768	60,004	✓	✓	✓	✓
1280 x 1024	60,020	-	✓	-	✓
1600 x 1200 <sup>*1</sup>	60,000	-	✓	-	✓
1200 x 1600 <sup>*1</sup>	59,963	✓	-	✓	-

\*1 Resolución recomendada

## 4.3 Accesorios

Los accesorios siguientes están disponibles por separado.

Para obtener información actualizada sobre los accesorios opcionales y sobre la tarjeta gráfica compatible más reciente, consulte nuestro sitio web.

([www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com))

Kit de calibración	RadiCS UX2 versión 5.1.1 o posterior RadiCS Version Up Kit versión 5.1.1 o posterior
Software de gestión del control de calidad de la red	RadiNET Pro versión 5.1.1 o posterior
Kit de limpieza	ScreenCleaner (limpiador de pantallas)
Luz cómoda para salas de lectura	RadiLight
Brazo	AAH-02B3W LA-011-W
Protector de panel	RP-915 FP-2101
Adaptador VESA para cliente delgado o miniPC	PCSK-R1
Cable de señal (DVI-D - DVI-D)	DD300 DD200

## Apéndice

### Estándar médico

- Deberá garantizarse que el sistema final cumpla con los requisitos de la norma IEC60601-1.
- Los equipos alimentados por energía eléctrica pueden emitir ondas electromagnéticas, que podrían influir en, limitar o causar un mal funcionamiento del monitor. Instale el equipo en un entorno controlado en el que se eviten tales efectos.

### Clasificación del equipo

- Tipo de protección frente a descargas eléctricas: Clase I
- Clase CEM: IEC60601-1-2 Grupo 1, Clase B
- Clasificación del producto sanitario (UE): Clase I
- Modo de funcionamiento: continuo
- Clase IP: IPX0

## Información sobre compatibilidad electromagnética (CEM)

La serie RadiForce puede mostrar imágenes médicas de forma adecuada.

### Entornos de uso previsto

La serie RadiForce se ha diseñado para su uso en los siguientes entornos

- Entornos de centros sanitarios profesionales como clínicas y hospitales

Los siguientes entornos no son adecuados para utilizar la serie RadiForce:

- Entornos de asistencia sanitaria doméstica
- Cerca de equipos quirúrgicos de alta frecuencia como un bisturí electroquirúrgico
- Cerca de equipos terapéuticos de onda corta
- En habitaciones protegidas contra señales de RF de sistemas médicos para IRM
- En entornos específicos protegidos
- En vehículos, entre otros, ambulancias
- Otros entornos específicos

#### ADVERTENCIA

- La serie RadiForce exige adoptar precauciones especiales con respecto a la CEM y se debe instalar. Es necesario leer detenidamente la información sobre CEM y la sección "PRECAUCIONES" de este documento. Además, se deben respetar y seguir las instrucciones al instalar y utilizar el producto.

#### ADVERTENCIA

- La serie RadiForce no debe usarse pegada a otros equipos ni montada encima o debajo de otros equipos. Si fuera necesario su uso de tal manera, deberá observarse el equipo o el sistema para comprobar que funciona con normalidad en la configuración en la que se va a utilizar.

#### ADVERTENCIA

- Si utiliza un equipo de comunicación por RF portátil, manténgalo a 30 cm (12 pulgadas) o más de cualquier pieza, incluidos los cables, del RadiForce. De lo contrario, podría producirse una degradación del rendimiento de este equipo.


#### ADVERTENCIA

- La persona que conecte equipos adicionales a las entradas o salidas de señal en la configuración de un sistema médico será responsable de que el sistema cumpla con los requisitos estipulados en IEC60601-1-2.

#### ADVERTENCIA

- No deben tocarse los conectores de entrada/salida de señal mientras se usa la serie RadiForce. De lo contrario, podría verse afectada la imagen mostrada.



 <b>ADVERTENCIA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de utilizar los cables suministrados con el producto o cables recomendados por EIZO.</li> </ul> <p>El uso de otros cables distintos a los recomendados por EIZO puede provocar un incremento de las emisiones electromagnéticas o una reducción de la inmunidad electromagnética de este equipo, así como un funcionamiento incorrecto.</p>

Cable	Cables designados por EIZO	Longitud máx. del cable	Protección	Núcleo de ferrita
Cable de señal (DisplayPort)	PP300/PP200	3 m	Protegido	Sin núcleos de ferrita
Cable de señal (DVI)	DD300/DD200	3 m	Protegido	Con núcleos de ferrita
Cable USB	UU300/MD-C93	3 m	Protegido	Con núcleos de ferrita
Cable de alimentación (con cable de tierra)	-	3 m	Sin protección	Sin núcleos de ferrita

## Descripciones técnicas

### Emisiones electromagnéticas

La serie RadiForce se ha diseñado para su uso en los entornos electromagnéticos que se indican a continuación.

El cliente o el usuario de la serie RadiForce debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.


Prueba de emisiones	Cumplimiento	Pautas sobre el entorno electromagnético
Emisiones de RF CISPR11	Grupo 1	La serie RadiForce usa energía de RF solo para su funcionamiento interno.  Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR11	Clase B	La serie RadiForce es apta para su uso en todos los ámbitos, incluidos los residenciales y los conectados directamente a la red eléctrica pública de baja tensión que abastece a los edificios destinados al uso doméstico.
Emisiones de armónicos IEC61000-3-2	Clase D	
Fluctuaciones de tensión/emisiones de parpadeos IEC61000-3-3	Cumple	

### Inmunidad electromagnética

La serie RadiForce se ha probado en los siguientes niveles de conformidad según los requisitos (T) de ensayo para los entornos sanitarios profesionales especificados en IEC60601-1-2.

El cliente o el usuario de la serie RadiForce debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Ensayo de inmunidad	Nivel de ensayo (T)	Nivel de conformidad (C)	Pautas sobre el entorno electromagnético
Descarga electrostática (ESD) IEC61000-4-2	Descarga de contacto de $\pm 8$ kV Descarga de aire de $\pm 15$ kV	Descarga de contacto de $\pm 8$ kV Descarga de aire de $\pm 15$ kV	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas cerámicas. Si los suelos están recubiertos de algún material sintético, la humedad relativa debe ser al menos del 30 %.
Transitorios eléctricos rápidos/en ráfagas IEC61000-4-4	Líneas eléctricas de $\pm 2$ kV Líneas de entrada/salida de $\pm 1$ kV	Líneas eléctricas de $\pm 2$ kV Líneas de entrada/salida de $\pm 1$ kV	La calidad de la corriente suministrada por la red eléctrica debe ser la habitual en entornos comerciales u hospitalarios normales.
Sobretensión IEC61000-4-5	$\pm 1$ kV línea a línea $\pm 2$ kV línea a tierra	$\pm 1$ kV línea a línea $\pm 2$ kV línea a tierra	La calidad de la corriente suministrada por la red eléctrica debe ser la habitual en entornos comerciales u hospitalarios normales.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de suministro de energía eléctrica IEC61000-4-11	0 % $U_T$ (caída del 100 % en $U_T$ ) 0,5 ciclos y 1 ciclo 70 % $U_T$ (caída del 30 % en $U_T$ ) 25 ciclos/50 Hz 0 % $U_T$ (caída del 100 % en $U_T$ ) 250 ciclos/50 Hz	0 % $U_T$ (caída del 100 % en $U_T$ ) 0,5 ciclos y 1 ciclo 70 % $U_T$ (caída del 30 % en $U_T$ ) 25 ciclos/50 Hz 0 % $U_T$ (caída del 100 % en $U_T$ ) 250 ciclos/50 Hz	La calidad de la corriente suministrada por la red eléctrica debe ser la habitual en entornos comerciales u hospitalarios normales. Si el usuario de la serie RadiForce necesita que el dispositivo siga funcionando a pesar de que haya cortes en el suministro de la red de energía eléctrica, se recomienda conectar la serie RadiForce a un sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida o una batería.
Campos magnéticos a frecuencia de red IEC61000-4-8	30 A/m (50/60 Hz)	30 A/m	Los campos magnéticos a frecuencia de red deben encontrarse en los niveles característicos de una instalación típica en un entorno comercial u hospitalario normal.  El producto debe mantenerse a unos 15 cm, como mínimo, de la fuente de campos magnéticos a frecuencia de red durante su uso.

Ensayo de inmunidad	Nivel de ensayo (T)	Nivel de conformidad (C)	Pautas sobre el entorno electromagnético
Perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de RF IEC61000-4-6	3 Vrms De 150 kHz–80 MHz 6 Vrms bandas ISM entre 150 kHz y 80 MHz <sup>*1</sup>	3 Vrms 6 Vrms	Los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles no deben usarse más próximos a ninguna pieza de la serie RadiForce, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$
Campos de RF radiada IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz–2,7 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$ , 80 MHz–800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ , 800 MHz–2,7 GHz Donde "P" es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y "d" es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo de transmisores de RF fijos, conforme se determinen mediante un estudio electromagnético de campo <sup>*2</sup> , deben ser menores que el nivel de conformidad en cada rango de frecuencias <sup>*3</sup> . Pueden producirse interferencias cerca de equipos que tengan el símbolo siguiente. 

**Nota**

- $U_T$  es la tensión de CA de la red antes de aplicar el nivel de ensayo.
- A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
- Estas pautas sobre las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de RF o campos radiados de RF, pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión en estructuras, objetos y personas.

<sup>\*1</sup> Las bandas ISM (industrial, científica y médica) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz, de 13,553 MHz a 13,567 MHz, de 26,957 MHz a 27,283 MHz y de 40,66 MHz a 40,70 MHz.

<sup>\*2</sup> Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de radioaficionados, emisoras de radio AM y FM y emisoras de televisión, no se pueden predecir con exactitud de forma teórica. Para evaluar el entorno electromagnético provocado por transmisores de RF fijos, debe considerarse la posibilidad de realizar un estudio electromagnético de campo. Si la intensidad del campo medida en el lugar en el que se usa la serie RadiForce supera el nivel de conformidad de RF correspondiente indicado anteriormente, debe vigilarse la serie RadiForce a

fin de comprobar que funciona correctamente. Si se observa un funcionamiento anómalo, puede que sean necesarias medidas adicionales, como la reorientación o la reubicación de la serie RadiForce.

- \*3 En el rango de frecuencias comprendido entre 150 kHz y 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

### Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación por RF portátiles o móviles y la serie RadiForce

La serie RadiForce está diseñada para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlen las perturbaciones por emisiones de RF radiada. El cliente o el usuario de la serie RadiForce pueden eliminar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima (30 cm) entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores) y la serie RadiForce. La serie RadiForce se ha probado al siguiente nivel de cumplimiento (C) para los requisitos de nivel de ensayo de inmunidad del campo electromagnético próximo (T) para los siguientes servicios de comunicación de RF.

Frecuencia de ensayo (MHz)	Ancho de banda <sup>*1</sup> (MHz)	Servicio <sup>*1</sup>	Modulación <sup>*2</sup>	Nivel de ensayo (T) <sup>*3</sup> (V/m)	Nivel de conformidad (C) (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Modulación por impulsos <sup>*2</sup> 18 Hz	27	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM desviación de $\pm 5$ kHz sinusoidal de 1 kHz	28	28
710 745 780	704 – 787	Banda LTE 13, 17	Modulación por impulsos <sup>*2</sup> 217 Hz	9	9
810 870 930	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, Banda LTE 5	Modulación por impulsos <sup>*2</sup> 18 Hz	28	28
1720 1845 1970	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulación por impulsos <sup>*2</sup> 217 Hz	28	28
2450	2400 – 2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Modulación por impulsos <sup>*2</sup> 217 Hz	28	28
5240 5500 5785	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulación por impulsos <sup>*2</sup> 217 Hz	9	9

\*1 En algunos servicios solo se incluyen las frecuencias de enlace ascendente.

\*2 La portadora se modula utilizando una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50 %.

\*3 Los niveles de prueba se calcularon con la potencia máxima y 30 cm de distancia de separación.

El cliente o el usuario de la serie RadiForce suprime las interferencias causadas por los campos magnéticos próximos al mantener una distancia mínima (15 cm) entre los transmisores de RF y la serie de RadiForce. La serie RadiForce se ha probado a los siguientes niveles de cumplimiento (C) para los requisitos de niveles de ensayo de inmunidad del campo magnético próximo (T).

Frecuencia de ensayo	Modulación	Nivel de ensayo (T) (A/m)	Nivel de conformidad (C) (A/m)
134,2 kHz	Modulación por impulsos <sup>*1</sup> 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Modulación por impulsos <sup>*1</sup> 50 kHz	7,5	7,5

\*1 La portadora se modula utilizando una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50 %.

En el caso de otros equipos de comunicación por RF portátiles y móviles (transmisores), debe mantenerse una distancia mínima entre dichos equipos y la serie RadiForce, según lo recomendado a continuación, de acuerdo con la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal máxima de salida del transmisor (W)	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)		
	150 kHz – 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz – 2,7 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

En el caso de los transmisores cuya potencia nominal máxima de salida no figura en la tabla anterior, la distancia de separación recomendada "d" en metros (m) se puede calcular por medio de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde "P" es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

Nota
<ul style="list-style-type: none"> <li>A 80 y 800 MHz se debe aplicar la distancia de separación para un rango de frecuencias más alto.</li> <li>Estas pautas sobre las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de RF o campos radiados de RF, pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión en estructuras, objetos y personas.</li> </ul>




**EIZO Corporation**   
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

**EIZO GmbH**   
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

**艺卓显像技术(苏州)有限公司**  
中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

**EIZO Limited**   
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,  
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

**EIZO AG**   
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N343AZ  
IFU-MX217