



Bruksanvisning

RadiForce® RX670

LCD-fargeskjerm

Viktig

Sørg for at du leser bruksanvisningen og installasjonshåndboken før bruk.

- Se installasjonshåndboken for skjerminnstillinger og -justeringer.
- Den nyeste produktinformasjonen, inkludert bruksanvisningen, er tilgjengelig på nettsiden vår.

www.eizoglobal.com

SYMBOLER

Denne håndboken og dette produktet bruker sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk viktig informasjon. Les denne informasjonen grundig.

 ADVARSEL	Hvis ikke informasjonen i en ADVARSEL overholdes, kan det føre til alvorlig personskade med livsfare.
 FORSIKTIG	Hvis ikke informasjonen i en FORSIKTIGHETSREGEL overholdes, kan det resultere i moderat personskade og/eller skade på eiendom eller skade på produktet.
	Angir en advarsel eller forsiktighetsregel. For eksempel angir  en fare for «elektrisk støt».
	Angir en forbudt handling. For eksempel betyr  «skal ikke demonteres».

Dette produktet er tilpasset spesifikt for bruk i regionen det opprinnelig ble sendt til. Hvis den brukes utenfor denne regionen, kan det hende at produktet ikke fungerer som angitt i spesifikasjonene.

Ingen deler av denne håndboken kan reproduseres, lagres i et søkesystem, eller sendes, i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk eller på annen måte, uten forutgående skriftlig tillatelse fra EIZO Corporation.

EIZO Corporation er ikke forpliktet til å holde innsendt materiale eller informasjon konfidensiell, med mindre det på forhånd er inngått avtaler i overensstemmelse med EIZO Corporations mottak av nevnte informasjon. Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre at denne håndboken inneholder oppdatert informasjon, må du være oppmerksom på at spesifikasjonene for EIZO-produktet kan endres uten forvarsel.


FORHOLDSREGLER

Viktig

Dette produktet er tilpasset spesifikt for bruk i regionen det opprinnelig ble sendt til. Hvis den brukes utenfor denne regionen, kan det hende at produktet ikke fungerer som angitt i spesifikasjonene.

Delen «FORHOLDSREGLER» og forsiktighetsmeldinger på skjermen må leses grundig for å ivareta personsikkerhet og korrekt vedlikehold.

Plassering av forsiktighetserklæring

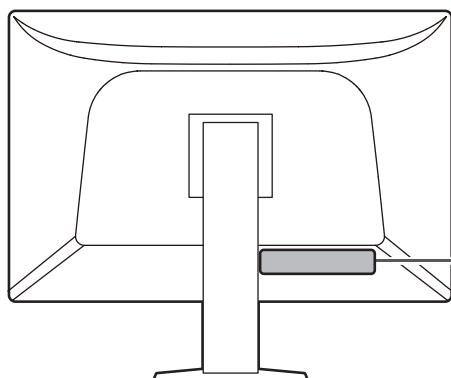



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

WARNUNG
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

警告
触电危険、请勿打开后盖。

警告
感電の恐れあり、カバーをあけないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
L'appareil doit être relié à une prise avec terre.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
设备必须连接到接地的电源插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

Symboler på enheten

Symbol	Dette symbolet angir
	Hovedstrømbryter: Trykk for å slå av hovedstrømmen til skjermen.
	Hovedstrømbryter: Trykk for å slå på hovedstrømmen til skjermen.
	Strømknapp: Trykk for å slå av eller på strømmen til skjermen.
	Vekselstrøm
	Varsel om elektrisk støt
	FORSIKTIG
	WEEE-merket: Produktet må kastes separat. Materialer kan resirkuleres.
	CE-merking: Merket for EU-samsvar i henhold til bestemmelsene i rådsdirektiv og/eller forordning (EU).
	Produsent
	Produksjonsdato
	Forsiktig: Føderale lover i USA begrenser salg eller bestilling av denne enheten til lisensiert helsepersonell.
	Medisinsk utstyr i EU

FORHOLDSREGLER

Symbol	Dette symbolet angir
EU Importer	Importør i EU
	Merke som indikerer samsvar med britiske forskrifter
	Ansvarlig person i Storbritannia
	Autorisert representant i Sveits
	Autorisert representant i EU

ADVARSEL



ADVARSEL

Hvis enheten begynner å avgi røyk, lukter som om noe brenner eller lager merkelige lyder, må du koble fra alle strømkontakter umiddelbart og kontakte din EIZO-representant for råd.

Forsøk på å bruke en enhet som ikke virker som den skal, kan resultere i brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.



ADVARSEL

Ikke ta fra hverandre eller endre enheten.

Hvis kabinettet åpnes, kan dette forårsake elektrisk støt eller brannskade på grunn av deler med høy spenning eller temperatur. Modifisering av en enhet kan forårsake brann eller elektrisk støt.



ADVARSEL

Overlat all service til kvalifisert servicepersonell.

Forsøk ikke selv å utføre servicearbeid på dette produktet, fordi åpning eller fjerning av deksler kan resultere i brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.



ADVARSEL

Hold fremmedlegemer unna enheten, og ikke la enheten komme i kontakt med væsker.

Metalldele, lettantennelig materiale eller væsker kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade på utstyret hvis de uforvarende faller i kabinettet.

Hvis en gjenstand eller væske faller/trenger inn i kabinettet, må du umiddelbart koble fra enheten. Få en kvalifisert servicetekniker til å kontrollere enheten før den tas i bruk igjen.




ADVARSEL

Plasser enheten på et stødig og stabilt sted.




En enhet som er plassert på et uegnet underlag, kan falle ned og forårsake personskafe.

Hvis enheten faller ned, må du koble fra alle strømkontakter umiddelbart og be din lokale EIZO-representant om råd. Du må ikke fortsette å bruke en skadet enhet. Bruk av en skadet enhet kan føre til brann eller elektrisk støt.

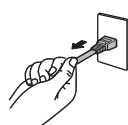 ADVARSEL Bruk enheten på et egnet sted. Hvis ikke kan brann, elektrisk støt eller skade på utstyr oppstå. • Ikke plasser enheten utendørs. • Ikke plasser enheten i noen form for transportmiddel (skip, fly, tog, bil osv.). • Ikke plasser den i støvete eller fuktige omgivelser. • Ikke plasser enheten på steder der vann kan sprute på skjermen (bad, kjøkken osv.) • Enheten må ikke plasseres på steder der damp kommer i direkte kontakt med skjermen. • Ikke plasser enheten i nærheten av varmegenererende utstyr eller luftfuktere. • Ikke plasser enheten på et sted hvor produktet utsettes for direkte sollys. • Enheten må ikke plasseres i omgivelser med brennbar gass. • Må ikke plasseres i miljøer med korrosive gasser (Slik som svoveldioksid, hydrogensulfid, nitrogendioksid, klor, ammoniakk og ozon). • Må ikke plasseres i miljø med støv, komponenter som øker korrodering i atmosfæren (slik som natriumklorid og svovel), ledende metaller og lignende. 
 ADVARSEL Plastemballasje oppbevares utilgjengelig for spedbarn og barn. Plastemballasjen kan forårsake kvelningsfare.
 ADVARSEL Bruk den vedlagte strømkabelen og koble den til strømutfgangen som er standard i landet ditt. Forsikre deg om at spenningen i uttaket er innenfor spenningen som er godkjent for strømkabelen. Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt. Strømforsyning: 100–240 V AC 50/60 Hz
 ADVARSEL Grip bestemt om støpselet og trekk for å koble fra strømkabelen. Rykking i kabelen kan føre til skade og forårsake brann eller elektrisk støt.  OK   
 ADVARSEL Utstyret må kobles til et jordnet strømuttak. Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt. 

 ADVARSEL Bruk korrekt spenning. - Enheten er utformet for bruk kun med en bestemt spenning. Tilkobling til annen spenning enn det som er spesifisert i denne «bruksanvisningen» kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade på utstyret. Strømforsyning: 100–240 V AC 50/60 Hz - Ikke overbelast strømkretsen, da dette kan resultere i brann eller elektrisk støt.
 ADVARSEL Håndter strømkabelen forsiktig. Ikke plasser tunge gjenstander på strømkabelen og unngå å trekke i eller knyte strømkabelen. Bruk av en skadet strømkabel kan forårsake brann eller elektrisk støt. 
 ADVARSEL Operatøren må ikke berøre pasienten mens produktet berøres. Dette produktet er ikke designet for å berøres av pasienter. 
 ADVARSEL Ikke berør støpselet og strømkabelen når det tordner. Dette kan forårsake elektrisk støt. 
 ADVARSEL Ved montering av en armfot, se brukerhåndboken til armen og installer enheten på sikker måte. Hvis ikke, kan enheten løsne og forårsake personskade og/eller skade på utstyr. Før installasjon må du kontrollere at skrivebord, vegger eller andre monteringsflater har tilstrekkelig mekanisk styrke. Hvis enheten faller ned, må du koble fra alle strømkontakter umiddelbart og be din lokale EIZO-representant om råd. Du må ikke fortsette å bruke en skadet enhet. Bruk av en skadet enhet kan føre til brann eller elektrisk støt. Bruk de samme skruene og trekk dem godt til når du monterer vippefoten på nytt.
 ADVARSEL Ikke ta på en skadet LCD-skjerm direkte med bare hender. Vask grundig hvis noen del av huden eller kroppen kommer i direkte kontakt med skjermen. Hvis du får flytende krystall i munnen eller øynene, må du øyeblikkelig skylle med store mengder vann og oppsøke medisinsk hjelp. Dette kan ellers forårsake en giftig reaksjon. 
 ADVARSEL Be en fagkyndig person om hjelp ved installasjon på et høytliggende sted. Når skjermen installeres på et høytliggende sted, oppstår risiko for at produktet eller delene dets faller ned og forårsaker personskade. Be oss om hjelp, eller ta kontakt med en fagkyndig person som er spesialisert på byggearbeid når du installerer skjermen, deriblant for inspeksjon av produktet for skade eller deformasjon både før og etter installasjon av skjermen.

FORSIKTIG

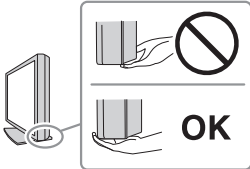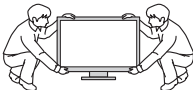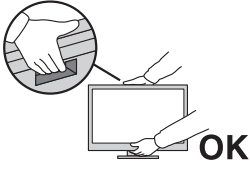 FORSIKTIG Du må ikke se direkte på lyskilden til baklyset eller arbeidslyset. Det kan potensielt forårsake ubehag i øynene og synsproblemer.
 FORSIKTIG Du må ikke bruke for mye kraft på armen til arbeidslyset. Hvis du bøyer eller vrir armen med mye kraft, kan det forårsake skade eller funksjonsfeil.
 FORSIKTIG Sjekk driftstilstanden før bruk. Start bruken etter at du har forsikret deg om at det ikke er noen problemer med bilder på skjermen. Ved bruk av flere enheter skal bruken startes etter at bildene vises riktig.
 FORSIKTIG Fest kablene/ledningene som har en festefunksjon, ordentlig. Hvis de ikke festes ordentlig, kan kabler/ledninger kobles fra, noe som kan føre til at bilder kuttes og at driften forstyrres.
 FORSIKTIG Koble fra kabler og fjern tilbehør når du flytter på enheten. Kablene eller tilbehøret kan ellers løsne når de flyttes og forårsake personskaade.
 FORSIKTIG Bær eller plasser enheten i henhold til korrekte, spesifiserte metoder. • Hold godt på undersiden av skjermen hvis produktet skal flyttes. • Skjermer på 30 tommer eller større er svært tunge. Når du pakker opp og/eller bærer skjermen, må du påse at minst to mennesker hjelper til. • Grip og hold godt på undersiden av skjermen og håndtaket hvis enheten er utstyrt med håndtak. Hvis enheten mistes i gulvet, kan det resultere i personskaade eller skade på utstyret.    
 FORSIKTIG Unngå at hendene dine kommer i klem. Hendene dine kan komme i klem og skades hvis du bruker brå kraft på skjermen for å justere høyden eller vinkelen.

 FORSIKTIG	Kabinettets ventilasjonsåpninger må ikke blokkeres. • Ikke plasser gjenstander på ventilasjonsåpningene. • Ikke installer enheten på et sted med dårlig ventilasjon eller utilstrekkelig plass. • Ikke bruk enheten i liggende stilling eller opp ned. Dersom ventilasjonsåpningene blir blokkert, hindres luftstrømmen. Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret. 
 FORSIKTIG	Ikke berør strømstøpselet med våte hender. Dette kan forårsake elektrisk støt.  
 FORSIKTIG	Ikke plasser gjenstander rundt strømstøpselet. Dette er for å forenkle frakobling av strømstøpselet ved eventuelle problemer og for å unngå brann eller elektrisk støt. 
 FORSIKTIG	Rengjør området rundt strømstøpselet og ventilasjonsåpningene på skjermen regelmessig. Støv, vann eller olje i dette området kan forårsake brann.
 FORSIKTIG	Koble fra enheten før den skal rengjøres. Rengjøring av enheten mens den er koblet til en strømutgang, kan føre til elektrisk støt.
 FORSIKTIG	Hvis du planlegger å la enheten forbli ubrukt i en lengre periode, må du slå av strømbryteren og så trekke ut strømstøpselet fra veggkontakten av hensyn til sikkerhet og strømsparing.
 FORSIKTIG	Dette produktet skal avhendes i samsvar med lovene som gjelder på ditt sted eller i bostedslandet ditt.
 FORSIKTIG	For brukere i EØS og Sveits: Alle alvorlige hendelser i tilknytning til enheten må rapporteres til produsenten og til ansvarlig myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er etablert.

Merknader for denne skjermen

Indikasjoner for bruk

Produktet er indisert for bruk ved visning av radiologibilder for gjennomgang, analyse og diagnose av opplært legepersonell. Skjermen er ikke beregnet på mammografi.

Obs!

- Dette produktet er ikke beregnet for diagnoseformål in vitro.
- Dette produktet dekkes ikke av garantien for annen bruk enn det som er beskrevet i denne håndboken.
- Spesifikasjonene som nevnes i denne bruksanvisningen, gjelder bare når strømkabelen som medfølger sammen med produktet og signalkabler som er spesifisert av EIZO.
- Bare bruk EIZO-tilbehør som er spesifisert for bruk med dette produktet av EIZO.

Forholdsregler for bruk

- Deler (som LCD-panelet og viften) kan få redusert ytelse hvis de brukes i lengre tidsperioder. Kontroller regelmessig at alt fungerer normalt.
- Når skjermbildet byttes etter å ha vist det samme bildet i lengre tid, kan det oppstå et etterbilde. Bruk skjermbeskytteren eller strømsparingsfunksjonen for å unngå å vise det samme bildet i lengre perioder om gangen. Avhengig av det viste bildet kan et etterbilde vises selv etter en kort periode. Du må skifte bildet eller la skjermen være slått av i flere timer for å fjerne etterbildet.
- Det tar flere minutter før skjermen har stabilisert seg. Før du bruker skjermen, må du vente i noen få minutter eller lengre etter at skjermen er slått på, eller etter at skjermen er aktivert igjen etter strømsparingsmodus.
- Hvis skjermen kontinuerlig står på over en lengre tidsperiode, kan det forekomme flekker eller innbrenning. Vi anbefaler at skjermen slås av periodisk for å forlenge levetiden.
- Bakgrunnsbelysningen på LCD-panelet har en fastsatt levetid. Avhengig av bruksmønstret, som bruk i lengre, kontinuerlige perioder, kan baklysets levetid forkortes og kreve utskifting. Når skjermen blir svart eller begynner å flimre, skal du kontakte din lokale EIZO-representant.
- Skjermen kan ha defekte piksler eller det kan være noen få lyspunkter på skjermen. Dette er på grunn av egenskapene til selve LCD-panelet og ikke en feil på produktet.
- Ikke press hardt mot overflaten eller den ytre rammen til LCD-panelet, da dette kan føre til feil på skjermen, som interferensmønstre, e.l. Dersom LCD-panelets overflate utsettes for kontinuerlig press, kan væskekrystallene forringes eller LCD-panelet skades. (Hvis trykkmerkene ikke forsvinner fra LCD-panelet, må du la det stå med et svart eller hvitt skjermbilde. Symptomet kan forsvinne.)
- Ikke rip i eller trykk på LCD-panelet med skarpe gjenstander, siden dette kan føre til skade på LCD-panelet. Ikke prøv å børste skjermen med tørkepapir, fordi dette kan skade skjermen.
- Ikke berør den innebygde kalibreringssensoren (integrert frontsensor), da dette kan redusere målingsnøyaktigheten eller resultere i utstyrsskade.
- Avhengig av miljøet kan verdien målt med den innebygde lyssensoren skille seg fra verdien vist på en frittstående lysmåler.
- Duggkondens kan dannes på overflaten eller innsiden av dette produktet når det tas med inn i et kaldt rom, når temperaturen plutselig stiger, eller når det flyttes fra et kaldt

rom til et varmt rom. I så fall må du ikke slå på produktet. Vent i stedet til kondensen forsvinner, ellers kan det forårsake skade på produktet.

Å bruke skjermen over lengre tid

Kvalitetskontroll

- Displaykvalitet på skjermene påvirkes av kvalitetsnivået på innsignaler og slitasje på produktet. Utfør visuelle kontroller og periodiske bestandighetstester (inkludert gråskalakontroll) for å overholde medisinske standarder/retningslinjer i henhold til ditt bruk, og utfør kalibrering som nødvendig. RadiCS-programvaren (valgfri) for overvåking av kvalitetskontroll lar deg utføre kvalitetskontroll som oppfyller medisinske standarder/retningslinjer.
- Vent i 15 minutter eller mer etter at skjermen er slått på eller etter at skjermen er aktivert igjen etter strømsparingsmodus, før du utfører ulike tester for kvalitetskontroll, kalibrering eller justerer skjermen.
- Vi anbefaler at skjermer stilles til anbefalt nivå eller lavere, og med opprettholdt lysstyrke, for å redusere endringer i lysstyrke forårsaket av langtids bruk.
- For å justere måleresultatene fra den integrerte kalibreringssensoren (integrert frontsensor) til de på en ekstern sensor, som selges separat, utfør korrelasjon mellom den integrerte frontsensoren og den eksterne sensoren med RadiCS (valgfritt tilbehør) / RadiCS LE (inkludert). Periodisk korrelasjon gjør det mulig å opprettholde målenøyaktighet til den integrerte frontsensoren på et nivå som tilsvarer den eksterne sensoren. For nærmere informasjon om korrelasjon kan du se brukerveiledningen for RadiCS / RadiCS LE.

Obs!

- Skjermens visningsstatus kan endres uventet grunnet en driftsfeil eller uventet endring av innstillinger. Det anbefales å bruke skjermen med låste betjeningsbrytere når skjermen er justert. Se installasjonshåndboken (på CD-ROM) for informasjon om konfigurasjon.

Rengjøring

- Det anbefales å utføre regelmessig rengjøring for å forlenge produktets levetid og la produktet se ut som nytt.
- Flekker på produktet kan fjernes ved å fukte en del av en myk klut med vann eller bruke ScreenCleaner og tørke forsiktig.

Obs!

- Ikke la væsker komme i direkte kontakt med produktet. Hvis det skjer, tørk av væsken umiddelbart.
- Ikke la væsker komme inn i mellomrom eller i produktet.
- Når du bruker kjemikalier til rengjøring eller desinfisering, kan kjemikalier som alkohol og desinfiseringsmiddel forårsake variasjoner i glans, matthet og falming av produktet, samt redusert bildekvalitet. Kjemikalier må ikke brukes ofte.
- Du må aldri bruke tynner, benzen, voks eller skurende rengjøringsmidler, siden disse kan skade produktet.
- Se nettsidene våre for mer informasjon om rengjøring og desinfisering. Slik sjekker du dem: Gå til www.eizoglobal.com og skriv inn «disinfect» i søkefeltet for å søke.

Desinfisering med kjemikalier

- Når du desinfiserer produkter, anbefaler vi å bruke kjemikalier som er testet av oss (se tabellen nedenfor). Merk at bruk av disse kjemikaliene ikke garanterer at produktet ikke vil bli skadet eller forringet.

Kategori	Kjemikalietype	Produkteksempel
Alkoholbasert	Etanol (etylalkohol)	Etanol
Alkoholbasert	Isopropanol	Isopropylalkohol (IPA)
Klor	Natriumhypokloritt	Purelox
Biguanid	Klorheksidinglukonat	Hibitane-løsning
Alkoholbasert	Benzalkoniumklorid	Welpas
Adehydbasert	Glutaral	Sterihyde
Adehydbasert	Glutaral	Cidex Plus28
Amfoterisk overflateaktivt stoff	Alkyldiaminoetylglysin hydroklorid	Satenidin-løsning

Slik bruker du skjermen på en behagelig måte

- En svært mørk eller lys skjerm kan påvirke øynene. Juster skjermens lysstyrke i henhold til omgivelsesbetingelsene.
- Hvis du stirrer på skjermen over lengre tid, blir øynene slitne. Ta en pause på 10 minutter hver time.
- Se på skjermen fra en passende avstand og fra riktig vinkel.

Advarsler og ansvar i forbindelse med cybersikkerhet

- Fastvareoppdateringer bør utføres via EIZO Corporation eller deres distributør.
- Oppdater fastvaren umiddelbart hvis EIZO Corporation eller distributøren ber deg om dette.

INNHold

FORHOLDSREGLER	3
Viktig	3
Plassering av forsiktighetserklæring	3
Symboler på enheten.....	3
ADVARSEL	5
FORSIKTIG	8
Merknader for denne skjermen	10
Indikasjoner for bruk.....	10
Forholdsregler for bruk.....	10
Å bruke skjermen over lengre tid	11
Kvalitetskontroll	11
Rengjøring	11
Desinfisering med kjemikalier	11
Slik bruker du skjermen på en behagelig måte	12
Advarsler og ansvar i forbindelse med cybersikkerhet.....	12
1 Innledning	15
1.1 Funksjoner	15
1.1.1 Layout-frihet	15
1.1.2 Enkel installering.....	15
1.1.3 Støtter visning av video og strømforsyning med én USB Type-C-kabelkontakt.....	15
1.1.4 Hybrid monokrom og fargeskjerm.....	16
1.1.5 Kvalitetskontroll	16
1.1.6 Dokkingstasjon-funksjon	16
1.1.7 Utstyrt med en lysfunksjon (RadiLight)	16
1.1.8 Plassbesparende design.....	17
1.1.9 Skjermbruk fra mus og tastatur.....	17
1.2 Pakkens innhold.....	18
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk.....	18
1.2.2 RadiCS LE	18
1.2.3 Bruke RadiCS LE.....	19
1.3 Kontroller og funksjoner	20
1.3.1 Front.....	20
1.3.2 Bakside	21
2 Installasjon/tilkobling.....	23
2.1 Før installasjon.....	23
2.1.1 Installasjonsforhold	23
2.2 Koble til kabler.....	24

2.3	Fest RadiLight Focus (arbeidslys).....	29
2.4	Slå på strømmen.....	29
2.5	Justere skjermens høyde og vinkel.....	30
2.6	Feste kontakthetten.....	31
2.7	Bruke RadiLight Area / RadiLight Focus.....	32
3	Ikke noe bilde.....	33
4	Spesifikasjoner.....	35
4.1	Liste over spesifikasjoner.....	35
4.1.1	Type.....	35
4.1.2	LCD-panel.....	35
4.1.3	Videosignaler.....	35
4.1.4	USB.....	35
4.1.5	Nettverk.....	36
4.1.6	Strøm.....	36
4.1.7	Fysiske spesifikasjoner.....	36
4.1.8	Krav til driftsmiljø.....	36
4.1.9	Forhold for transport/oppbevaring.....	36
4.2	Støttede oppløsninger.....	37
4.3	Tilbehør.....	37
	Vedlegg.....	38
	Medisinsk standard.....	38
	Utstyrsklassifisering.....	38
	EMC-informasjon.....	39
	Tiltenkte bruksmiljøer.....	39
	Tekniske beskrivelser.....	40


1 Innledning

Takk for at du valgte en EIZO LCD-fargeskjerm.

1.1 Funksjoner

1.1.1 Layout-frihet

- Dette produktet er utstyrt med funksjonene PbyP (Picture by Picture, bilde etter bilde) og PinP (Picture in Picture, bilde i bilde) som kan vise opptil tre signaler samtidig.

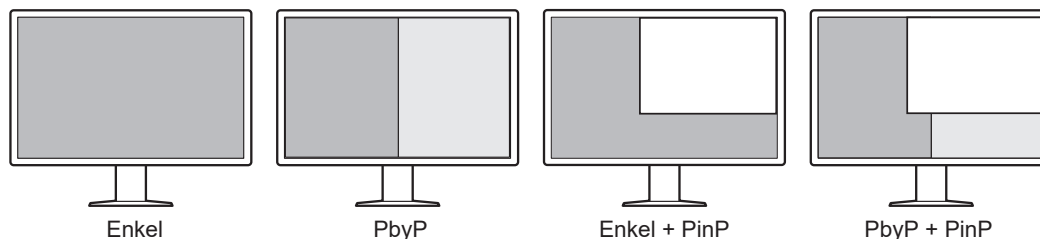


- Skjermen har One Cable PbyP-funksjonen, som viser bilder i PbyP-modus med én signalkabel.

1.1.2 Enkel installering

Skjermen har en USB Type-C®-utgangsterminal (USB-C®).


Et signal sendes til en annen skjerm fra utgangsterminalen.

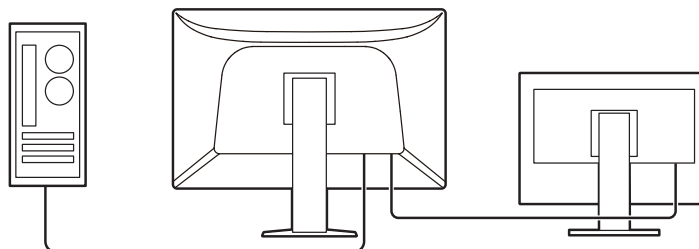

1.1.3 Støtter visning av video og strømforsyning med én USB Type-C-kabelkontakt

Dette produktet har en USB-C-kontakt og støtter overføring av videosignaler (DisplayPort™ Alt Mode) samt strømforsyning (USB-strømforsyning).

Det støtter en effekt på maksimalt 94 W til en tilkoblet bærbar PC når den brukes som en ekstern skjerm.

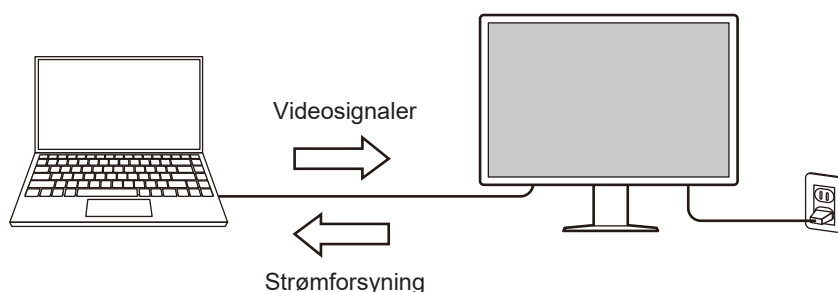

Merk

- For å vise videosignalene må den tilkoblede enheten støtte overføring av videosignaler (DisplayPort Alt Mode).
- For å bruke ladefunksjonen må den tilkoblede enheten støtte enhetslading ved å bruke USB-strømforsyningen.
- Kun når følgende USB-kabler brukes, kan en effekt på maksimalt 94 W forsynes:
 - CC150SS81G-5A (inkludert)
- Tilkoblede enheter kan lades selv når skjermen er i strømsparingsmodus.

1.1.4 Hybrid monokrom og fargeskjerm


Når Hybrid Gamma PXL-funksjonen er aktivert, skiller dette produktet automatisk mellom monokrome deler og fargedeler på samme bilde på pikselnivå, og viser de henholdsvis i optimale graderinger.

1.1.5 Kvalitetskontroll

- Denne skjermen har en innebygget kalibreringssensor (integrert frontsensor). Denne sensoren lar skjermen utføre kalibrering (SelfCalibration) og gråskalakontroll uavhengig.
- Du kan utføre skjermkalibrering og administrere historikken med den medfølgende RadiCS LE.
- RadiCS-programvare for kvalitetskontroll av skjerm lar deg utføre kvalitetskontroll på høyt nivå som møter medisinske standarder/retningslinjer.

1.1.6 Dokkingstasjon-funksjon

Denne skjermen har en LAN-port og USB-hub som gjør at den kan brukes som en dokkingstasjon. Når du kobler til en USB-C-kabel, kan du skape et stabilt nettverk selv på bærbare PC-er eller nettbrett, som ikke er utstyrt med LAN-porter. Du kan også bruke USB-kompatible eksterne enheter og lade smarttelefoner (se «Bruke dokkingstasjon-funksjonen» i installasjonshåndboken).

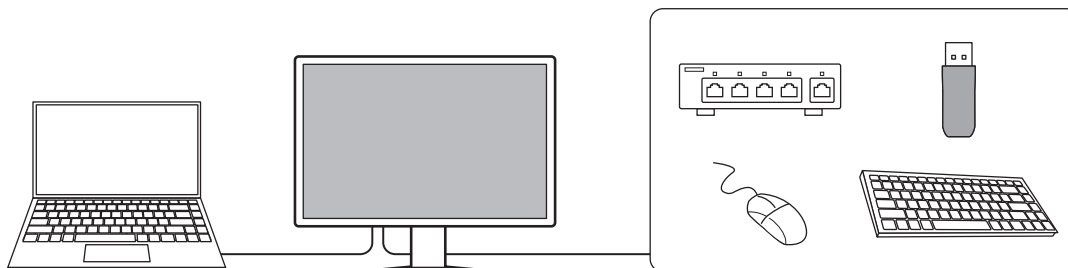
**1.1.7 Utstyrt med en lysfunksjon (RadiLight)**

RadiLight Area (baklys)

- RadiLight Area er en baklysfunksjon som er bygget inn i skjermen. Det gir indirekte belysning av et rom fra baksiden av skjermen, noe som muliggjør radiologiske tolkninger i dårlig belysning.


RadiLight Focus (arbeidslys)

- RadiLight Focus er et avtagbart arbeidslys. Det gir deg belysning på arbeidsområdet når du leser, skriver dokumenter eller bruker et tastatur.

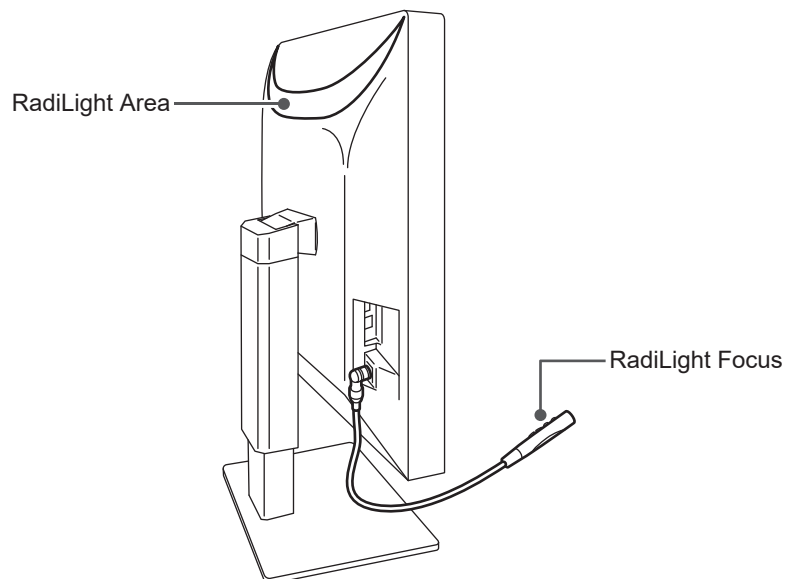

1.1.8 Plassbesparende design

Skjermen har flere USB-kontakter (oppstrøms). Du kan bruke flere datamaskiner med ett sett USB-enheter (mus, tastatur osv.).

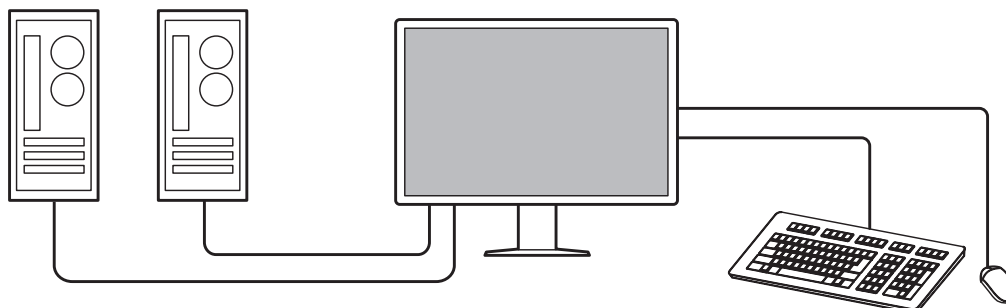

1.1.9 Skjermbruk fra mus og tastatur

Ved hjelp av RadiCS / RadiCS LE-programvare for kvalitetskontroll av skjerm kan du utføre følgende skjermoperasjoner med mus og tastatur:

- Bytte av CAL Switch-moduser
- Bytting av innsignaler
- Funksjoner som tildeler enhver CAL Switch-modus til en del av skjermen og viser et bilde (Point-and-Focus)
- Vise eller skjule PinP-undervindu (Hide-and-Seek)
- Bytte mellom datamaskiner som bruker USB-enheter (Switch-and-Go)
- Gå inn i strømsparingsmodus (Backlight Saver)
- En funksjon som midlertidig øker lysstyrken for å forbedre synligheten av diagnostiske bilder (Instant Backlight Booster)

Merk

- RadiCS / RadiCS LE-programvaren lar deg vise eller skjule PinP-delvinduet og bytte datamaskinen som brukes til å betjene USB-enheter samtidig. Se brukerhåndboken for RadiCS / RadiCS LE for mer informasjon om konfigurasjonsprosedyren.

1.2 Pakkens innhold

Kontroller at alle de følgende artiklene er inkludert i esken. Hvis noen av disse mangler eller er skadet, må du kontakte din forhandler eller lokale EIZO-representant.

Merk
• Ta vare på esken og emballasjematerialet i tilfelle skjermen må flyttes eller transporteres senere.

- Skjerm
- Strømkabel



- Digital signalkabel (DisplayPort–DisplayPort): PP300-V14 x 2



- Digital signalkabel (HDMI – HDMI): HH300PR x 1



- USB 2.0-kabel (USB-A – USB-B): UU300 X 2



- USB-C-kabel (USB-C til USB-C): CC150SS81G-5A x 1



- Kontaktdeksel (venstre)
- Kontaktdeksel (høyre)
- RadiLight Focus (arbeidslys)
- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Bruksanvisning

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM-en inneholder det følgende. Se «Readme.txt» på disken for oppstartsprosedyrer for programvare eller filreferanseprosedyrer.

- Filen Readme.txt
- RadiCS LE programvare for kvalitetskontroll av skjerm (for Windows)
- Brukerhåndbok
 - Denne skjermens bruksanvisning
 - Installasjonshåndbok for skjerm
 - Brukerhåndbok for RadiCS LE
- Ytre dimensjoner

1.2.2 RadiCS LE

RadiCS LE lar deg utføre følgende kvalitetskontroll- og skjermoperasjoner. Se brukerhåndboken for RadiCS LE for mer informasjon om programvare- eller konfigurasjonsprosedyren.

Kvalitetskontroll

- Utføre kalibrering
- Vise testresultater i en liste og opprette en testrapport

- Sette mål og utføringsplan for SelfCalibration

Skjermoperasjoner

- Bytte av CAL Switch-moduser
- Bytting av innsignaler
- Funksjoner som tildeler enhver CAL Switch-modus til en del av skjermen og viser et bilde (Point-and-Focus)
- Vise eller skjule PinP-undervindu (Hide-and-Seek)
- Bytte mellom datamaskiner som bruker USB-enheter (Switch-and-Go)
- Gå inn i strømsparingsmodus (Backlight Saver)
- En funksjon som midlertidig øker lysstyrken for å forbedre synligheten av diagnostiske bilder (Instant Backlight Booster)
- En funksjon som automatisk tilpasser skjermens lysstyrke i forhold til lyset i omgivelsene når innstillingen er tekstmodus (Auto Brightness Control)

Obs!

- Spesifikasjonene for RadiCS LE kan endres uten varsel. Den nyeste versjonen av RadiCS LE er tilgjengelig for nedlasting fra nettsiden vår: (www.eizoglobal.com)


1.2.3 Bruke RadiCS LE

Se brukerhåndboken for RadiCS LE (på CD-ROM) for informasjon om installering og bruk av RadiCS LE.

Når RadiCS LE brukes, kobler du skjermen til datamaskinen din med den medfølgende USB-kabelen. Se [2.2 Koble til kabler](#) ► 24 for mer informasjon om hvordan du kobler til skjermen.


1.3 Kontroller og funksjoner

1.3.1 Front

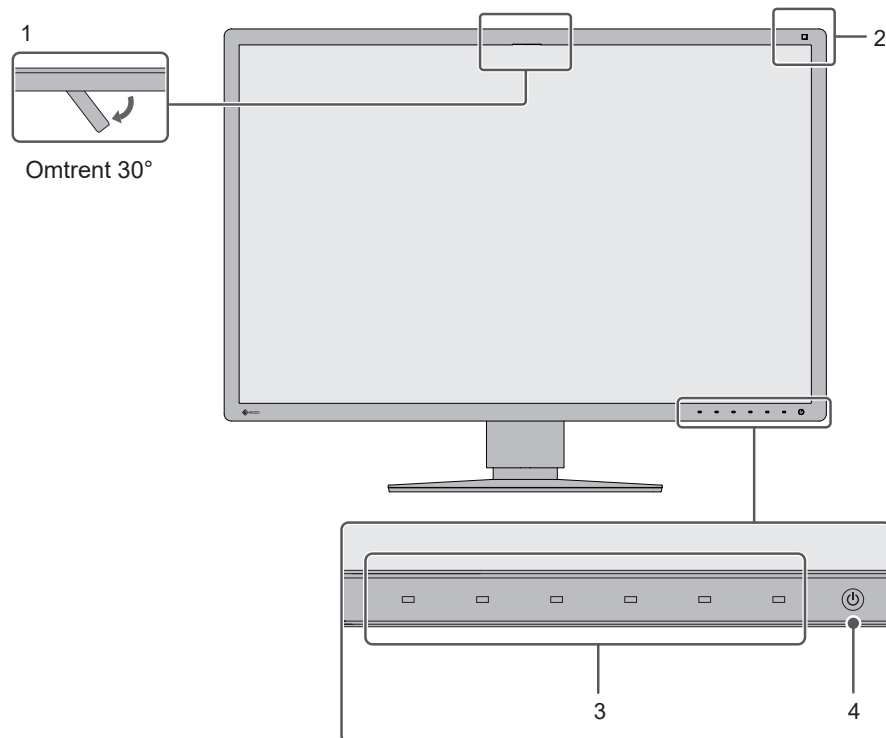

1. Integrert frontsensor (bevegelig)	Denne sensoren brukes til å utføre kalibrering og gråskalakontroll.
2. Lyssensor	Denne sensoren måler belysning i omgivelsene. Måling av lys fra omgivelsene utføres med RadiCS / RadiCS LE-programvaren for kvalitetskontroll.
3. Betjeningsbrytere	Viser funksjonsveiledningen. Still inn menyer i henhold til funksjonsveiledningen.
4. Strømbryter	Slår strømmen på eller av. Bryterindikatoren tennes når du slår strømmen på. Indikatorfargen er forskjellig avhengig av skjermens driftsstatus. Grønn: Normal driftsmodus, oransje: Strømsparingsmodus, Av: Hovedstrømtilførselen er av, eller enhet er avslått

1.3.2 Bakside

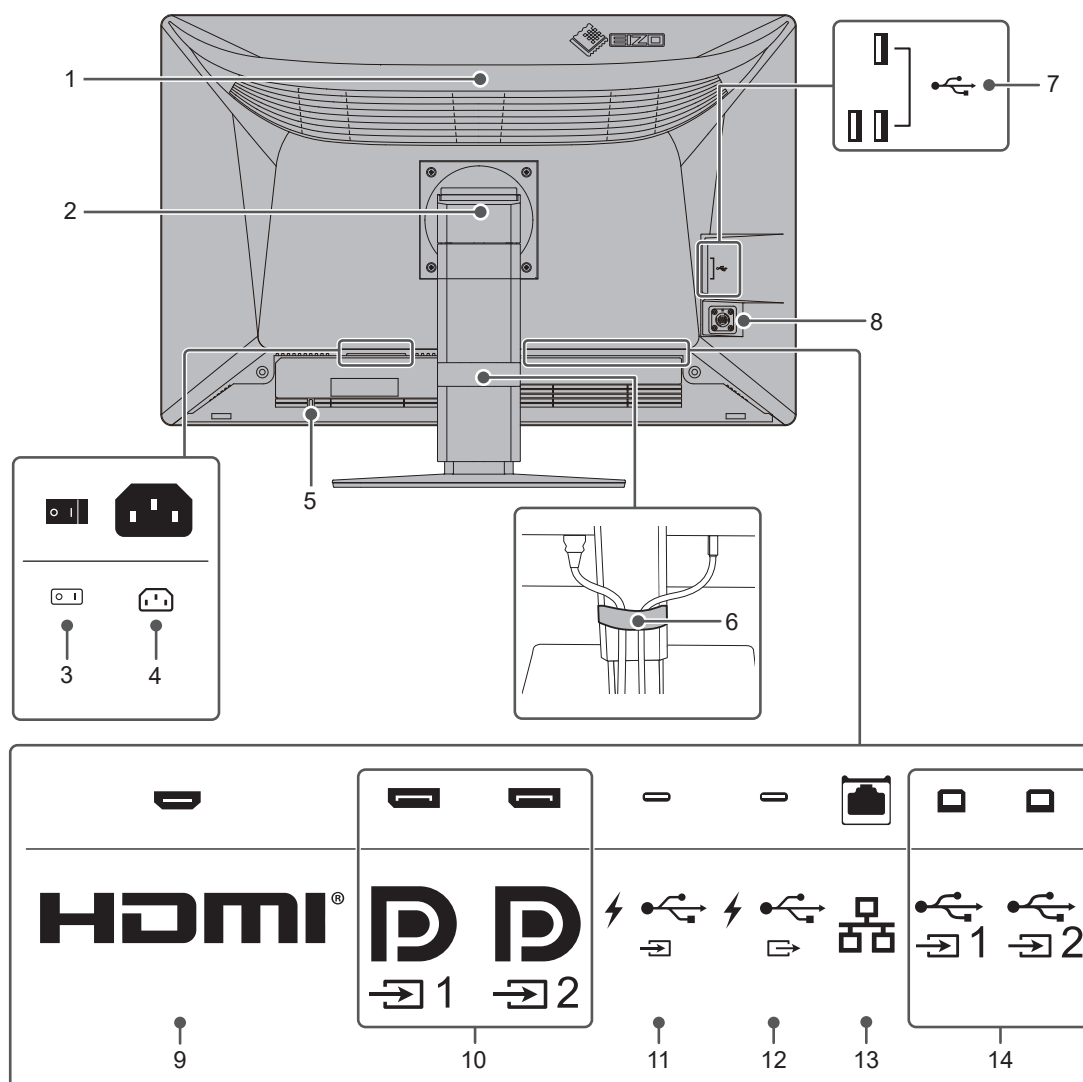

1. RadiLight Area (baklys)	Baklysfunksjon som er bygget inn i skjermen. Den gir indirekte belysning til et rom fra baksiden av en skjerm.
2. Fot	Justerer høyden og vinkelen (vipping og dreining) på skjermen.
3. Hovedstrømbryter	Slår hovedstrømmen på eller av. ○ : Av, : På
4. Strømkontakt	Kobler til strømkabelen.
5. Sikkerhetslåsåpning	Kompatibel med Kensingtons MicroSaver-sikkerhetssystem.
6. Kabelholder	Lar kabler være ryddig plassert.
7. USB-A-kontakt (nedstrøms)	Kobler til en ekstern USB-enhet (se «Bruke dokkingstasjon-funksjonen» i installasjonshåndboken).
8. Kontakt for arbeidslys	Kobles til RadiLight Focus.
9. HDMI-kontakt	Kobler til en datamaskin med HDMI-utgang.
10. DisplayPort-kontakt	Kobler til en datamaskin med DisplayPort-utgang.
11. USB-C-kontakt (oppstrøms)	Kobler til en datamaskin med USB-C-utgang. Dette overfører også USB-signalet som er nødvendig for å bruke programvare som krever en USB-kontakt eller dokkingstasjon-funksjonen (se «Bruke dokkingstasjon-funksjonen» i installasjonshåndboken).

12. USB-C-kontakt (nedstrøms)	Kabelen kobles til USB-C-kontakten (oppstrøms) på en annen skjerm for å konfigurere en kjedetilkobling. I tillegg kan du koble til en ekstern USB-enhet (se «Bruke dokkingstasjon-funksjonen» i installasjonshåndboken).
13. LAN-port	Kobler til en nettverkshub eller ruter med en LAN-kabel for å bruke nettverksforbindelsen til dokkingstasjon-funksjonen (se «Bruke dokkingstasjon-funksjonen» i installasjonshåndboken).
14. USB-B-kontakt (oppstrøms)	Kobler til en datamaskin når du bruker programvare som trenger en USB-kontakt på en datamaskin uten en USB-C-kontakt eller ved bruk av USB-hub-funksjonen til dette produktet.

2 Installasjon/tilkobling

2.1 Før installasjon

Les [FORHOLDSREGLER \[► 3\]](#) nøye og følg instruksjonene til enhver tid.

Hvis du plasserer dette produktet på lakk-dekket pult, kan fargen feste seg til bunnen av foten på grunn av gummiens sammensetning. Kontroller overflaten før bruk.

2.1.1 Installasjonsforhold

Når du monterer skjermen i et rack, må du forsikre deg om at det er nok rom rundt sidene, baksiden og toppen av skjermen.

Obs!
• Plasser skjermen slik at ikke det er lys som forstyrrer skjermen.

2.2 Koble til kabler


Obs!

- Kontroller at skjermen, datamaskinen og eksternt utstyr er slått av før du kobler til.
- Når den nåværende skjermen byttes ut med denne skjermen, må du se [4.2 Støttede oppløsninger](#) [► 37] for å endre datamaskinens innstillinger for oppløsning og vertikal skannefrekvens til de som er tilgjengelige for denne skjermen, før datamaskinen kobles til.
- Tilpass vinkelen på skjermen hvis kablene er vanskelige å sette inn.

1. Koble til signalkabler.

Kontroller formen på kontaktene, og koble til kablene.

I enkel-skjermvisning

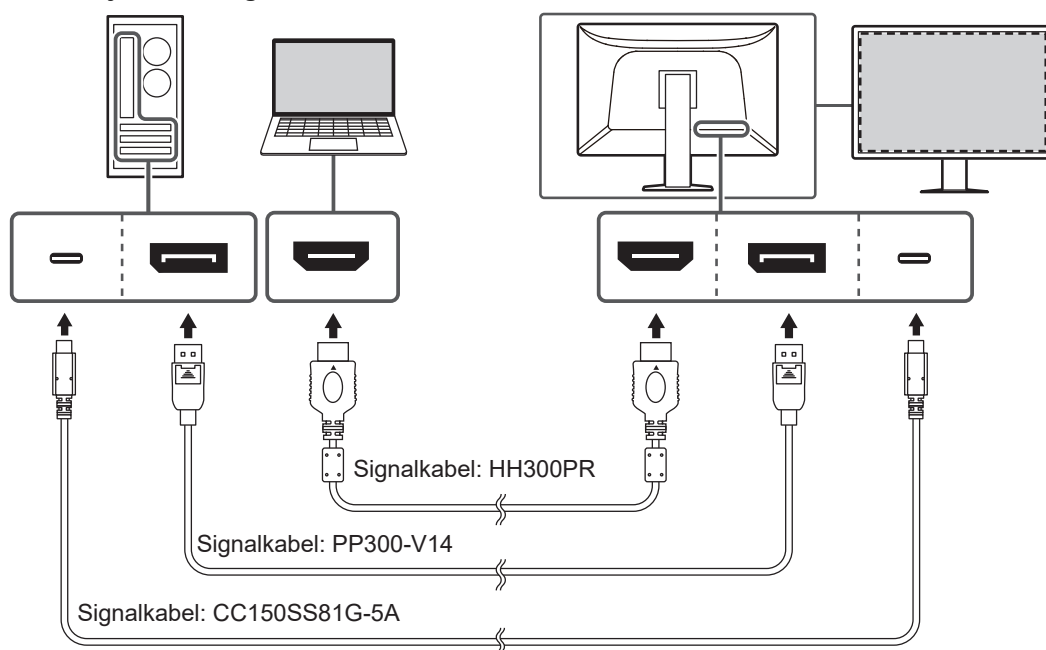


Obs!

- I standardinnstillingen vises signalet til DisplayPort 1-kontakten. Hvis du vil vise signalet fra en annen kontakt, bytter du innsignalet (se «Bytting av innsignaler» i installasjonshåndboken).
- Hvis du bruker en USB-C for både videoskjerm og kvalitetskontroll av skjerm med RadiCS / RadiCS LE og tilkobling av USB-enheter (USB-kompatibelt eksternt utstyr), må du angi «USB Selection» til «USB-C» i innstillingsmenyen. Se installasjonshåndboken (på CD-ROM-en) for å få informasjon.
- Det kan hende HDMI®-signaler vises i et begrenset område.




I PbyP-visning (DisplayPort 1 / DisplayPort 2)

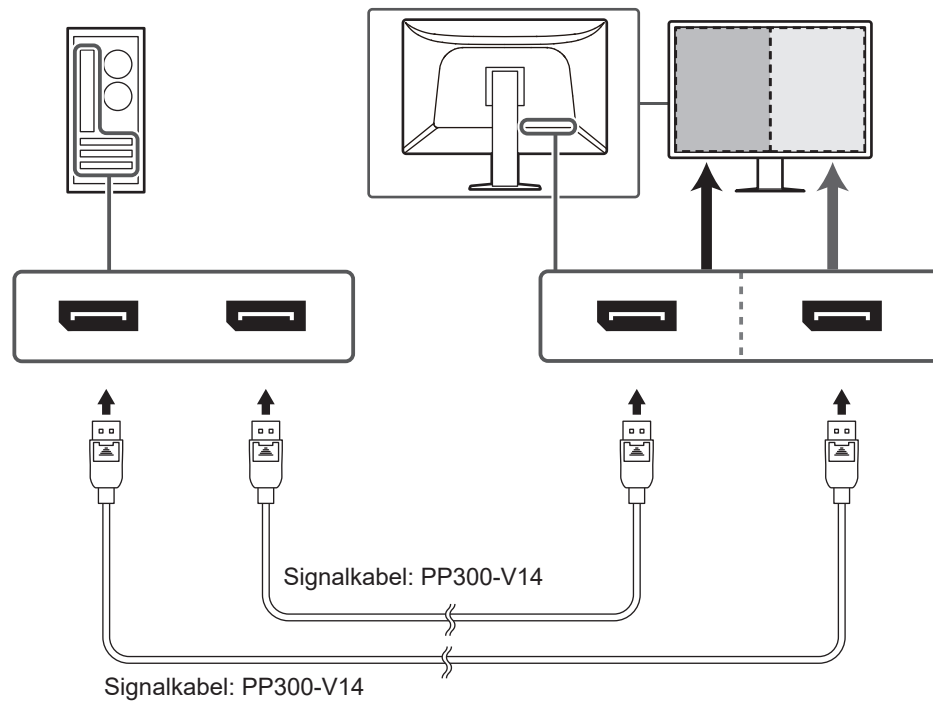

Obs!

- For å utføre en PbyP-visning (DisplayPort 1 / DisplayPort 2) må du angi «PbyP Settings» i innstillingsmenyen. Se installasjonshåndboken (på CD-ROM-en) for å få informasjon.
- Når du viser PbyP fra to datamaskiner, kan det hende at noen aspekter av kvalitetskontroll, som for eksempel kalibrering, kan være begrenset.

I PbyP-visning (One Cable PbyP)

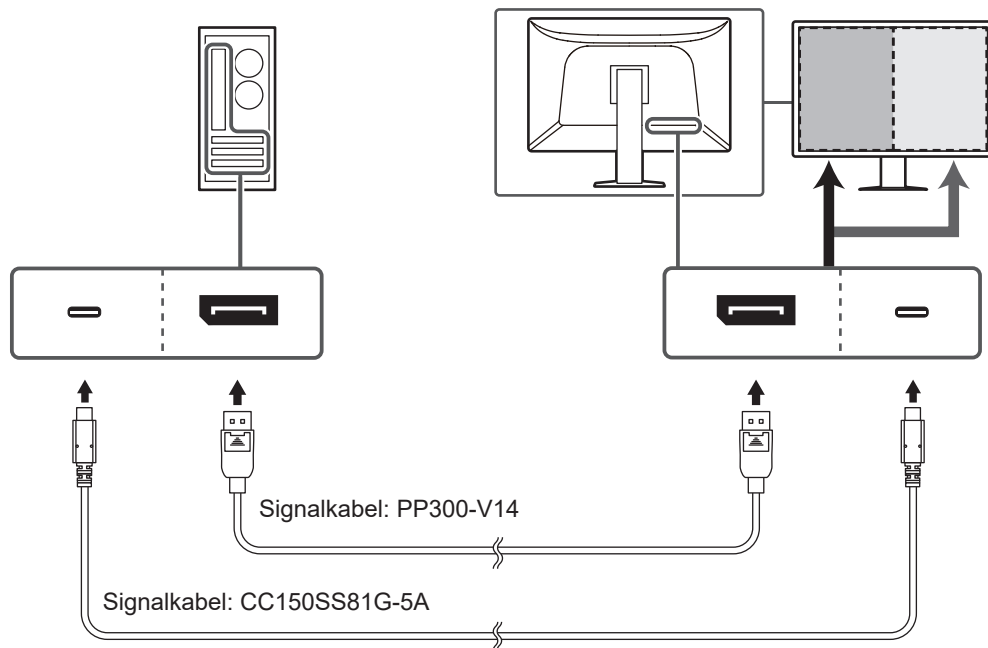


Obs!

- For å utføre en PbyP-visning (One Cable PbyP) kobler du til DisplayPort 1-kontakten eller USB-C-kontakten (oppstrøms: ). I tillegg til dette må du angi «PbyP Settings»-innstillingen i innstillingsmenyen. Se installasjonshåndboken (på CD-ROM-en) for å få informasjon.
- Hvis du bruker en USB-C for både videoskjerm og kvalitetskontroll av skjerm med RadiCS / RadiCS LE og tilkobling av USB-enheter (USB-kompatibelt eksternt utstyr), må du angi «USB Selection» til «USB-C» i innstillingsmenyen. Se installasjonshåndboken (på CD-ROM-en) for å få informasjon.

I PinP-visning (undervindu)

Eksempel: Bruke en HDMI-kontakt

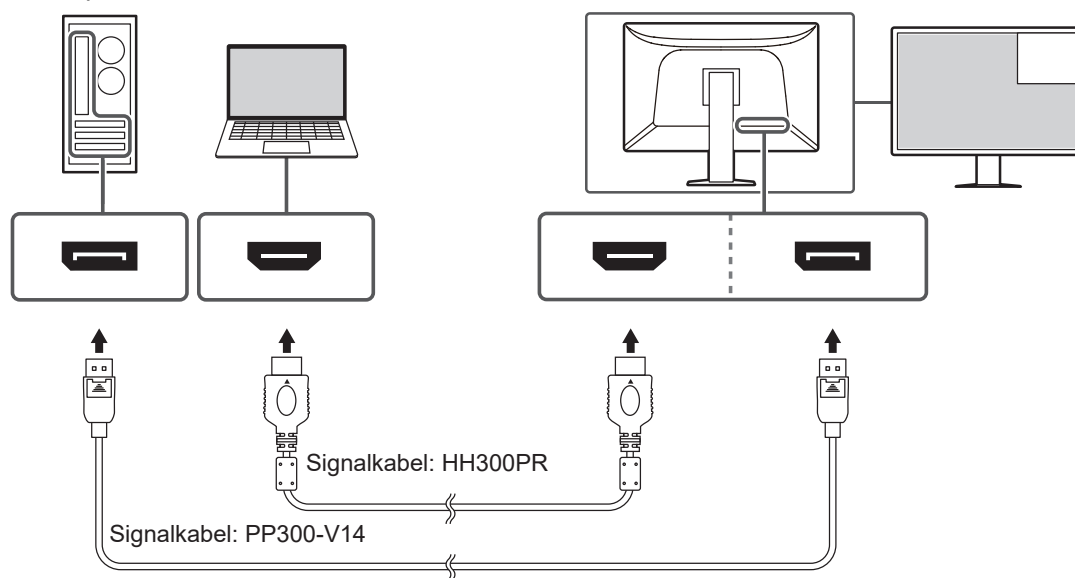


Obs!

- For å utføre en PinP-visning (undervindu) må du angi «PinP Settings»-innstillingen i innstillingsmenyen. Se installasjonshåndboken (på CD-ROM-en) for å få informasjon.
- Når et HDMI-signal vises i enkel-skjermvisning, kan ikke PinP-funksjonen (undervindu) vises.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Når du kobler til andre monitører med en kjedetilkobling


Signalinngangen til DisplayPort 1-kontakten eller USB-C-kontakten (oppstrøms: ) vil være utgangen til en annen skjerm.

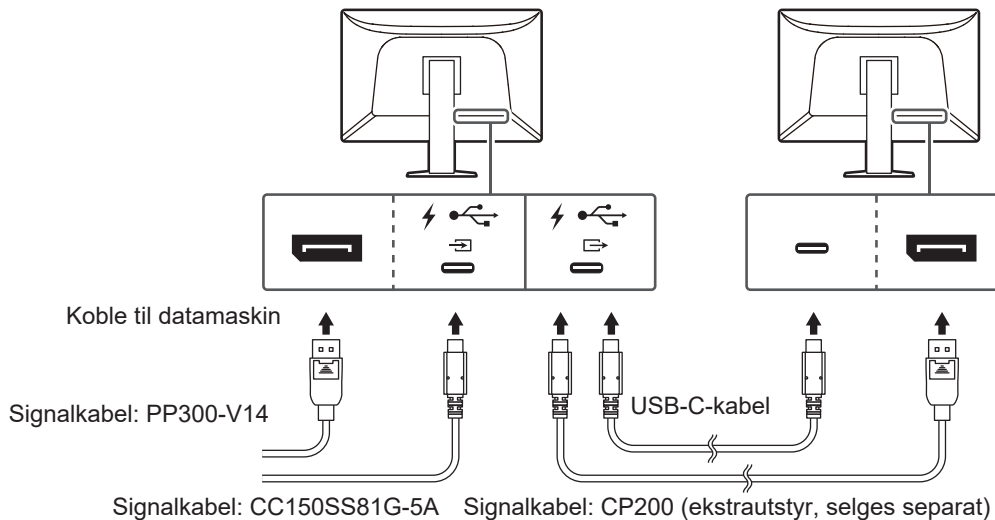

Obs!

- Gå til EIZO-nettsiden for å få informasjon om skjermer og grafikkort som kan brukes til daisy-chain-tilkoblingen: (www.eizoglobal.com)
- For å konfigurere en kjedetilkobling kobler du til DisplayPort 1-kontakten eller USB-C-kontakten (oppstrøms: ). I tillegg til dette må du angi «Daisy Chain»-innstillingen i innstillingsmenyen for administrering. Se installasjonshåndboken (på CD-ROM-en) for å få informasjon.
- En hette er festet til USB-C-kontakten (nedstrøms: ) som standard. Fjern hetten når du skal bruke kontakten.

2. Plugg strømkabelen inn i strømutfgangen og strømkontakten på skjermen. Sett strømkabelen ordentlig inn i skjermen.
3. Hvis du ikke bruker en USB-C-kontakt og bruker RadiCS / RadiCS LE eller kobler til USB-enheter (USB-kompatible eksterne enheter) til skjermen, må du koble til en USB 2.0-kabel fra USB-B-kontakten til skjermen til USB-A-kontakten til datamaskinen.

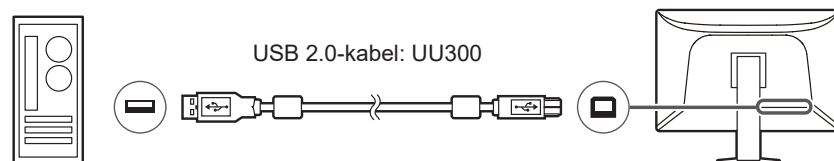


Obs!

- Når skjermen kobles til en datamaskin hvor RadiCS / RadiCS LE har blitt installert, kobler du til USB-B 1 () eller USB-C (oppstrøms: ).
- Fjern hetten på forhånd når du bruker USB-B-2 (). I tillegg endrer du «USB Selection»-innstillingen i innstillingsmenyen (se «USB-valg» i installasjonshåndboken).

2.3 Fest RadiLight Focus (arbeidslys)

Fest RadiLight Focus (arbeidslys) til kontakten for arbeidslys på skjermen.

Den kan kun festes i en nedovervent retning i samme vinkel som kontakten.

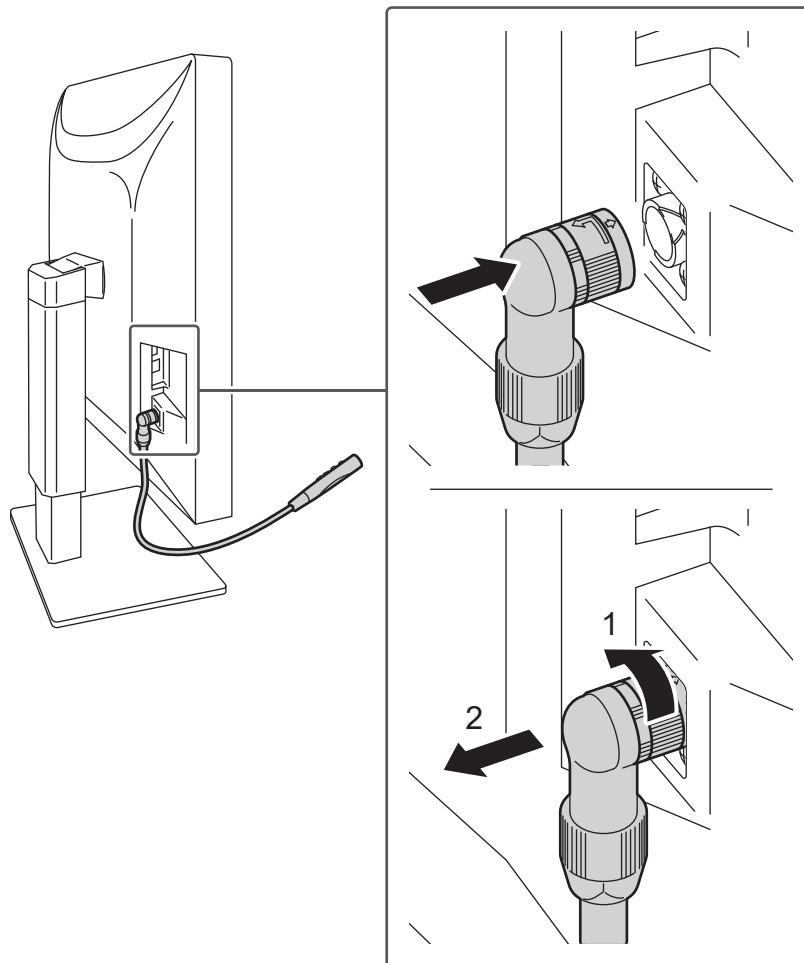

For å fjerne den må du trekke den ut mens du snur kontaktdelen med skjermen i retningen som er vist med 1 i illustrasjonen.

2.4 Slå på strømmen

1. Berør  for å slå på skjermen.
Strømindikatoren på skjermen lyser grønt.
Se [3 Ikke noe bilde](#)  [33](#) hvis indikatoren ikke lyser.

Merk

- Når du berører en hvilken som helst betjeningsbryter med unntak av  og skjermen er avslått, begynner  å blinke for å vise deg plasseringen til strømbryteren.

2. Slå på datamaskinen.
Skjermbildet vises.
Se [3 Ikke noe bilde](#)  [33](#) for ytterligere råd hvis et bilde ikke vises.

Obs!


- Når du kobler til for første gang eller endrer tilkoblingsmetoden, vil kanskje ikke visningsinnstillingene som oppløsning og skala være passende. Sjekk om innstillingene for datamaskinen er korrekt konfigurert.
- Vi anbefaler at du slår av strømknappen for å spare strøm. Når du ikke bruker skjermen, kan du slå av hovedstrømforsyningen eller koble fra strømtøpselet slik at strømmen blir helt brutt.

Merk

- Utfør følgende for å maksimere skjermens levetid ved å senke lysstyrkeforringelse og redusere strømforbruk:
 - Bruk strømsparingsfunksjonen på datamaskinen eller skjermen.
 - Slå skjermen av etter bruk.

2.5 Justere skjermens høyde og vinkel

Hold toppen og bunnen eller venstre og høyre kant av skjermen med begge hender, og juster skjermens høyde/vinkel og drei skjermen til optimal posisjon for å utføre oppgaver.

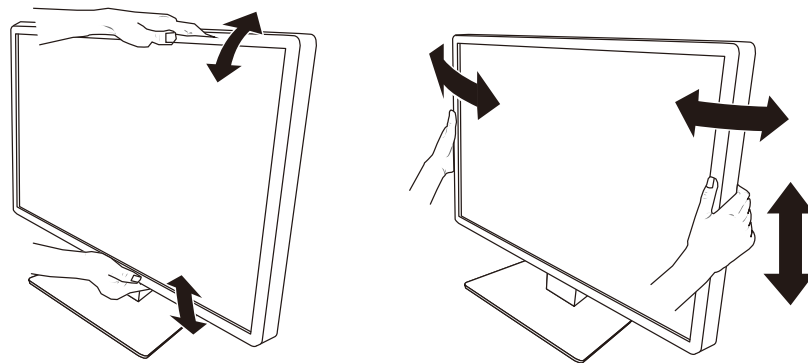


Obs!


- Etter avsluttet justering må du sørge for at kablene er korrekt tilkoblet.
- Når du har justert høyde og vinkel, fører du kablene gjennom kabelholderen.
- Når du justerer vinkelen eller posisjonen til skjermen mens arbeidslýset er festet på, må du passe på å ikke bruke for mye kraft på arbeidslýset. Hvis du gjør dette kan kontakten eller armen bli skadet.

2.6 Feste kontakthetten

1. Organiser kablene i kabelholderen.

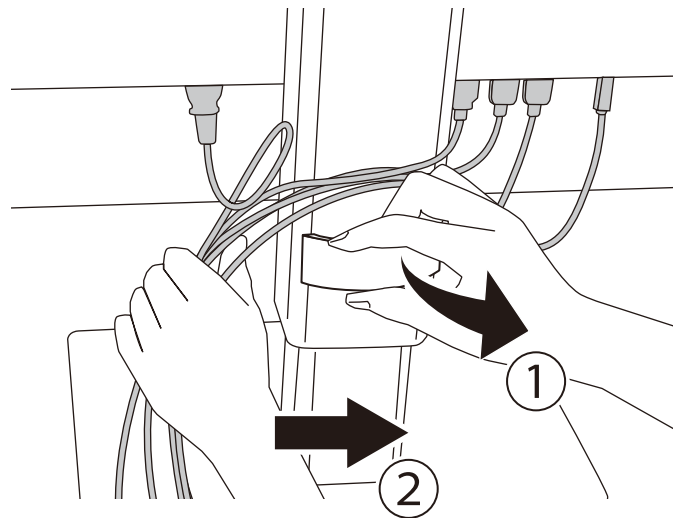

2. Fest kontakthetten.

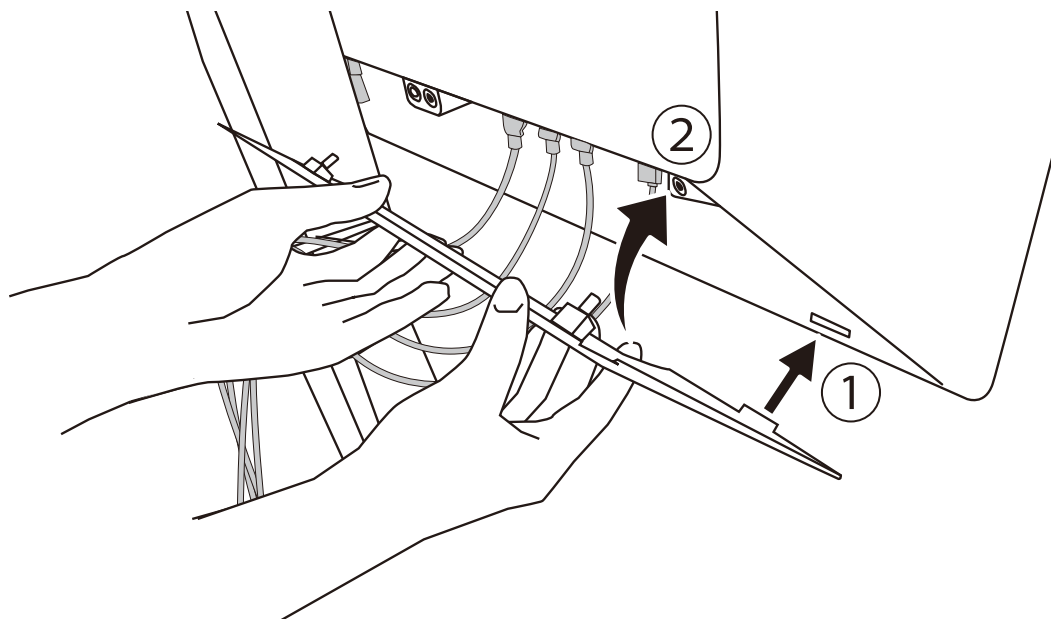

Eksempel: Feste kontakthetten (høyre)

Obs!


- Påse at den er sikkert plassert for å sikre tilstrekkelig ventilasjon inne i skjermen.

Merk

- For å fjerne kontakthetten, må du trekke den mot deg.

2.7 Bruke RadiLight Area / RadiLight Focus

1. Påse at skjermen og datamaskinen er skrudd på.
2. Bruk driftsbryteren for å skru RadiLight Area eller RadiLight Focus på/av.
Juster lysstyrken til RadiLight Area.

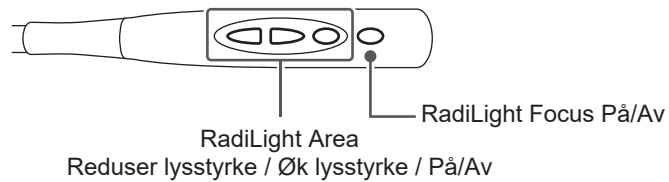

Obs!

- På grunn av variasjoner til LED-pærer, kan det være forskjeller i farge og lysstyrke, selv for samme produkt.
- I følgende miljøer vil du kanskje ikke vil oppnå tilstrekkelig belysning når du bruker RadiLight Area:
 - hvis avstanden til veggen eller taket er for lang
 - hvis veggen eller taket er laget av materialer som ikke reflekterer lys godt eller har mørke farger
- Når du vil endre retningen til RadiLight Focus, må du endre vinkelen ved å holde både enden og armen.

Merk

- Se installasjonshåndboken (på CD-ROM) for informasjon om konfigurasjon av RadiLight Area.

3 Ikke noe bilde

Strømindikatoren lyser ikke

- Kontroller om strømkabelen er korrekt tilkoblet.
- Slå på hovedstrømbryteren på baksiden av skjermen.
- Trykk på .
- Slå av hovedstrømbryteren bak på skjermen og slå den deretter på igjen et par minutter senere.

Strømindikatoren lyser: Grønn

- Øk «Brightness», «Contrast» eller «Gain» i innstillingsmenyen. Se installasjonshåndboken (på CD-ROM-en) for å få informasjon.
- Slå av hovedstrømbryteren bak på skjermen og slå den deretter på igjen et par minutter senere.

Strømindikatoren lyser: Oransje


- Bytt innsignalet. Se installasjonshåndboken (på CD-ROM-en) for å få informasjon.
- Beveg på musen eller trykk på en hvilken som helst tast på tastaturet.
- Sjekk om datamaskinen er slått på.
- Sjekk om signalkabelen er riktig tilkoblet. Koble signalkablene til kontaktene for det tilsvarende innsignalet.
- Slå av hovedstrømbryteren bak på skjermen og slå den deretter på igjen.

Strømindikatoren blinker: Oransje, grønn

- Koble til med signalkabelen som er spesifisert av EIZO. Deretter slår du av hovedstrømbryteren bak på skjermen og slår den deretter på igjen et par minutter senere.

Meldingen «No Signal» vises på skjermen.


Eksempel:

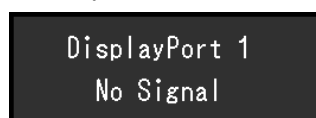

- Meldingen som vises over, kan vises fordi noen datamaskiner ikke sender ut et signal umiddelbart etter å ha blitt slått på.
- Sjekk om datamaskinen er slått på.
- Sjekk om signalkabelen er riktig tilkoblet. Koble signalkablene til kontaktene for det tilsvarende innsignalet.
- USB-C (nedstrøms: ) brukes for utgangen til kjedetilkoblingen. Skjermen vises ikke, selv når den er koblet til en datamaskin.
- Bytt innsignalet. Se installasjonshåndboken (på CD-ROM-en) for å få informasjon.
- Slå av hovedstrømbryteren bak på skjermen og slå den deretter på igjen.


Meldingen «Signal Error» vises på skjermen.

Eksempel:

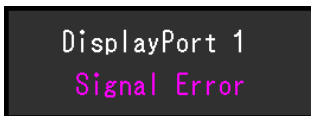

- Kontroller om datamaskinen er konfigurert til å oppfylle skjermens krav til oppløsning og vertikal skannefrekvens (se [4.2 Støttede oppløsninger](#) [► 37]).
- Start datamaskinen på nytt.
- Velg en passende innstilling ved hjelp av grafikkortets hjelpeprogram. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for grafikkortet.

Meldingen «DP Unsupported» vises på skjermen

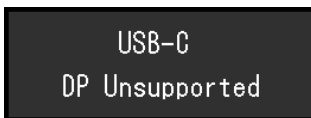

- Sjekk om den tilkoblede kabelen er en signalkabel som anbefales av EIZO.
- Sjekk om USB-C-kabelen til den tilkoblede enheten støtter videosignalutgang (DisplayPort Alt Mode). Kontakt enhetens produsent for mer informasjon.
- Koble til en DisplayPort- eller HDMI-kabel.

4 Spesifikasjoner

4.1 Liste over spesifikasjoner

4.1.1 Type

RX670	Antigjenskin
RX670-AR	Antirefleks

4.1.2 LCD-panel

Type	Farge (IPS)
Bakgrunnslys	LED
Størrelse	76,2 cm (30,0 tommer)
Oppløsning	3280 punkter x 2048 linjer
Visningsstørrelse (H x V)	645,5 mm x 403,0 mm
Pikselavstand (H x V)	0,197 mm x 0,197 mm
Skjermens farger	10-biters farger (DisplayPort/USB-C): Opptil 1,07 milliarder farger (fra en palett med ca. 543 milliarder farger) 8-bit (DisplayPort/HDMI): 16,77 millioner farger (fra en palett med ca. 543 milliarder farger)
Visningsvinkel (H / V, typisk)	178° / 178°
Anbefalt lysstyrke	500 cd/m ²
Kontrastforhold (vanlig)	1800:1
Responstid (vanlig)	25 ms (svart -> hvit -> svart)

4.1.3 Videosignaler

Inngangsterminaler	DisplayPort x 2, USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1, HDMI x 1
Utgangsterminaler	USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1
Horisontal skannefrekvens	31–127 kHz
Vertikal skannefrekvens ^{*1}	59–61 Hz (720 x 400: 69–71 Hz)
Bildesynkroniseringsmodus	59–61 Hz
Dot-klokke	25–440 MHz

^{*1} Den støttede vertikale skannefrekvensen varierer i henhold til oppløsningen. Se [4.2 Støttede oppløsninger](#) [► 37] for mer informasjon.

4.1.4 USB

Port	Oppstrøms	USB-C x 1, USB-B x 2
	Nedstrøms	USB-A x 3, USB-C x 1
Standard		USB Specification Revision 2.0
Kommunikasjonshastighet		480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps
Strømforsyning	Oppstrøms	USB-C: Maksimum 94 W (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4,7 A)
	Nedstrøms	USB-A: Maksimum 500 mA per port USB-C: Maksimum 15 W (5 V / 3 A)

4.1.5 Nettverk

Port	RJ-45 (USB LAN-adapter)
Støttede operativsystemer ^{*1}	Windows 11 Windows 10 (32-biter/64-biter) macOS Sierra (10.12) eller nyere
Kablet LAN	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)

^{*1} EIZO-støtten avsluttes når støtten fra leverandøren av operativsystemet avsluttes.

4.1.6 Strøm

Inngang	100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 2,80–1,20 A
Maksimalt strømforbruk	279 W eller mindre ^{*1}
Strømsparingsmodus	0,5 W eller mindre ^{*2}
Ventemodus	0,5 W eller mindre ^{*3}

^{*1} Når en ekstern belastning er tilkoblet, «Mode»: «4-Custom», «Brightness»: «100%», RadiLight Focus er på, RadiLight Area-lysstyrke er maksimum

^{*2} Når du bruker DisplayPort-import og USB-porten (oppstrøms) ikke er tilkoblet, «Power Save»: «High», «DP Power Save»: «On», «One Cable PbyP»: «Off», RadiLight Focus er tilkoblet, RadiLight Focus er av, ingen ekstern belastning er tilkoblet

^{*3} Når USB-porten (oppstrøms) ikke er tilkoblet, «DP Power Save»: «On», «One Cable PbyP»: «Off», RadiLight Focus er tilkoblet, RadiLight Focus er av, ingen ekstern belastning er tilkoblet

4.1.7 Fysiske spesifikasjoner

Mål (B x H x D)	682,0 mm x 490,5 mm – 590,5 mm x 225,0 mm (vipping: 0°) 682,0 mm x 534,7 mm – 634,7 mm x 295,2 mm (vipping: 30°)
Mål (B x H x D) (uten fot)	682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm
Nettovekt	Ca. 15,8 kg
Nettovekt (uten fot)	Ca. 11,7 kg
Høydejusteringsområde	100 mm (vipping: 0°)
Vipping	Opp 30°, ned 5°
Sving	70°

4.1.8 Krav til driftsmiljø

Temperatur	0 °C–35 °C
Luftfuktighet	20 %–80 % RF. (ingen duggkondensering)
Lufttrykk	540 hPa–1060 hPa

4.1.9 Forhold for transport/oppbevaring

Temperatur	-20 °C–60 °C
Luftfuktighet	10 %–90 % RF. (ingen duggkondensering)
Lufttrykk	200 hPa–1060 hPa

4.2 Støttede oppløsninger

Skjermen støtter følgende oppløsninger:

✓: Støttes, -: Støttes ikke

Oppløsning	Vertikal skannefrekvens (Hz)	DisplayPort/USB-C			HDMI	
		Enkel-skjermvisning	PbyP-visning	PinP-visning	Enkel-skjermvisning	PinP-visning
640 x 480	59,940	✓	✓	✓	✓	✓
640 x 480	60,000	–	–	–	✓	✓
720 x 400	70,087	✓	✓	✓	✓	✓
720 x 480	59,940	–	–	–	✓	✓
720 x 480	60,000	–	–	–	✓	✓
800 x 600	60,317	✓	✓	✓	✓	✓
1024 x 768	60,004	✓	✓	✓	✓	✓
1200 x 1600	59,963	–	–	✓	–	✓
1200 x 1920	59,940	–	–	✓	–	✓
1280 x 720	59,940	–	–	–	✓	✓
1280 x 720	60,000	–	–	–	✓	✓
1280 x 1024	60,020	✓	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200	60,000	✓	✓	✓	✓	✓
1640 x 2048	59,985	–	✓ ^{*1}	–	–	–
1920 x 1080	59,940	–	–	–	✓	✓
1920 x 1080	60,000	–	–	–	✓	✓
1920 x 1200	59,950	–	–	✓ ^{*1}	–	✓ ^{*1}
2560 x 1600	59,972	–	–	–	✓ ^{*2}	–
3280 x 2048	59,981	✓ ^{*1}	–	–	✓ ^{*3}	–

*1 Anbefalt oppløsning

*2 Anbefalt oppløsning når «LMM Mode (HDMI)» er satt til «On» i «Administrator Settings»

*3 Anbefalt oppløsning når «LMM Mode (HDMI)» er satt til «Off» i «Administrator Settings»

4.3 Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgjengelig separat.

Gå til nettsiden vår for den nyeste informasjonen om valgfritt tilbehør og informasjon og de nyeste kompatible grafikkort.

(www.eizoglobal.com)

Kalibreringssett	RadiCS UX2 Ver.5.1.3 eller senere RadiCS Version Up Kit Ver.5.1.3 eller senere
Programvare for administrering av nettverksbasert kvalitetskontroll	RadiNET Pro Ver.5.1.3 eller senere
Rengjøringssett	ScreenCleaner (Skjermrens)
VESA-adapter for tynn klient eller mini-PC	PCSK-R1
Signalkabel (USB-C – DisplayPort)	CP200

Vedlegg

Medisinsk standard

- Det endelige systemet skal overholde IEC60601-1-kravene.
- Strømforsyningsutstyr kan sende ut elektromagnetiske bølger som kan virke inn på eller begrense skjermfunksjonen, eller føre til at skjermen blir ødelagt. Installer utstyret i kontrollerte omgivelser, hvor slike innvirkninger kan unngås.

Utstyrsklassifisering

- Beskyttelsestype mot elektrisk støt: Klasse I
- EMC-klasse: IEC60601-1-2 Gruppe 1 Klasse B
- Klassifisering av medisinsk utstyr (EU): Klasse I
- Driftsmodus: Kontinuerlig
- IP-klasse: IPX0

EMC-informasjon

RadiForce RX670 har evnen til å vise medisinske bilder på korrekt måte.

Tiltente bruksmiljøer

RadiForce RX670 er beregnet til bruk i et miljø som er spesifisert nedenfor.

- Profesjonelle helseinstitusjonsmiljøer som klinikker og sykehus
- Bosteder, som private bopel og boliger, innenfor hjemmepleiemiljøer

Følgende miljøer er ikke passende for bruk av RadiForce RX670:

- Hjemmepleiemiljøer, ekskludert bosteder
- I nærheten av høyfrekvent kirurgisk utstyr, som f.eks. elektrokirurgiske kniver
- I nærheten av utstyr for kortbølgebehandling
- RF-skjermede rom med medisinske utstyrssystemer for MRI
- I vernede spesialmiljøer
- Installert i kjøretøy, inkludert ambulanser
- Andre spesialmiljøer



ADVARSEL

- RadiForce RX670 krever spesielle forholdsregler når det gjelder EMC, og må installeres i henhold til dette. Du må lese EMC-informasjonen og «FORHOLDSREGLER»-deler i dette dokumentet nøye, og observere følgende instruksjoner når du installerer og opererer produktet.



ADVARSEL

- RadiForce RX670 skal ikke brukes nær eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det må brukes sammen med eller stablet sammen med annet utstyr, må utstyret eller systemet observeres for å verifisere normal drift i konfigurasjonen det skal brukes.



ADVARSEL

- Ved bruk av bærbart RF-kommunikasjonsutstyr må det holdes 30 cm (12 tommer) eller lenger unna alle delene til RadiForce RX670, inkludert kablene. Ellers kan forringelse av utstyrets ytelse oppstå.



ADVARSEL

- Alle som kobler til ytterligere utstyr til signalinngangsdelen eller signalutgangsdelen, og som konfigurerer et medisinsk system, er ansvarlig for at systemet er i samsvar med kravene i IEC60601-1-2.



ADVARSEL

- Ikke ta på kontaktene for signalinngang-/utgang mens du bruker RadiForce RX670. Ellers kan det viste bildet bli påvirket.

**ADVARSEL**

- Sørg for å bruke kablene som medfølger produktet, eller kabler som anbefales av EIZO. Bruk av andre kabler enn som anbefales av EIZO for dette utstyret, kan føre til økt elektromagnetisk utstråling eller redusert elektromagnetisk immunitet for dette utstyret, og feilaktig drift.

Signalport	Maksimal kabellengde	Skjerming	Ferrittkjerne	Anbefalt kabel
DisplayPort	3 m	Skjernet	Uten ferrittkjerne	PP300-V14
HDMI	3 m	Skjernet	Med ferrittkjerne	HH300PR
USB-C (oppstrøms)	1,5 m	Skjernet	Uten ferrittkjerne	CC150SS81G-5A
USB-C (nedstrøms)	2 m	Skjernet	Uten ferrittkjerne	–
USB-B (oppstrøms)	3 m	Skjernet	Med ferrittkjerne	UU300 / MD-C93
USB-A (nedstrøms)	3 m	Skjernet	Uten ferrittkjerne	–
Ethernet	30 m	Ikke-skjernet	Uten ferrittkjerne	–
AC-inntak (eller AC-inngang)	3 m	Ikke-skjernet	Uten ferrittkjerne	Med jordingskabel

Tekniske beskrivelser**Elektromagnetisk stråling**

RadiForce RX670 er beregnet til bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert under.

Kunden eller brukeren av RadiForce RX670 må påse at RadiForce RX670 brukes i et slikt miljø.

Utstrålingstest	Samsvar	Elektromagnetisk miljø – veiledning
RF-stråling CISPR11	Gruppe 1	RadiForce RX670 bruker RF-energi bare til sine interne funksjoner. Derfor er RF-strålingen meget lav og forårsaker sannsynligvis ikke forstyrrelser i det elektroniske utstyret i nærheten.
RF-stråling CISPR11	Klasse B	RadiForce RX670 er egnet for bruk i alle lokaliteter, inkludert boliger og de som er direkte tilkoblet den offentlige lavspenningsstrømforsyningen som forsyner bygninger som brukes til boliger.
Harmoniske strålinger IEC61000-3-2	Klasse D	
Spenningsvariasjoner/ flimmerstråling IEC61000-3-3	I samsvar	

Elektromagnetisk immunitet

RadiForce RX670 har blitt testet ved følgende samsvarsnivå (C) i henhold til testkravene (T) for profesjonelle helseinstitusjonsmiljøer og hjemmepleiemiljøer definert i IEC60601-1-2.

Kunden eller brukeren av RadiForce RX670 må påse at den brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest	Testnivå (T)	Samsvarsnivå (C)	Elektromagnetisk miljø-veiledning
Elektrostatisk utladning (ESD) IEC61000-4-2	±8 kV kontaktutladning ±15 kV luftutladning	±8 kV kontaktutladning ±15 kV luftutladning	Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dekket med syntetisk materiale, skal den relative fuktigheten være minst 30 %.
Elektrisk hurtig transient/burst IEC61000-4-4	±2 kV kraftledninger ±1 kV inn-/utlinjer	±2 kV kraftledninger ±1 kV inn-/utlinjer	Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig strømnnett eller sykehusets strømnnett.
Overspenning IEC61000-4-5	±1 kV linje til linje ±2 kV linje til jord	±1 kV linje til linje ±2 kV linje til jord	Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig strømnnett eller sykehusets strømnnett.
Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på strømforsyningskonta ktene IEC61000-4-11	0 % U_T (100 % fall i U_T) 0,5 sykluser og 1 syklus 70 % U_T (30 % fall i U_T) 25 sykluser / 50 Hz 0 % U_T (100 % fall i U_T) 250 sykluser / 50 Hz	0 % U_T (100 % fall i U_T) 0,5 sykluser og 1 syklus 70 % U_T (30 % fall i U_T) 25 sykluser / 50 Hz 0 % U_T (100 % fall i U_T) 250 sykluser / 50 Hz	Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig strømnnett eller sykehusets strømnnett. Hvis brukeren av RadiForce RX670 krever kontinuerlig drift under nettspenningsforstyrrelser, anbefales det at RadiForce RX670 får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning eller et batteri.
Magnetiske felt fra strømfrekvens IEC61000-4-8	30 A/m (50 / 60 Hz)	30 A/m	Frekvensen på magnetfeltet skal være den samme som er typisk for bedrifter og sykehusmiljø. Produktet skal holdes minst 15 cm vekk fra kilden for strømfrekvens magnetfelt under bruk.

Immunitetstest	Testnivå (T)	Samsvarsnivå (C)	Elektromagnetisk miljø- veiledning
Ledende forstyrrelser som forårsakes av RF-felt IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz–80 MHz 6 Vrms Bånd for ISM ^{*1} og amatørradio ^{*2} mellom 150 kHz og 80 MHz	3 Vrms 6 Vrms	Bærbart og mobilt RF- kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere noen del av RadiForce RX670, inkludert kabler, enn den anbefalte separasjonsavstanden som er beregnet ved hjelp av ligningen som gjelder for senderens frekvens. Anbefalt separasjonsavstand $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$
Utstrålte RF-felt IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz–2,7 GHz	10 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz–800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz–2,7 GHz Der «P» er den maksimale utgangseffekten i watt (W) fra senderen i henhold til produsenten, og «d» er den anbefalte fysiske separasjonsavstanden i meter (m). Feltstyrker fra faste RF- sendere, slik det er fastsatt ved en undersøkelse av elektromagnetisme på driftsstedet ^{*3} , skal være mindre enn samsvarsnivået for hvert frekvensområde ^{*4} . Interferens kan oppstå i nærheten av utstyr merket med følgende symbol. 

Merk

- U_T er vekselstrømspenningen før testnivået påføres.
- Det høyere frekvensområdet gjelder ved 80 MHz og 800 MHz.
- Disse retningslinjene for ledningsbåret RF eller utstrålt RF gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, objekter og mennesker.

^{*1} ISM-båndene (industrielle, vitenskapelige og medisinske) mellom 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz, 13,553 MHz til 13,567 MHz, 26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.

^{*2} Amatørradiobåndene på 0,15 MHz til 80 MHz er 1,8 MHz til 2,0 MHz, 3,5 MHz til 4,0 MHz, 5,3 MHz til 5,4 MHz, 7 MHz til 7,3 MHz, 10,1 MHz til 10,15 MHz, 14 MHz til 14,2 MHz, 18,07 MHz til 18,17 MHz, 21,0 MHz til 21,4 MHz, 24,89 MHz til 24,99 MHz, 28,0 MHz til 29,7 MHz og 50,0 MHz til 54,0 MHz.

^{*3} Det er ikke mulig å forutse med nøyaktighet feltstyrkene fra sendere med fast frekvens, slik som mobiltelefoner / trådløse telefoner, mobilradioer, amatørradioer og AM/FM/TV-sendere. En elektromagnetisk undersøkelse bør vurderes for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som skyldes faste RF-sendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der RadiForce RX670 brukes,

overskrider det gjeldende RF-samsvarsnivået ovenfor, må det kontrolleres om RadiForce RX670 virker som den skal. Dersom det observeres unormal ytelse, må det iverksettes tiltak, som å snu eller flytte på RadiForce RX670.

- *4 Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkene være lavere enn 3 V/m.

Anbefalte avstander mellom bærbart eller mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og RadiForce RX670

RadiForce RX670 er beregnet brukt i et elektromagnetisk miljø der RF-utstrålt støy er kontrollert. Kunden eller brukeren av RadiForce RX670 kan forhindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde en minste avstand (30 cm) mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere), og RadiForce RX670. RadiForce RX670 har blitt testet ved følgende samsvarsnivåer (C) for de nødvendige testnivåene (T) av immunitet til de nærliggende elektromagnetiske feltene i følgende RF-kommunikasjonstjenester.

Testfrekvens (MHz)	Båndbredde ^{*1} (MHz)	Service ^{*1}	Modulasjon ^{*2}	Testnivå (T) ^{*3} (V/m)	Samsvarsnivå (C) (V/m)
385	380–390	TETRA 400	Pulsmodulasjon ^{*2} 18 Hz	27	27
450	430–470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz avvik 1 kHz sine	28	28
710	704–787	LTE-bånd 13, 17	Pulsmodulasjon ^{*2} 217 Hz	9	9
745					
780					
810	800–960	GSM 800 / 900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE-bånd 5	Pulsmodulasjon ^{*2} 18 Hz	28	28
870					
930					
1720	1700–1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE-bånd 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulsmodulasjon ^{*2} 217 Hz	28	28
1845					
1970					
2450	2400–2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE-bånd 7	Pulsmodulasjon ^{*2} 217 Hz	28	28
5240	5100–5800	WLAN 802.11 a/n	Pulsmodulasjon ^{*2} 217 Hz	9	9
5500					
5785					

*1 Bare uplink-frekvensene er inkludert for noen systemer.

*2 Bæreren moduleres med et 50 % driftssyklus firkantbølgesignal.

*3 Testnivåene ble beregnet med maksimal effekt og 30 cm separasjonsavstand.

Kunden eller brukeren av RadiForce RX670 kan forhindre interferens forårsaket av magnetiske nærhetsfelt ved å opprettholde en minimum avstand (15 cm) mellom RF-senderen og RadiForce RX670. RadiForce RX670 har blitt testet ved følgende samsvarsnivå (C) for de påkrevde testnivåene (T) for immunitet mot magnetiske nærhetsfelt.

Testfrekvens	Modulasjon	Testnivå (T) (A/m)	Samsvarsnivå (C) (A/m)
30 kHz	CW (kontinuerlig bølge)	8	8
134,2 kHz	Pulsmodulasjon* ¹ 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Pulsmodulasjon* ¹ 50 kHz	7,5	7,5

*¹ Bæreren moduleres med et 50 % driftssyklus firkantbølgesignal.

For annet bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) opprettholdes minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere), og RadiForce RX670 som anbefalt under, i henhold til maksimum utgangseffekt for kommunikasjonsutstyret.

Senderens nominelle maks. utgangseffekt (W)	Separasjonsavstand i henhold til senderens frekvens (m)		
	150 kHz – 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz – 2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

For sendere med en maksimal nominell utgangseffekt som ikke er tilgjengelig ovenfor, kan den anbefalte separasjonsavstanden «d» i meter (m) estimeres ved å bruke ligningen som gjelder for frekvensen til senderen, hvor «P» er senderens maksimale nominelle utgangseffekt i watt (W) i henhold til produsenten.

Merk

- Ved 80 MHz og 800 MHz må separasjonsavstanden for et høyere frekvensområde brukes.
- Disse retningslinjene for ledningsbåret RF eller utstrålt RF gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, objekter og mennesker.



EIZO Corporation 
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH EC REP
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

艺卓显像技术(苏州)有限公司
中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

EIZO Limited UK Responsible Person
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG CH REP
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N440AZ
IFU-RX670