



Notice d'instruction

RadiForce® RX670

Moniteur couleur LCD

Remarque importante

Veillez à lire la notice d'instruction et le manuel d'installation avant toute utilisation.







Veillez conserver ce manuel pour le consulter ultérieurement.

- Reportez-vous au manuel d'installation pour en savoir plus sur les réglages et la configuration du moniteur.
- Les dernières informations relatives au produit, y compris la notice d'instruction, sont disponibles sur notre site web.

www.eizoglobal.com

SYMBOLES

Ce manuel et ce produit utilisent les symboles ci-dessous. Ils communiquent des informations cruciales. Veuillez les lire attentivement.

 AVERTISSEMENT	Le non-respect des informations contenues dans un AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
 MISE EN GARDE	Le non-respect des informations contenues dans une MISE EN GARDE peut entraîner des blessures modérées et/ou des dommages matériels ou sur le produit.
	Indique un avertissement ou une mise en garde. Par exemple,  indique un risque de « choc électrique ».
	Indique une action interdite. Par exemple,  signifie « Ne pas démonter ».

Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Si le produit est utilisé en dehors de ladite région, il risque de ne pas fonctionner comme indiqué dans les spécifications.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système d'extraction ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de EIZO Corporation. EIZO Corporation n'a aucune obligation de maintenir les documents ou informations soumis confidentiels, à moins que des dispositions antérieures n'aient été prises conformément à la réception par EIZO Corporation desdites informations. Bien que tout soit mis en œuvre pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent manuel, veuillez noter que les spécifications des produits EIZO peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.


PRÉCAUTIONS

Remarque importante

Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Si le produit est utilisé en dehors de ladite région, il risque de ne pas fonctionner comme indiqué dans les spécifications.

Pour garantir votre sécurité et une maintenance correcte, lisez attentivement la section « PRÉCAUTIONS » et les mises en garde sur l'écran.

Emplacements des étiquettes de sécurité

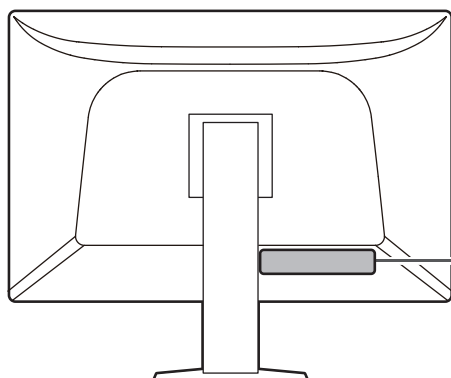



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.













WARNUNG
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

警告
触电危険、请勿打开后盖。





警告
感電の恐れあり、カバーをあけないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
L'appareil doit être relié à une prise avec terre.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
设备必须连接到接地的电源插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

Symboles sur l'appareil

Symbole	Ce symbole indique
	Commutateur d'alimentation principal : Appuyez sur ce bouton pour éteindre le moniteur.
	Commutateur d'alimentation principal : Appuyez sur ce bouton pour activer l'alimentation principale du moniteur.
	Touche d'alimentation : Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre le moniteur.
	Courant alternatif
	Avertissement sur les dangers électriques
	MISE EN GARDE
	Marquage DEEE : Le produit doit être éliminé séparément ; les matériaux peuvent être recyclés.
	Marquage CE : Marque de conformité aux dispositions des directives et/ou règlements de l'Union européenne (UE).
	Fabricant
	Date de fabrication
	Attention : La loi fédérale américaine stipule que ce produit ne peut être vendu ou prescrit que par un professionnel de la santé autorisé.
	Dispositif médical dans l'UE

PRÉCAUTIONS

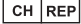Symbole	Ce symbole indique
EU Importer	Importateur dans l'UE
	Marque indiquant la conformité à la réglementation britannique
	Responsable au Royaume-Uni
	Représentant autorisé en Suisse
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne

AVERTISSEMENT**AVERTISSEMENT**

Si l'appareil commence à émettre de la fumée, s'il sent le brûlé ou fait des bruits étranges, débranchez immédiatement toutes les connexions électriques et contactez votre représentant EIZO pour obtenir des conseils.

Tenter d'utiliser un appareil défectueux peut provoquer un incendie, entraîner un choc électrique ou endommager l'équipement.

**AVERTISSEMENT**

Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil.

L'ouverture du boîtier peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des brûlures en raison des pièces sous haute tension ou à haute température. La modification d'un appareil peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

**AVERTISSEMENT**

Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié.

N'essayez pas de réparer ce produit vous-même car ouvrir ou retirer les couvercles peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages matériels.

**AVERTISSEMENT**

Tenez les objets étrangers ou liquides loin de l'appareil.

Les pièces métalliques, les matériaux inflammables ou les liquides tombant ou se déversant accidentellement dans le boîtier risquent d'entraîner un incendie, un choc électrique ou d'endommager l'équipement.

Si un objet tombe dans le boîtier ou si du liquide s'y déverse, débranchez immédiatement l'appareil. Faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.

**AVERTISSEMENT**

Placez l'appareil sur une surface solide et stable.

Placer l'appareil sur une surface inadaptée peut entraîner la chute de l'appareil et des blessures corporelles.

Si l'appareil tombe, débranchez-le immédiatement et demandez conseil à votre représentant local EIZO. Cessez immédiatement d'utiliser un appareil endommagé. L'utilisation d'un appareil endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT

Utilisez l'appareil dans un endroit approprié.

Sinon, un incendie, un choc électrique ou des dommages matériels peuvent en résulter.

- Ne le placez pas à l'extérieur.
- Ne le placez dans aucun moyen de transport (bateaux, avions, trains, automobiles, etc.).
- Ne le placez pas dans un environnement poussiéreux ou humide.
- Ne le placez pas dans des endroits où de l'eau peut éclabousser l'écran (salles de bains, cuisines, etc.)
- Ne le placez pas dans des endroits où de la vapeur est en contact direct avec l'écran.
- Ne le placez pas à proximité d'appareils de production de chaleur ou d'humidificateurs.
- Ne le placez pas dans des endroits où le produit est exposé aux rayons directs du soleil.
- Ne le placez pas dans des environnements contenant des gaz inflammables.
- Ne le placez pas dans des environnements contenant des gaz corrosifs (comme le dioxyde de soufre, l'hydrogène de sulfure, le dioxyde d'azote, le chlore, l'ammoniac, l'ozone).
- Ne le placez pas dans des environnements poussiéreux contenant des composants qui accélèrent la corrosion dans l'atmosphère (comme le chlorure de sodium et le soufre), des métaux conducteurs, etc.



AVERTISSEMENT

Tenez les sacs en plastique hors de portée des bébés et des enfants.

Les sacs en plastique peuvent créer un risque d'étouffement.

AVERTISSEMENT

Utilisez le cordon d'alimentation fourni et branchez-le à la prise de courant standard de votre pays.

Veillez à utiliser la plage de tension nominale du cordon d'alimentation. Sinon, un incendie ou un choc électrique peut en résulter.

Alimentation : 100-240 Vca 50/60 Hz


AVERTISSEMENT

Pour débrancher le cordon d'alimentation de l'adaptateur, saisissez la fiche fermement et tirez.

Tirer sur le cordon peut l'endommager et provoquer un incendie ou un choc électrique.



OK

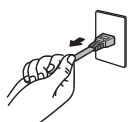

AVERTISSEMENT

L'équipement doit être branché à une prise électrique raccordée à la terre.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou un choc électrique.



**AVERTISSEMENT****Utilisez la bonne tension.**

- Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation avec une tension spécifique. La connexion à une tension autre que celle spécifiée dans cette « Notice d'instruction » peut déclencher un incendie, provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement.
Alimentation : 100-240 Vca 50/60 Hz
- Ne surchargez pas votre circuit d'alimentation, car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

**AVERTISSEMENT****Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution.**

Ne placez pas d'objets lourds dessus, ne tirez ou ne nouez pas le cordon d'alimentation. L'utilisation d'un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

**AVERTISSEMENT****L'opérateur ne doit pas toucher le patient en touchant le produit.**

Ce produit n'a pas été conçu pour être touché par les patients.

**AVERTISSEMENT****Ne touchez jamais la fiche ou le cordon d'alimentation pendant un orage.**

Sinon, cela peut provoquer un choc électrique.

**AVERTISSEMENT****Fixez le bras conformément aux instructions de son manuel d'utilisation et installez l'appareil en toute sécurité.**

Dans le cas contraire, vous pourriez vous blesser et/ou endommager le matériel en laissant tomber l'appareil.

Avant l'installation, veillez à ce que les bureaux, les murs ou toute autre surface d'installation possèdent la résistance mécanique suffisante.

Si l'appareil tombe, débranchez-le immédiatement et demandez conseil à votre représentant local EIZO. Cessez immédiatement d'utiliser un appareil endommagé. L'utilisation d'un appareil endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Pour refixer le socle inclinable, utilisez les mêmes vis et serrez-les correctement.

**AVERTISSEMENT****Ne touchez pas un panneau LCD endommagé directement à mains nues.**

En cas de contact de la peau avec le panneau, lavez immédiatement à grande eau.

Si des cristaux liquides pénètrent dans vos yeux ou votre bouche, rincez immédiatement abondamment avec de l'eau et consultez un médecin. Dans le cas contraire, vous risquez une réaction toxique.



PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT

Pour une installation sur des surfaces élevées, veuillez demander l'aide d'un professionnel.

Lors de l'installation du moniteur sur un support en hauteur, il existe un risque de chute du produit ou de ses pièces, ce qui risque d'entraîner des blessures. Demandez notre aide ou celle d'un professionnel des travaux de construction pour l'installation du moniteur, notamment pour l'inspection du produit visant à vérifier l'absence de dommages ou de déformations à la fois avant et après l'installation.

MISE EN GARDE



MISE EN GARDE

Ne regardez jamais directement la source de lumière du rétroéclairage ou de la lampe de travail.

Cela peut potentiellement provoquer une gêne oculaire et des problèmes de vision.



MISE EN GARDE

N'appliquez pas de pression trop forte sur le bras de la lampe de travail.

Plier ou tordre le bras avec une force excessive peut entraîner des dommages ou un dysfonctionnement.



MISE EN GARDE

Contrôlez l'état de fonctionnement avant utilisation.

Commencez à utiliser l'appareil après avoir vérifié qu'il n'y a pas de problème avec l'image affichée.

Lorsque vous utilisez plusieurs appareils, commencez à les utiliser après avoir vérifié que les images sont affichées correctement.



MISE EN GARDE

Fixez solidement les câbles / cordons qui possèdent un élément de fixation.

S'ils ne sont pas solidement fixés, les câbles / cordons peuvent se débrancher, les images être coupées et vos opérations interrompues.



MISE EN GARDE

Débranchez les câbles et retirez les accessoires avant de déplacer l'appareil.

Dans le cas contraire, les câbles ou accessoires risquent de se détacher lors du déplacement et de causer des blessures.





MISE EN GARDE

Transportez ou placez l'appareil conformément aux méthodes spécifiées.

- Lorsque vous déplacez le produit, saisissez fermement la partie inférieure du moniteur.
- Les moniteurs d'une taille de 30 pouces et plus sont lourds. Lors du déballage et/ou du transport du moniteur, assurez-vous qu'au moins deux personnes sont présentes.
- Si votre modèle dispose d'une poignée à l'arrière du moniteur, saisissez fermement la partie inférieure et la poignée du moniteur.

Vous pourriez vous blesser ou endommager le matériel en laissant tomber l'appareil.

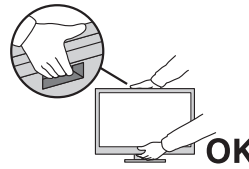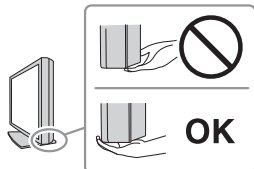

PRÉCAUTIONS



MISE EN GARDE

Soyez prudent pour éviter de vous pincer les mains.

Si vous appliquez une force soudaine sur le moniteur pour ajuster sa hauteur ou son orientation, vous risquez de vous pincer les mains et de vous blesser.



MISE EN GARDE

N'obstruez pas les fentes d'aération du boîtier.

- Ne placez aucun objet sur les fentes d'aération.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où la ventilation est insuffisante ou l'espace inadapté.
- N'utilisez pas l'appareil par terre ou à l'envers.

L'obstruction des fentes d'aération empêche le bon passage de l'air et peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages matériels.



MISE EN GARDE

Ne touchez pas la fiche secteur avec les mains mouillées.

Sinon, cela peut provoquer un choc électrique.



MISE EN GARDE

Ne placez aucun objet autour de la fiche électrique.

Cela permet de débrancher facilement la fiche électrique en cas de problème pour éviter tout incendie ou choc électrique.



MISE EN GARDE

Nettoyez régulièrement la zone située autour de la fiche électrique et de la fente de ventilation du moniteur.

La poussière, l'eau ou l'huile adhérent à cette zone peut provoquer un incendie.



MISE EN GARDE

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Nettoyer l'appareil alors qu'il est branché sur une prise électrique peut provoquer un choc électrique.



MISE EN GARDE

Si vous prévoyez de laisser l'appareil inutilisé pendant une période prolongée, débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale après avoir mis l'interrupteur d'alimentation sur OFF pour des raisons de sécurité et d'économie d'énergie.



MISE EN GARDE

Éliminez ce produit conformément aux lois de la localité ou du pays de résidence.



MISE EN GARDE

Pour les utilisateurs résidant en Suisse ou sur le territoire de l'un des pays de l'EEE :
Tout incident grave en lien avec l'appareil doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où l'utilisateur et/ou le patient réside.

Avertissement relatif au présent moniteur

Mode d'emploi

Ce produit est conçu pour afficher des images radiologiques permettant aux professionnels de la santé d'effectuer des examens, des analyses et des diagnostics. L'affichage n'est pas conçu pour la mammographie.

Attention

- Ce produit n'est pas destiné à un usage de diagnostic in vitro.
- Ce produit peut ne pas être couvert par la garantie pour des usages autres que ceux décrits dans le présent manuel.
- Les spécifications notées dans ce manuel ne sont applicables que lorsque les cordons d'alimentation fournis avec le produit et les câbles de signalisation spécifiés par EIZO sont utilisés.
- Utilisez uniquement les accessoires EIZO spécifiés par EIZO avec ce produit.

Précautions d'utilisation

- Des pièces (telles que le panneau LCD et la ventilation) peuvent se détériorer en cas d'utilisation à long terme. Vérifiez régulièrement si elles fonctionnent normalement.
- Lorsque l'image de l'écran change après que la même image est restée affichée pendant une période prolongée, une image rémanente risque de persister. Utilisez l'économiseur d'écran ou la fonction veille pour éviter d'afficher la même image pendant une période prolongée. Une image rémanente apparaît même après une courte période en fonction de l'image affichée. Pour éliminer un tel phénomène, modifiez l'image ou coupez l'alimentation pendant plusieurs heures.
- Plusieurs minutes sont nécessaires à la stabilisation de l'affichage du moniteur. Avant d'utiliser le moniteur, patientez quelques minutes ou plus après la mise sous tension du moniteur ou après la sortie du moniteur du mode d'économie d'énergie.
- Si le moniteur affiche un contenu en continu sur une longue période, des taches ou des brûlures sont susceptibles d'apparaître sur l'écran. Afin d'optimiser la durée de vie d'un moniteur, nous vous conseillons de l'éteindre régulièrement.
- La durée de vie du rétroéclairage du panneau LCD est limitée. Les habitudes d'utilisation, par exemple lorsque le moniteur est allumé en continu pendant de longues périodes, peuvent raccourcir la durée de vie du rétroéclairage, lequel doit alors être remplacé plus tôt que prévu. Si l'écran s'assombrit ou se brouille, prenez contact avec votre représentant local EIZO.
- L'écran peut avoir des pixels défectueux ou un petit nombre de points lumineux sur l'écran. Cela est dû aux caractéristiques du panneau LCD lui-même, et n'est pas un dysfonctionnement du produit.
- N'appuyez pas fortement sur la surface de l'écran LCD ou sur les bords extérieurs, car cela peut entraîner des dysfonctionnements de l'affichage, comme des interférences, etc. Si la pression est continuellement appliquée sur la surface de l'écran LCD, le cristal liquide peut se détériorer ou le panneau LCD peut être endommagé. (Si des marques de pression restent sur le panneau LCD, affichez un écran noir ou blanc sur le moniteur. Le problème peut être ainsi résolu.)
- Prenez garde de ne pas rayer ou d'appuyer sur le panneau LCD avec des objets pointus, car cela pourrait entraîner des dommages au panneau LCD. Ne tentez jamais de le nettoyer à sec avec du tissu, au risque de le rayer.
- Ne touchez pas la sonde d'étalonnage intégrée (capteur frontal intégré). Cela risque de réduire la précision de la mesure et d'endommager l'équipement.

- Selon l'environnement, la valeur mesurée par le capteur d'éclairement intégré peut différer de la valeur indiquée par un luminomètre autonome.
- De la condensation peut se former à la surface ou l'intérieur de ce produit lorsqu'il est placé dans une pièce froide, lorsque la température augmente soudainement ou lorsqu'il est déplacé d'une pièce froide à une pièce chaude. Dans ce cas, ne mettez pas le produit sous tension. Et attendez la disparition de la condensation. Sinon, le produit pourrait être endommagé.

Pour utiliser le moniteur durant une longue période

Contrôle de la qualité

- La qualité d'affichage des moniteurs est affectée par le niveau de qualité des signaux d'entrée et la dégradation du produit. Effectuez des vérifications visuelles et des tests périodiques de constance (notamment une vérification des niveaux de gris) pour vous conformer aux normes/directives médicales correspondantes à votre application, et effectuez tout étalonnage nécessaire. Le logiciel de contrôle de qualité du moniteur RadiCS (vendu séparément) vous permet d'effectuer un contrôle de qualité qui respecte les normes et les directives médicales.
- Veuillez patienter 15 minutes, ou plus, après la mise sous tension du moniteur ou après la sortie du moniteur du mode d'économie d'énergie, avant de réaliser des tests de contrôle de la qualité, un calibrage ou un réglage de l'écran du moniteur.
- Nous vous recommandons de régler le moniteur au niveau recommandé de luminosité ou à un niveau plus faible afin de limiter les variations de la luminosité provoquées par une utilisation à long terme et de stabiliser l'intensité lumineuse.
- Afin d'ajuster les résultats de mesure du capteur de calibrage intégré (capteur frontal intégré) à ceux d'un capteur externe EIZO vendu séparément, effectuez une corrélation entre le capteur frontal intégré et le capteur externe à l'aide de RadiCS (accessoire vendu séparément) ou de RadiCS LE (inclus). Des corrélations périodiques vous permettent de maintenir la précision des mesures du capteur frontal intégré à un niveau équivalent à celle du capteur externe. Pour obtenir plus d'informations sur la corrélation, reportez-vous au Manuel d'utilisation du RadiCS / RadiCS LE.

Attention

- L'état d'affichage du moniteur peut changer de manière inattendue en raison d'une erreur de fonctionnement ou d'une modification de réglage inattendue. L'utilisation du moniteur à l'aide des commutateurs de fonctionnement verrouillés est recommandée après l'ajustement de l'écran du moniteur.
Pour obtenir de plus amples informations sur les réglages, consultez le Manuel d'installation (sur le CD-ROM).

Nettoyage

- Un nettoyage périodique est recommandé pour conserver l'aspect neuf du produit et prolonger sa durée de vie.
- Les taches sur le produit peuvent être éliminées en humectant celles-ci avec de l'eau et un tissu doux ou en les essuyant délicatement avec le ScreenCleaner.

Attention

- Veillez à ce qu'aucun liquide n'entre en contact direct avec le produit. Si c'est le cas, essuyez-le immédiatement.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les interstices ou à l'intérieur du produit.
- Lors de l'utilisation de produits chimiques pour le nettoyage ou la désinfection, les produits chimiques comme l'alcool et les désinfectants peuvent provoquer une modification du brillant, le ternissement et la décoloration du produit, ainsi que la détérioration de la qualité de l'image affichée. N'utilisez pas de produits chimiques de manière fréquente.
- N'utilisez jamais de diluant, benzène, cire ou nettoyant abrasif, car ils endommageront le produit.
- Pour plus d'informations sur le nettoyage et la désinfection, reportez-vous à notre site web. Comment vérifier : Rendez-vous sur www.eizoglobal.com et tapez « disinfect » (désinfecter) dans le champ de recherche du site pour lancer la recherche.

Désinfection avec des produits chimiques

- Pour désinfecter les produits, nous recommandons d'utiliser des produits chimiques testés par nos soins (voir le tableau ci-dessous). Notez que l'utilisation de ces produits chimiques ne garantit pas que le produit ne sera pas endommagé ou détérioré.

Catégorie	Type de produit chimique	Exemple de produit
À base d'alcool	Éthanol à friction (alcool éthylique)	Éthanol
À base d'alcool	Isopropanol	Alcool isopropylique (IPA)
Chlore	Hypochlorite de sodium	Purelox
Biguanide	Gluconate de chlorhexidine	Solution d'Hibitane
À base d'alcool	Chlorure de benzalkonium	Welpas
À base d'aldéhyde	Glutaraldéhyde	Sterihyde
À base d'aldéhyde	Glutaraldéhyde	Cidex Plus28
Tensioactif amphotère	Alkyldiaminoéthylglycine chlorhydrate	Solution de satenidin

Pour utiliser le moniteur confortablement

- Un écran trop sombre ou trop lumineux peut abîmer les yeux. Ajustez la luminosité du moniteur en fonction des conditions ambiantes.
- Regarder le moniteur trop longtemps entraîne une fatigue oculaire. Faites des pauses de 10 minutes toutes les heures.
- Regardez l'écran à une distance et sous un angle appropriés.

Responsabilités et avertissement en matière de cybersécurité

- Une mise à jour du micrologiciel doit être réalisée par le biais de EIZO Corporation ou de son distributeur.
- Si EIZO Corporation ou son distributeur vous demande de mettre à jour le micrologiciel, faites-le immédiatement.

CONTENUS

PRÉCAUTIONS	3
Remarque importante	3
Emplacements des étiquettes de sécurité	3
Symboles sur l'appareil	3
AVERTISSEMENT	5
MISE EN GARDE	9
Avertissement relatif au présent moniteur	12
Mode d'emploi	12
Précautions d'utilisation	12
Pour utiliser le moniteur durant une longue période	13
Contrôle de la qualité	13
Nettoyage	13
Désinfection avec des produits chimiques	14
Pour utiliser le moniteur confortablement	14
Responsabilités et avertissement en matière de cybersécurité	14
1 Introduction	17
1.1 Caractéristiques	17
1.1.1 Disposition libre	17
1.1.2 Câblage simple	17
1.1.3 Prend en charge l'affichage vidéo et l'alimentation avec une seule connexion par câble USB Type-C	17
1.1.4 Affichage hybride couleur et monochrome	18
1.1.5 Contrôle de la qualité	18
1.1.6 Fonction de station d'accueil	18
1.1.7 Équipé d'une fonction d'éclairage (RadiLight)	19
1.1.8 Une conception économisant de l'espace	19
1.1.9 Gestion du moniteur depuis la souris et le clavier	19
1.2 Contenu de l'emballage	20
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk	20
1.2.2 RadiCS LE	21
1.2.3 Utilisation du logiciel RadiCS LE	21
1.3 Commandes et fonctions	22
1.3.1 Avant	22
1.3.2 Arrière	23
2 Installation / Branchements	25
2.1 Avant l'installation	25
2.1.1 Conditions d'installation	25
2.2 Câbles de raccordement	26

2.3	Installation de RadiLight Focus (lampe de travail)	31
2.4	Mise sous tension	31
2.5	Régler la hauteur et l'angle de l'écran.....	32
2.6	Installation du couvercle de connecteurs	33
2.7	Utilisation de RadiLight Area / RadiLight Focus.....	34
3	Problème « Pas d'image »	35
4	Spécifications	37
4.1	Liste des spécifications	37
4.1.1	Type	37
4.1.2	Panneau LCD	37
4.1.3	Signaux vidéo	37
4.1.4	Port	37
4.1.5	Réseau.....	38
4.1.6	Alimentation	38
4.1.7	Spécifications physiques.....	38
4.1.8	Conditions de fonctionnement	38
4.1.9	Conditions de transport / stockage	38
4.2	Résolutions prises en charge.....	39
4.3	Accessoires	39
Annexe	40
	Normes médicales	40
	Classification de l'équipement	40
	Informations sur la CEM.....	41
	Environnements d'utilisation prévue	41
	Descriptions techniques.....	42
	Informations sur les Interférences Radioélectriques	48
	For U.S.A., Canada Only	48


1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un moniteur couleur LCD EIZO.

1.1 Caractéristiques

1.1.1 Disposition libre

- Ce produit est doté des fonctions PbyP (image par image) et PinP (image dans l'image) qui permettent d'afficher jusqu'à trois signaux en même temps.

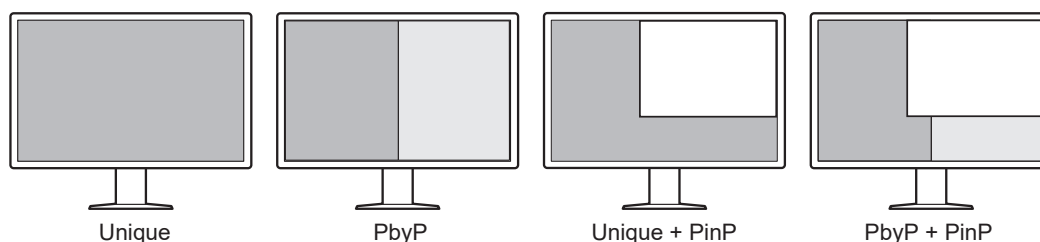


- Le moniteur dispose de la fonction One Cable PbyP, qui permet d'afficher les images en mode PbyP à l'aide d'un unique câble de signal.

1.1.2 Câblage simple

Ce moniteur est doté d'un connecteur USB Type-C® (USB-C®).


Ce connecteur peut être relié à l'entrée d'un autre moniteur.

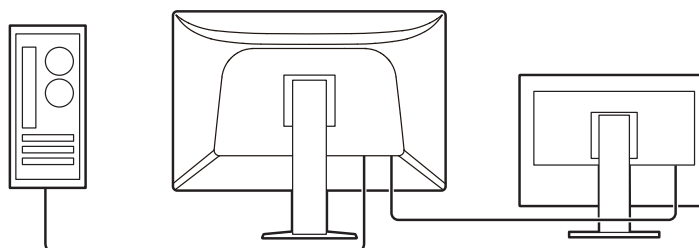

1.1.3 Prend en charge l'affichage vidéo et l'alimentation avec une seule connexion par câble USB Type-C.

Ce produit possède un connecteur USB-C et prend en charge la transmission de signaux vidéo (Mode Alt DisplayPort™) ainsi que l'alimentation (USB Power Delivery).

Il délivre une alimentation de 94 W maximum à un PC portable connecté lorsqu'il est utilisé comme moniteur externe.

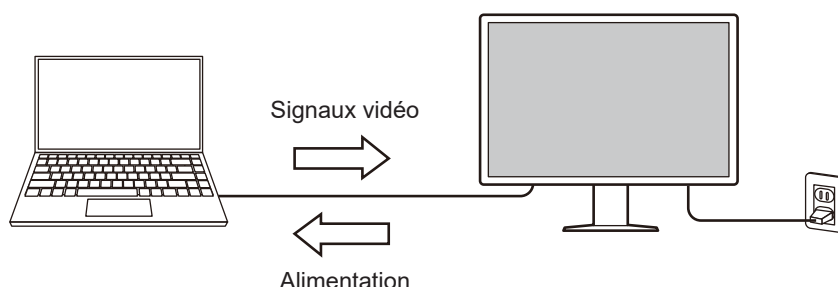

Remarque

- Pour afficher des signaux vidéo, le périphérique branché doit prendre en charge la transmission de signaux vidéo (DisplayPort Alt Mode).
- Pour utiliser la fonction de rechargement, le périphérique branché doit prendre en charge l'USB Power Delivery.
- Une alimentation de 94 W maximum peut être fournie uniquement lorsque les câbles USB suivants sont utilisés.
 - CC150SS81G-5A (fourni)
- Les périphériques branchés peuvent être rechargés même lorsque le moniteur est en mode d'économie d'énergie.

1.1.4 Affichage hybride couleur et monochrome


Lorsque la fonction Hybrid Gamma PXL est activée, ce produit différencie automatiquement les parties monochromes et les parties en couleur de la même image à un niveau de pixel, et les affiche respectivement dans des gradations optimales.

1.1.5 Contrôle de la qualité

- Ce moniteur dispose d'un capteur d'étalonnage embarqué (capteur frontal intégré). Ce capteur permet au moniteur d'exécuter l'étalonnage (SelfCalibration) et la vérification des niveaux de gris de façon indépendante.
- Grâce au logiciel RadiCS LE fourni, vous pouvez effectuer le calibrage du moniteur et gérer l'historique.
- Le logiciel de contrôle de qualité du moniteur RadiCS vous permet d'effectuer un contrôle de qualité de haut niveau qui respecte les normes et les directives médicales.

1.1.6 Fonction de station d'accueil

Ce moniteur est équipé d'un port LAN et d'un concentrateur USB afin d'être utilisé comme station d'accueil. En branchant un câble USB-C, vous pouvez créer un environnement réseau stable, y compris sur les ordinateurs portables ou les tablettes qui ne sont pas équipés de ports LAN. Vous pouvez également utiliser des périphériques USB compatibles et recharger un smartphone (voir « Utilisation de la fonction de station d'accueil » dans le Manuel d'installation).

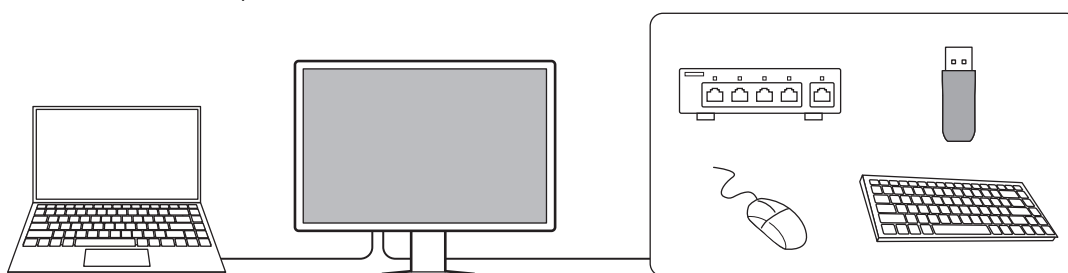


1.1.7 Équipé d'une fonction d'éclairage (RadiLight)

RadiLight Area (Rétroéclairage)

- RadiLight Area est une fonction d'éclairage arrière intégrée au moniteur. Elle fournit un éclairage indirect à l'arrière du moniteur, ce qui permet de réaliser des interprétations radiologiques efficaces dans des environnements faiblement éclairés.


RadiLight Focus (Lampe de travail)

- RadiLight Focus est une lampe de travail amovible. Elle peut éclairer votre espace de travail lorsque vous lisez, rédigez des documents ou utilisez un clavier.

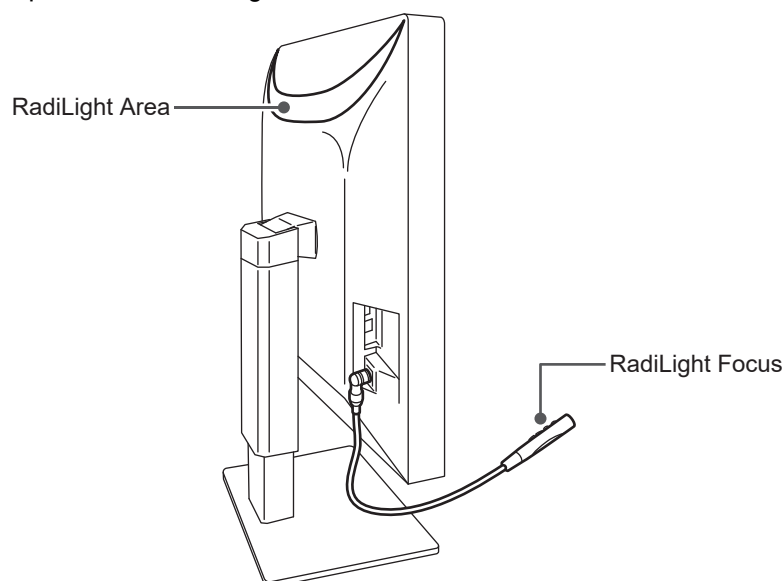

1.1.8 Une conception économisant de l'espace

Ce moniteur est doté de plusieurs connecteurs USB (amont). Vous pouvez faire fonctionner plusieurs PC à l'aide d'un ensemble de périphériques USB (souris, clavier, etc.).

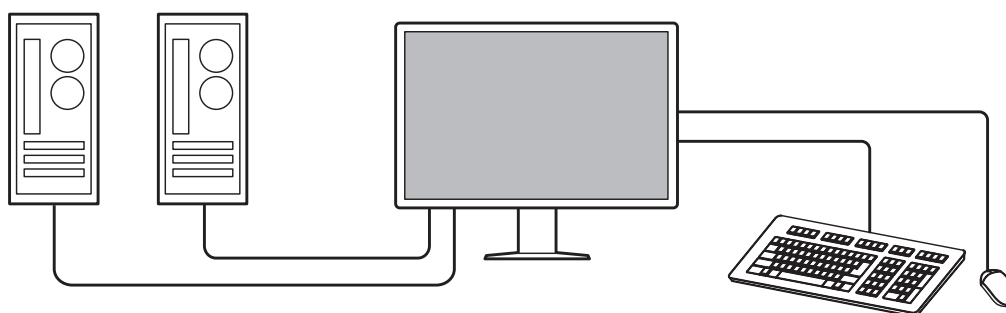

1.1.9 Gestion du moniteur depuis la souris et le clavier

Grâce au logiciel de gestion de la qualité du moniteur RadiCS / RadiCS LE, vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur le moniteur à l'aide de la souris et du clavier :

- Basculer entre les modes de CAL Switch
- Basculer entre les signaux d'entrée
- Fonction qui attribue le mode de CAL Switch à une partie de l'écran et affiche une image (Point et Mise au point)
- Afficher ou cacher la sous-fenêtre PinP (Hide-and-Seek)
- Changer les PC qui utilisent des périphériques USB (Switch-and-Go)
- Démarrer le mode d'économie d'énergie (Backlight Saver)

- Une fonction qui augmente temporairement la luminosité pour améliorer la visibilité des imageries diagnostiques (Instant Backlight Booster)

Remarque

- Le logiciel RadiCS / RadiCS LE vous permet d'afficher ou de masquer la sous-fenêtre PinP et de changer le PC utilisé pour faire fonctionner les périphériques USB en même temps. Pour obtenir plus d'informations sur la procédure de configuration, consultez le Manuel d'utilisation du RadiCS / RadiCS LE.

1.2 Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les articles suivants sont inclus dans l'emballage. Si le moindre de ces articles est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur ou votre représentant EIZO.

Remarque

- Nous vous recommandons de stocker la boîte et les matériaux d'emballage afin de pouvoir les utiliser pour déplacer et transporter ce produit.

- Moniteur
- Cordon d'alimentation



- Câble de signal numérique (DisplayPort - DisplayPort) PP300-V14 x 2



- Câble de signal numérique (HDMI – HDMI) : HH300PR x 1



- Câble USB 2.0 (USB-A – USB-B) : UU300 x 2



- Câble USB-C (USB-C vers USB-C) : CC150SS81G-5A x 1



- Couvercle de connecteurs (gauche)
- Couvercle de connecteurs (droite)
- RadiLight Focus (Lampe de travail)
- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Notice d'instruction

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

Ce CD-ROM contient les éléments suivants. Référez-vous au fichier « Readme.txt » sur le disque pour en savoir plus sur les procédures de démarrage du logiciel ou les procédures de fichiers de référence.

- Fichier Readme.txt
- Logiciel de contrôle de qualité du moniteur RadiCS LE (pour Windows)
- Manuel d'utilisation
 - Notice d'instruction de ce moniteur
 - Manuel d'installation du moniteur

- Manuel d'utilisation RadiCS LE
- Dimensions externes

1.2.2 RadiCS LE

Le logiciel RadiCS LE vous permet d'effectuer les opérations suivantes de contrôle de la qualité et de gestion du moniteur. Pour obtenir plus d'informations sur la procédure de configuration, consultez le Manuel d'utilisation de RadiCS LE.

Contrôle de la qualité

- Calibrage
- Affichage des résultats des tests dans une liste et création d'un rapport de tests
- Réglage de la cible de SelfCalibration et de l'horaire d'exécution

Gestion du moniteur

- Basculer entre les modes de CAL Switch
- Basculer entre les signaux d'entrée
- Fonction qui attribue le mode de CAL Switch à une partie de l'écran et affiche une image (Point et Mise au point)
- Afficher ou cacher la sous-fenêtre PinP (Hide-and-Seek)
- Changer les PC qui utilisent des périphériques USB (Switch-and-Go)
- Démarrer le mode d'économie d'énergie (Backlight Saver)
- Une fonction qui augmente temporairement la luminosité pour améliorer la visibilité des imageries diagnostiques (Instant Backlight Booster)
- Une fonction qui ajuste automatiquement la luminosité du moniteur pour s'adapter au niveau de lumière ambiante lorsque le mode « Text » est défini (Auto Brightness Control)

Attention
<ul style="list-style-type: none"> • Les spécifications du RadiCS LE sont sujettes à changement sans préavis. La dernière version du logiciel RadiCS LE peut être téléchargée depuis notre site web : (www.eizoglobal.com)


1.2.3 Utilisation du logiciel RadiCS LE

Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'installer et d'utiliser le logiciel RadiCS LE, consultez le Manuel d'utilisation de RadiCS LE (sur le CD-ROM).

Lors de l'utilisation du logiciel RadiCS LE, branchez le moniteur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Pour obtenir davantage d'informations sur la façon de brancher votre PC à l'aide du câble USB fourni, consultez [2.2 Câbles de raccordement](#) [► 26].


1.3 Commandes et fonctions

1.3.1 Avant

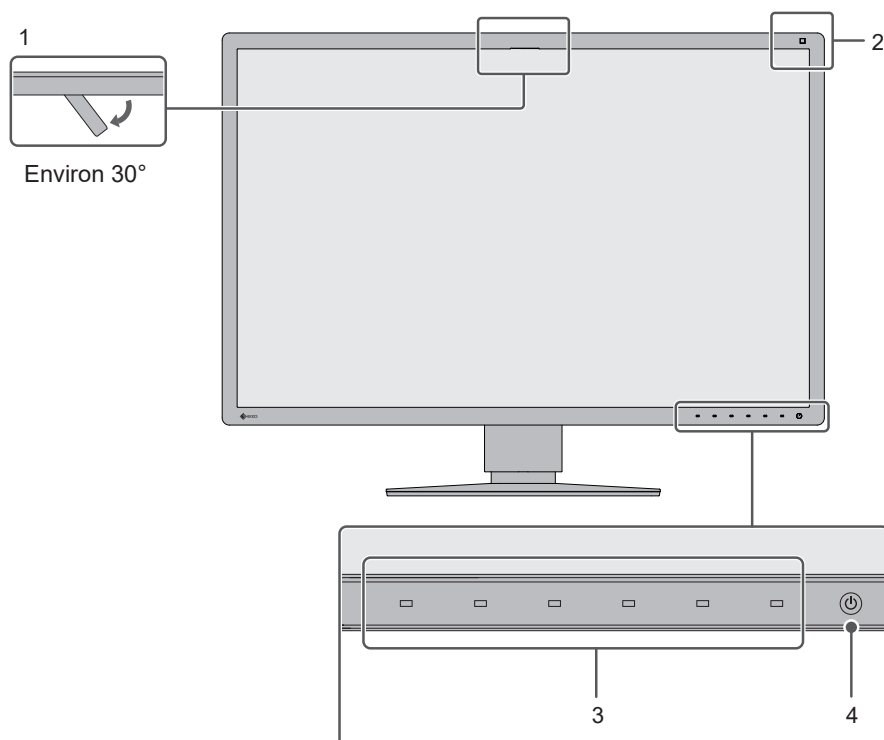

1. Capteur frontal intégré (déplaçable)	Ce capteur est utilisé pour effectuer l'étalonnage et la vérification des niveaux de gris.
2. Capteur d'éclairage	Ce capteur mesure l'éclairage de l'environnement. La mesure de l'éclairage de l'environnement est effectuée à l'aide du logiciel de contrôle de qualité RadiCS / RadiCS LE.
3. Commutateurs de fonctionnement	Affiche le guide de fonctionnement. Règle les menus selon le guide de fonctionnement.
4. Commutateur d'alimentation	<p>Pour mettre sous/hors tension.</p> <p>L'indicateur s'allume lorsque vous mettez l'appareil sous tension. La couleur de l'indicateur diffère selon le statut de l'opération effectuée par le moniteur.</p> <p>Vert : mode de fonctionnement normal, Orange : mode d'économie d'énergie, Éteint : hors tension, ou alimentation coupée</p>

1.3.2 Arrière

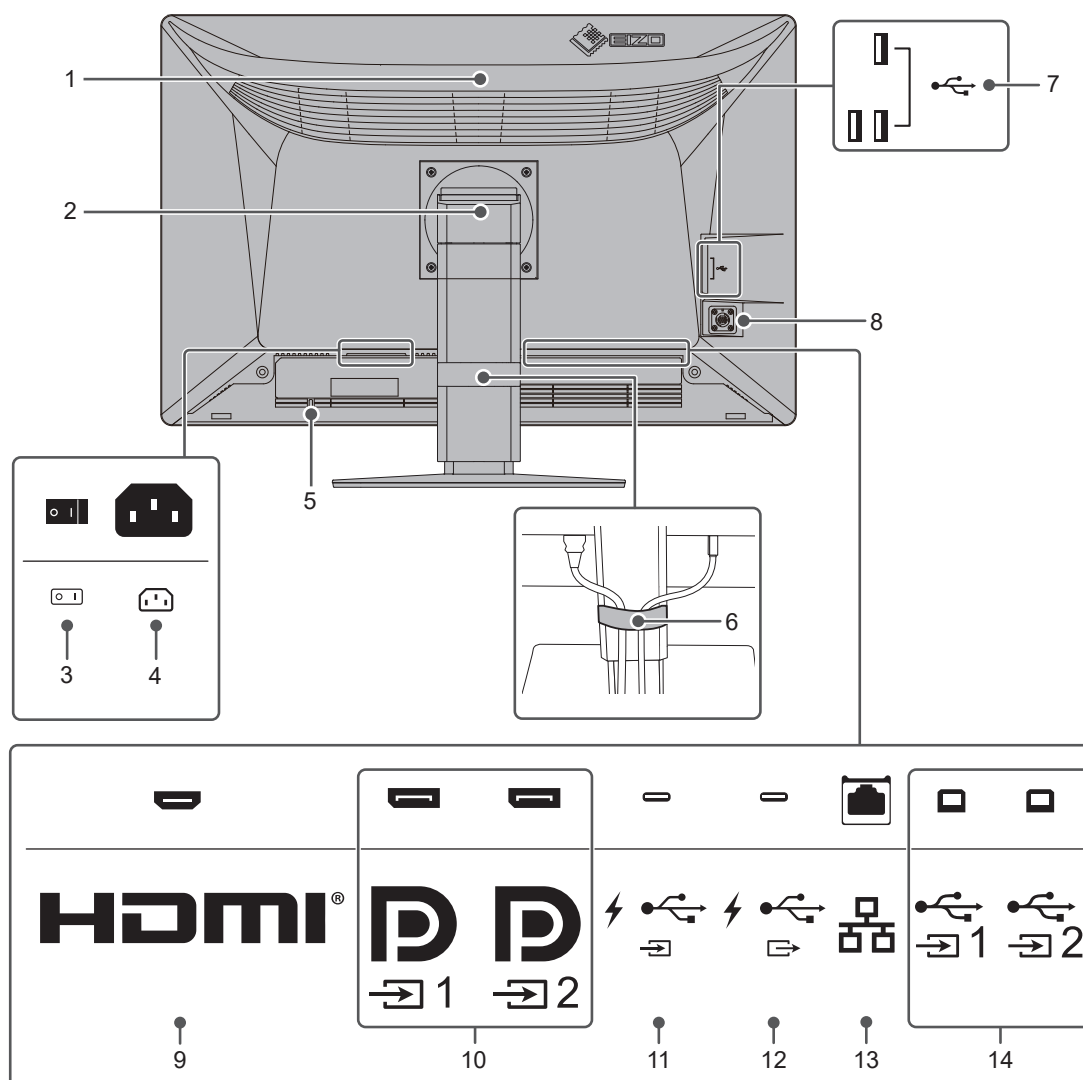

1. RadiLight Area (Rétroéclairage)	Fonction d'éclairage arrière intégrée au moniteur. Elle éclaire indirectement une pièce depuis l'arrière du moniteur.
2. Pied	Permet de régler la hauteur et l'angle (inclinaison et pivotement) du moniteur.
3. Commutateur d'alimentation principal	Active ou désactive l'alimentation. ○ : Éteint, : Allumé
4. Connecteur d'alimentation	Permet de brancher le cordon d'alimentation.
5. Fente pour le verrouillage de sécurité	Compatible avec le système de sécurité MicroSaver de Kensington.
6. Support de câble	Permet de regrouper les câbles.
7. Connecteur USB-A (aval)	Établit une connexion à un périphérique USB (voir « Utilisation de la fonction de station d'accueil » dans le Manuel d'installation).
8. Connecteur pour lampe de travail	Établit une connexion à RadiLight Focus.
9. Connecteur HDMI	Établit une connexion à un PC avec une sortie HDMI.
10. Connecteur DisplayPort	Établit une connexion à un PC avec une sortie DisplayPort.

11. Connecteur USB-C (amont)	Établit une connexion à un PC avec une sortie USB-C. Il transmet également le signal USB nécessaire à l'utilisation d'un logiciel qui nécessite une connexion USB ou la fonction de station d'accueil (voir « Utilisation de la fonction de station d'accueil » dans le Manuel d'installation).
12. Connecteur USB-C (aval)	Pour configurer une connexion en Daisy Chain, raccordez le câble au connecteur USB-C amont d'un autre moniteur. Vous pouvez également raccorder un périphérique USB (voir « Utilisation de la fonction de station d'accueil » dans le Manuel d'installation).
13. Port LAN	Branchement pour un concentrateur réseau ou un routeur avec un câble LAN permettant d'utiliser la connexion réseau de la fonction de station d'accueil (voir « Utilisation de la fonction de station d'accueil » dans le Manuel d'installation).
14. Connecteur USB-B (amont)	Établit une connexion à un ordinateur lors de l'utilisation d'un logiciel qui nécessite une connexion USB sur un PC sans connexion USB-C ou la fonction de concentrateur USB de ce produit.

2 Installation / Branchements

2.1 Avant l'installation

Lisez attentivement [PRÉCAUTIONS \[► 3\]](#) et suivez toujours les instructions.

Si vous placez ce produit sur un bureau avec une surface laquée, la couleur risque d'adhérer au bas du pied en raison de la composition du caoutchouc. Vérifiez la surface du bureau au préalable.

2.1.1 Conditions d'installation

Lors de l'installation du moniteur sur un support, veillez à laisser un espace suffisant à l'arrière, au-dessus et sur les côtés du moniteur.

Attention
<ul style="list-style-type: none">• Positionnez le moniteur de manière à éviter tout reflet lumineux sur l'écran.

2.2 Câbles de raccordement


Attention

- Vérifiez que le moniteur, le PC et les périphériques sont hors tension avant de les raccorder.
- Quand vous remplacez le moniteur existant par ce moniteur, consultez la section [4.2 Résolutions prises en charge](#) [p. 39] et configurez le PC avant de connecter ce moniteur de sorte que ses paramètres de résolution et de fréquence de balayage vertical correspondent aux valeurs prises en charge par ce moniteur.
- Si les câbles sont difficiles à insérer, réglez l'angle de l'écran.

1. Raccordez les câbles de signal.


Vérifiez la forme des connecteurs et branchez les câbles.

Affichage sur une seule fenêtre

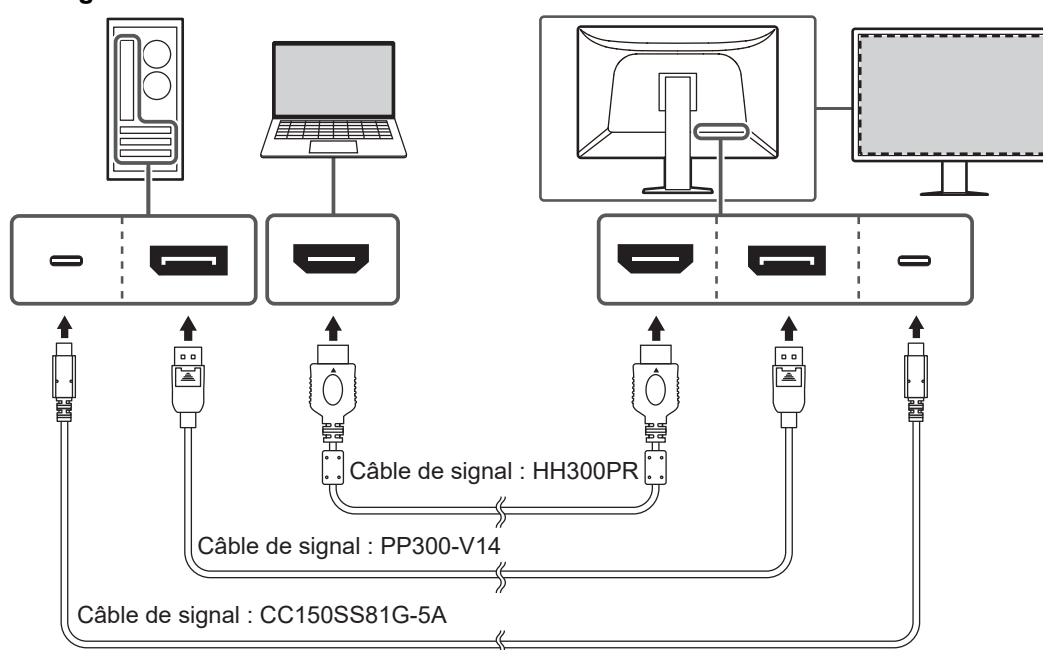


Attention

- Dans le réglage par défaut, le signal du connecteur DisplayPort 1 est affiché. Pour afficher le signal d'un autre connecteur, changez le signal d'entrée (voir « Commutation des signaux d'entrée » dans le Manuel d'installation).
- Si vous utilisez l'USB-C pour l'affichage vidéo, mais également pour le contrôle qualité du moniteur avec RadiCS / RadiCS LE et pour la connexion de périphériques USB (périphériques compatibles USB), vous devez définir « Sélection de l'USB » sur « USB-C » dans le menu Réglage. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d'installation (sur le CD-ROM).
- Les signaux HDMI® peuvent être affichés dans une plage limitée.

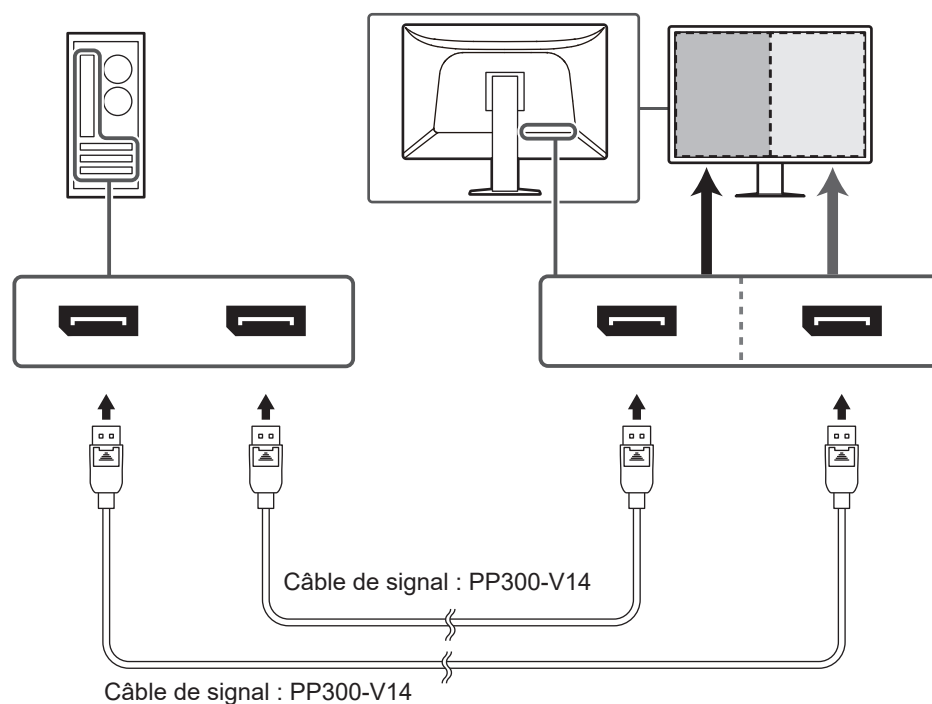
Affichage PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2)**Attention**

- Pour l'affichage PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2), vous devez configurer « Réglages PbyP » dans le menu Réglage. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d'installation (sur le CD-ROM).
- Pour l'affichage PbyP à partir de deux PC, certains aspects du contrôle qualité tels que le calibrage peuvent être limités.

Affichage PbyP (One Cable PbyP)

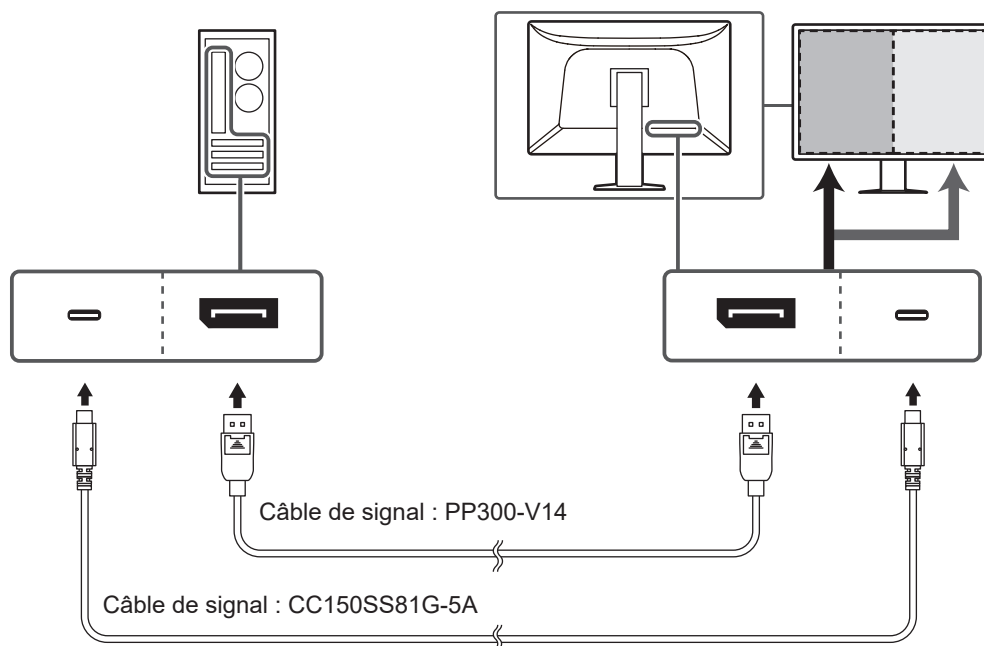


Attention

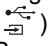- Pour l'affichage PbyP (One Cable PbyP), le connecteur DisplayPort 1 ou USB-C doit être utilisé (Amont : ). De plus, le réglage « Réglages PbyP » doit être configuré dans le menu Réglage. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d'installation (sur le CD-ROM).
- Si vous utilisez l'USB-C pour l'affichage vidéo, mais également pour le contrôle qualité du moniteur avec RadiCS / RadiCS LE et pour la connexion de périphériques USB (périphériques compatibles USB), vous devez définir « Sélection de l'USB » sur « USB-C » dans le menu Réglage. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d'installation (sur le CD-ROM).

Affichage PinP (sous-fenêtre)

Exemple : Utilisation du connecteur HDMI

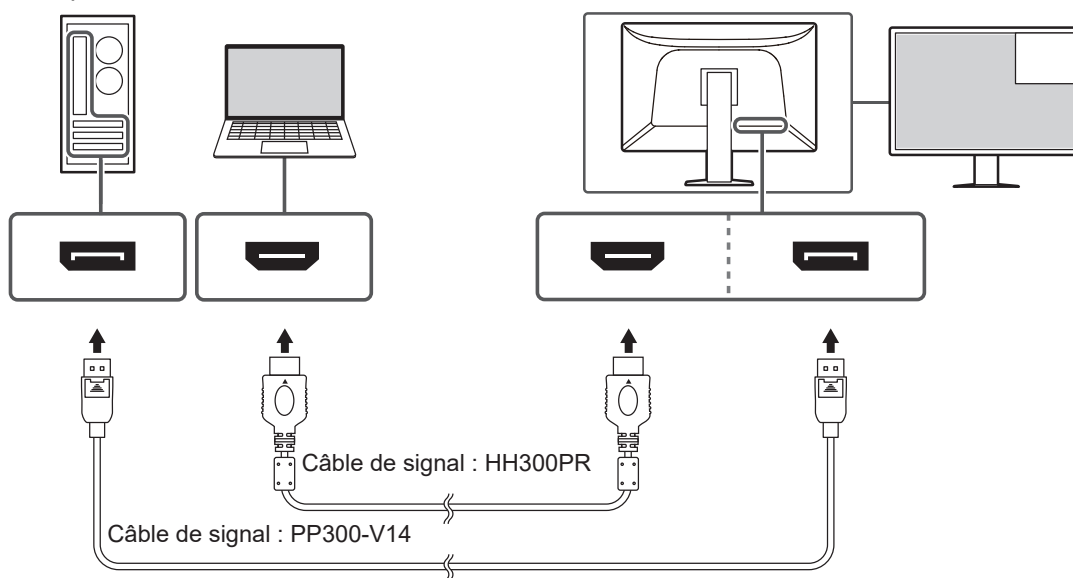
**Attention**



- Pour l'affichage PinP (sous-fenêtre), le réglage « Réglages PinP » doit être configuré dans le menu Réglage. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d'installation (sur le CD-ROM).
- Lorsqu'un signal HDMI est affiché sur un seul écran, la fonction d'affichage PinP (sous-fenêtre) ne peut pas être utilisée.

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Lors du raccordement d'autres moniteurs grâce à une connexion en guirlande




L'entrée de signal vers le connecteur DisplayPort 1 ou USB-C (Amont : ) sera reliée à l'entrée d'un autre moniteur.

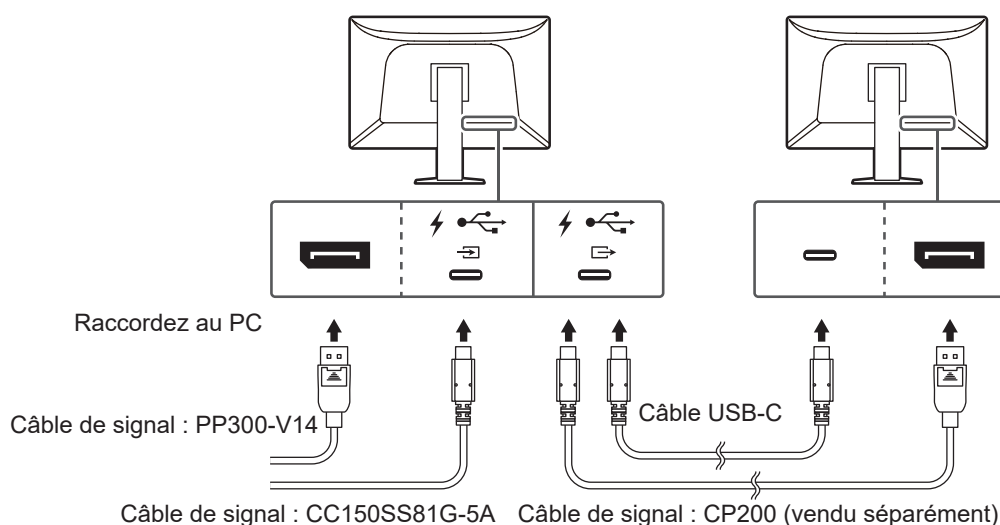**Attention**

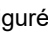- Consultez le site Web EIZO pour de plus amples informations sur les moniteurs et les cartes graphiques pouvant être utilisées pour la connexion en guirlande : (www.eizoglobal.com)
- Pour établir une connexion en Daisy Chain, connectez-vous au connecteur DisplayPort 1 ou USB-C (Amont : ). Le réglage « Daisy Chain » doit également être configuré dans le menu Réglages administrateur. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d'installation (sur le CD-ROM).
- Un capuchon est installé sur le connecteur USB-C (aval : ) par défaut. Retirez le capuchon avant toute utilisation.

2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur et le connecteur d'alimentation sur le moniteur.
Insérez le cordon d'alimentation complètement dans le moniteur.
3. Si vous n'utilisez pas la connexion USB-C et vous utilisez le logiciel RadiCS / RadiCS LE ou vous connectez des périphériques USB (périphériques prenant en charge l'USB) au moniteur, raccordez un câble USB 2.0 au connecteur USB-B du moniteur et au connecteur USB-A de l'ordinateur.

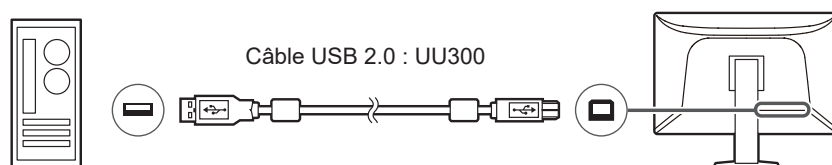
**Attention**

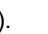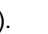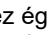- Lorsque vous connectez le moniteur à un PC sur lequel le logiciel RadiCS / RadiCS LE a été installé, raccordez-le au connecteur USB-B 1 () ou USB-C (amont : ).
- Retirez le capuchon avant d'utiliser le connecteur USB-B 2 (). Vous devez également modifier le réglage « Sélection de l'USB » dans le menu Réglage (voir « Sélection de l'USB » dans le Manuel d'installation).

2.3 Installation de RadiLight Focus (lampe de travail)


Fixez RadiLight Focus (lampe de travail) au connecteur de lampe de travail du moniteur.

RadiLight Focus (lampe de travail) ne peut être installé que vers le bas, perpendiculairement au connecteur.


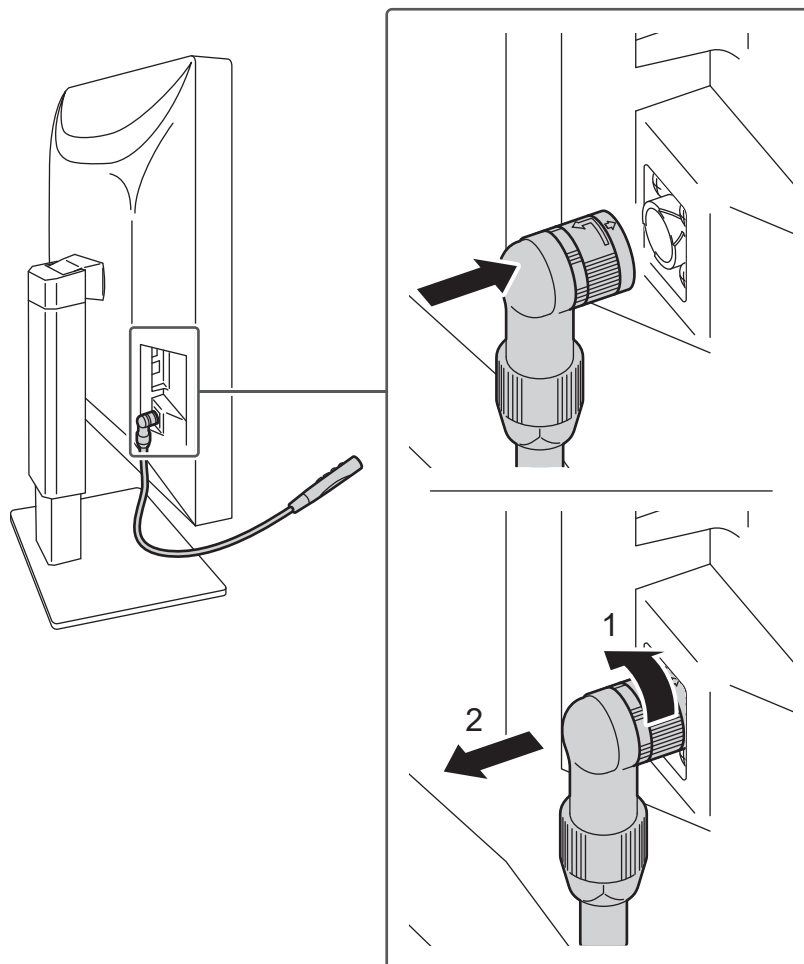


Pour le retirer, tirez-le vers vous tout en tournant la partie raccordée au moniteur dans le sens indiqué en 1 sur l'illustration.

2.4 Mise sous tension

- Appuyez sur  pour mettre le moniteur sous tension.
L'indicateur d'alimentation du moniteur s'allume en vert.
Si l'indicateur ne s'allume pas, consultez [3 Problème « Pas d'image »](#) ► 35].

Remarque

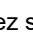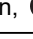- Si vous appuyez sur l'un des commutateurs de fonctionnement (excepté ) lorsque le moniteur est hors tension,  clignote pour vous indiquer l'emplacement du commutateur d'alimentation.

- Mettez en marche le PC.
L'image d'écran apparaît.
Si une image n'apparaît pas, reportez-vous à la section [3 Problème « Pas d'image »](#) ► 35] pour obtenir des conseils supplémentaires.

Attention


- Lors de la première connexion ou d'un changement de méthode de connexion, les paramètres d'affichage tels que la résolution et l'échelle d'affichage peuvent ne pas être appropriés. Vérifiez que les paramètres du PC sont correctement configurés.
- Pour des raisons d'économie d'énergie, il est conseillé de mettre le bouton d'alimentation en position arrêt. Si vous n'utilisez pas le moniteur, vous pouvez arrêter l'alimentation secteur ou débrancher la fiche d'alimentation afin que l'électricité soit complètement coupée.

Remarque

- Afin de maximiser la durée de vie du moniteur en empêchant la dégradation de la luminosité, et de réduire la consommation d'énergie, faites ce qui suit :
 - Utilisez la fonction d'économie d'énergie du PC ou du moniteur.
 - Éteignez le moniteur après l'avoir utilisé.

2.5 Régler la hauteur et l'angle de l'écran


Tenez les bords supérieur et inférieur ou les bords gauche et droit du moniteur avec les deux mains puis réglez la hauteur, inclinez et faites pivoter l'écran jusqu'à obtenir la position optimale pour travailler.

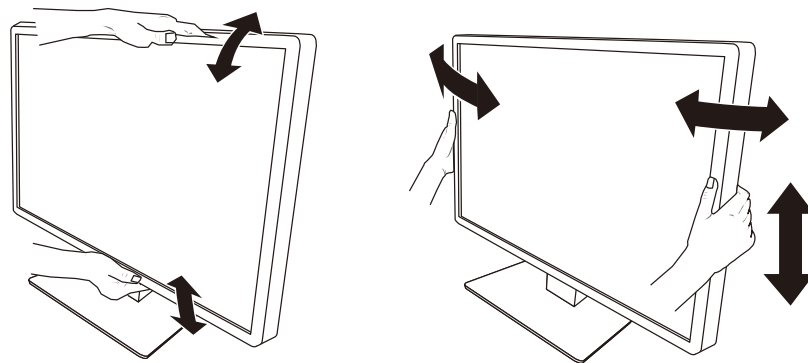**Attention**


- Une fois que le réglage est terminé, assurez-vous que les câbles sont correctement connectés.
- Après avoir réglé la hauteur et l'angle, faites passer les câbles dans le support de câble.
- Lorsque vous réglez l'angle ou la position du moniteur alors que la lampe de travail est installée, veillez à ne pas appliquer de force excessive sur celle-ci. Cela pourrait en effet endommager le connecteur ou le bras.

2.6 Installation du couvercle de connecteurs

1. Regroupez les câbles dans le support de câble.

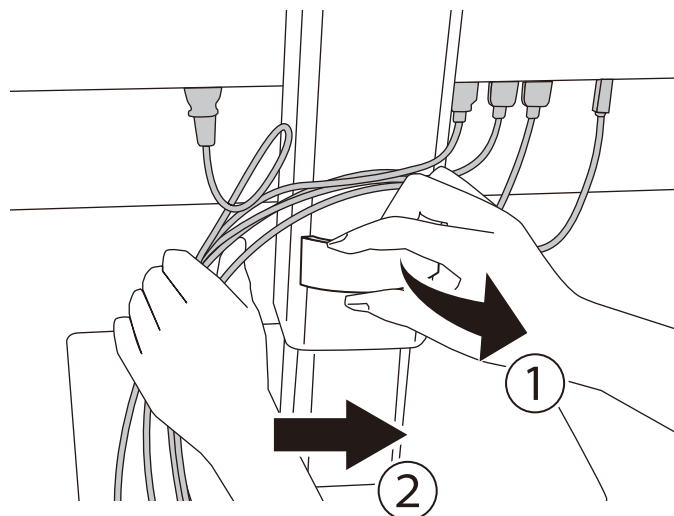

2. Installez le couvercle de connecteurs.

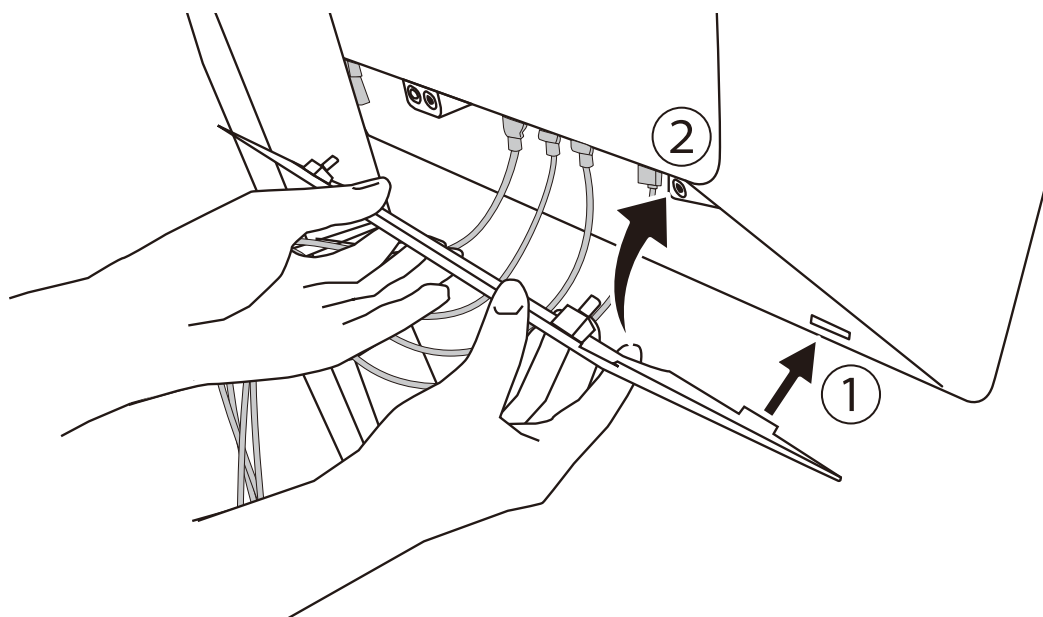


Exemple : Installation du couvercle de connecteurs (droite)

Attention
• Veillez à l'installer solidement pour garantir une ventilation adéquate à l'intérieur du moniteur.
Remarque
• Pour retirer le couvercle de connecteurs, tirez-le vers vous.

2.7 Utilisation de RadiLight Area / RadiLight Focus

1. Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont allumés.
2. Utilisez les boutons de commande pour activer/désactiver RadiLight Area ou RadiLight Focus.
Règle la luminosité de RadiLight Area.

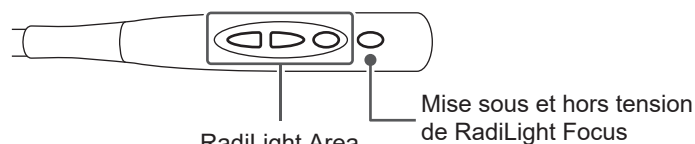

Attention


- En raison des variations des LED, il peut y avoir des différences de couleurs et de luminosité pour un même produit.
- Dans les environnements suivants, vous risquez de ne pas obtenir un éclairage suffisant lorsque vous utilisez RadiLight Area.
 - Si la distance par rapport au mur ou au plafond est importante
 - Si le mur ou le plafond est fait de matériaux peu réfléchissants/de couleur sombre
- Lorsque vous changez la direction de RadiLight Focus, ajustez l'angle en tenant à la fois l'extrémité et le bras de la lampe.

Remarque

- Pour obtenir de plus amples informations sur la configuration de RadiLight Area, reportez-vous au Manuel d'installation (sur le CD-ROM).

3 Problème « Pas d'image »

L'indicateur d'alimentation ne s'allume pas

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Tournez le commutateur d'alimentation principal à l'arrière du moniteur.
- Touchez .
- Coupez le commutateur d'alimentation principal à l'arrière du moniteur, puis réactivez-le quelques minutes plus tard.

L'indicateur d'alimentation s'allume : Vert

- Augmentez les valeurs de « Luminosité », « Contraste » ou « Gain » dans le menu réglage. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d'installation (sur le CD-ROM).
- Coupez le commutateur d'alimentation principal à l'arrière du moniteur, puis réactivez-le quelques minutes plus tard.

L'indicateur d'alimentation s'allume : Orange

- Changez le signal d'entrée. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d'installation (sur le CD-ROM).
- Déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier.
- Vérifiez si le PC est sous tension.
- Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Branchez les câbles de signal aux connecteurs du signal d'entrée correspondant.
- Coupez le commutateur d'alimentation principal à l'arrière du moniteur, puis réactivez-le.


L'indicateur d'alimentation clignote : Orange, Vert

- Connectez le moniteur en utilisant un câble de signal spécifié par EIZO. Coupez ensuite le commutateur d'alimentation principal à l'arrière du moniteur, puis réactivez-le quelques minutes plus tard.

Le message « Absence signal » s'affiche.

Exemple :




- Le message illustré ci-dessus risque de s'afficher, étant donné que certains ordinateurs n'émettent pas de signal dès leur mise sous tension.
- Vérifiez si le PC est sous tension.
- Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Branchez les câbles de signal aux connecteurs du signal d'entrée correspondant.
- Le connecteur USB-C (aval : ) est utilisé pour la connexion en guirlande. L'écran ne s'affiche pas, même lorsque le moniteur est connecté à un ordinateur.
- Changez le signal d'entrée. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel d'installation (sur le CD-ROM).

- Coupez le commutateur d'alimentation principal à l'arrière du moniteur, puis réactivez-le.

Le message « Erreur signal » s'affiche.

Exemple :

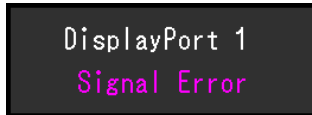

- Vérifiez que le PC est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical (voir [4.2 Résolutions prises en charge \[► 39\]](#)).
- Redémarrez le PC.
- Sélectionnez un réglage approprié à l'aide de l'utilitaire de la carte graphique. Reportez-vous au Manuel d'utilisation de la carte graphique pour plus d'informations.

Le message « DP non pris en ch. » s'affiche



- Vérifiez si le câble connecté est un câble de signal recommandé par EIZO.
- Vérifiez si l'USB-C du périphérique connecté prend en charge la sortie du signal vidéo (Mode Alt DisplayPort). Pour plus de détails, contactez le fabricant du périphérique.
- Connectez un câble DisplayPort ou un câble HDMI.

4 Spécifications

4.1 Liste des spécifications

4.1.1 Type

RX670	Anti-éblouissement
RX670-AR	Anti-reflets

4.1.2 Panneau LCD

Type	Couleur (IPS)
Rétroéclairage	LED
Taille	30,0" (76,2 cm)
Résolution	3 280 points × 2 048 lignes
Taille de l'écran (H × V)	645,5 mm x 403,0 mm
Pas de pixel (H × V)	0,197 mm × 0,197 mm
Couleurs de l'écran	Couleur 10 bits (DisplayPort / USB-C) : Jusqu'à 1,07 milliard de couleurs (dans une palette d'approx. 543 milliards de couleurs) 8 bits (DisplayPort / HDMI) : 16,77 millions de couleurs (dans une palette d'approx. 543 milliards de couleurs)
Angle de visualisation (H / V, typique)	178° / 178°
Luminosité recommandée	500 cd/m ²
Rapport de contraste (typique)	1800:1
Temps de réponse (typique)	25 ms (noir -> blanc -> noir)

4.1.3 Signaux vidéo

Bornes d'entrée	DisplayPort x 2, USB-C (Mode Alt DisplayPort) x 1, HDMI x 1
Bornes de sortie	USB-C (Mode DisplayPort Alt) x 1
Fréquence de balayage horizontal	31 kHz – 127 kHz
Fréquence de balayage vertical ^{*1}	59 Hz – 61 Hz (720 x 400 : 69 Hz – 71 Hz)
Mode de synchronisation de trame	59 Hz – 61 Hz
Fréquence de point	25 MHz – 440 MHz

^{*1} La fréquence de balayage vertical prise en charge varie en fonction de la résolution. Pour plus d'informations, voir [4.2 Résolutions prises en charge](#) ► 39].

4.1.4 Port

Port	Amont	USB-C x 1, USB-B x 2
	Aval	USB-A x 3, USB-C x 1
Norme	USB Specification Revision 2.0	
Vitesse de transmission	480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps	
Alimentation	Amont	USB-C : Maximum 94 W (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/4,7A)
	Aval	USB-A : Maximum 500 mA par port USB-C : Maximum 15 W (5 V/3 A)

4.1.5 Réseau

Port	RJ-45 (adaptateur USB LAN)
Systèmes d'exploitation pris en charge ^{*1}	Windows 11 Windows 10 (32 bits/64 bits) macOS Sierra (10.12) ou version ultérieure
LAN filaire	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)

^{*1} L'assistance d'EIZO prendra fin en même temps que l'assistance du fournisseur du système d'exploitation.

4.1.6 Alimentation

Entrée	100 – 240 VCA ± 10 %, 50/60 Hz, 2,80 – 1,20 A
Consommation d'énergie maximale	279 W ou moins ^{*1}
Mode d'économie d'énergie	0,5 W ou moins ^{*2}
Mode veille	0,5 W ou moins ^{*3}

^{*1} Lorsqu'une charge externe est connectée, « Mode » : « 4-Custom », « Luminosité » : « 100% », RadiLight Focus est activé, la luminosité de RadiLight Area est au maximum

^{*2} Lorsque l'importation DisplayPort est utilisée et que le port USB amont n'est pas connecté, « Veille » : « Haut », « DP Power Save » : « Marche », « One Cable PbyP » : « Arrêt », RadiLight Focus est connecté, RadiLight Focus est désactivé, aucune charge externe n'est connectée

^{*3} Lorsque le port USB amont n'est pas connecté, « DP Power Save » : « Marche », « One Cable PbyP » : « Arrêt », RadiLight Focus est connecté, RadiLight Focus est désactivé, aucune charge externe n'est connectée

4.1.7 Spécifications physiques

Dimensions (L x H x P)	682,0 mm x 490,5 mm – 590,5 mm x 225,0 mm (inclinaison : 0°) 682,0 mm x 534,7 mm – 634,7 mm x 295,2 mm (inclinaison : 30°)
Dimensions (L x H x P) (sans pied)	682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm
Poids net	Env. 15,8 kg
Poids net (sans pied)	Env. 11,7 kg
Plage de réglage de la hauteur	100 mm (inclinaison : 0°)
Inclinaison	Vers le haut : 30°, vers le bas : 5°
Pivotement	70°

4.1.8 Conditions de fonctionnement

Température	0 °C – 35 °C
Humidité	20 % – 80 % H.R. (sans condensation)
Pression atmosphérique	540 hPa – 1060 hPa

4.1.9 Conditions de transport / stockage

Température	-20 °C – 60 °C
Humidité	10 % – 90 % H.R. (sans condensation)
Pression atmosphérique	200 hPa – 1060 hPa

4.2 Résolutions prises en charge

Ce moniteur prend en charge les résolutions suivantes.

✓ : Pris en charge - : Non pris en charge

Résolution	Fréquence de balayage vertical (Hz)	DisplayPort / USB-C			HDMI	
		Affichage sur une seule fenêtre	Affichage PbyP	Affichage PinP	Affichage sur une seule fenêtre	Affichage PinP
640 × 480	59,940	✓	✓	✓	✓	✓
640 × 480	60,000	-	-	-	✓	✓
720 × 400	70,087	✓	✓	✓	✓	✓
720 × 480	59,940	-	-	-	✓	✓
720 × 480	60,000	-	-	-	✓	✓
800 × 600	60,317	✓	✓	✓	✓	✓
1024 × 768	60,004	✓	✓	✓	✓	✓
1200 × 1600	59,963	-	-	✓	-	✓
1200 × 1920	59,940	-	-	✓	-	✓
1280 × 720	59,940	-	-	-	✓	✓
1280 × 720	60,000	-	-	-	✓	✓
1280 × 1024	60,020	✓	✓	✓	✓	✓
1600 × 1200	60,000	✓	✓	✓	✓	✓
1640 × 2048	59,985	-	✓ ^{*1}	-	-	-
1920 × 1080	59,940	-	-	-	✓	✓
1920 × 1080	60,000	-	-	-	✓	✓
1920 × 1200	59,950	-	-	✓ ^{*1}	-	✓ ^{*1}
2560 × 1600	59,972	-	-	-	✓ ^{*2}	-
3280 × 2048	59,981	✓ ^{*1}	-	-	✓ ^{*3}	-

*1 Résolution recommandée

*2 Résolution recommandée lorsque « Mode LMM (HDMI) » est réglé sur « Marche » dans « Réglages administrateur »

*3 Résolution recommandée lorsque « Mode LMM (HDMI) » est réglé sur « Arrêt » dans « Réglages administrateur »

4.3 Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles séparément.

Pour obtenir les toutes dernières informations relatives aux accessoires en option et les informations relatives aux dernières cartes vidéo compatibles, reportez-vous à notre site web.

(www.eizoglobal.com)

Kit de calibrage	RadiCS UX2 Ver.5.1.3 ou ultérieure RadiCS Version Up Kit Ver.5.1.3 ou ultérieure
Logiciel de gestion du contrôle de qualité en réseau	RadiNET Pro Ver.5.1.3 ultérieure
Kit de nettoyage	ScreenCleaner
Adaptateur VESA pour client léger ou mini-PC	PCSK-R1
Câble de signal (USB-C – DisplayPort)	CP200

Annexe

Normes médicales

- Vous devez vérifier que le système final est conforme à la norme IEC60601-1.
- Les équipements sous tension peuvent émettre des ondes électromagnétiques, qui pourraient influencer, limiter ou entraîner un dysfonctionnement du moniteur. Installez l'équipement dans un environnement contrôlé, pour éviter ce genre d'effets.

Classification de l'équipement

- Type de protection contre les chocs électriques : Classe I
- Classe CEM : IEC60601-1-2 Groupe 1 Classe B
- Classification des appareils médicaux (UE) : Classe I
- Mode de fonctionnement : continu
- Classe IP : IPX0

Informations sur la CEM

Les appareils RadiForce RX670 permettent d'afficher correctement les images médicales.

Environnements d'utilisation prévue

Les appareils RadiForce RX670 sont destinés à l'environnement spécifié ci-dessous.

- Établissements de santé professionnels tels que les cliniques et les hôpitaux
- Environnements résidentiels pour les soins à domicile

Les environnements suivants ne conviennent pas à l'utilisation des appareils RadiForce RX670 :

- Environnements de soins à domicile, hors domicile
- À proximité des équipements chirurgicaux à haute fréquence tels que les couteaux électrochirurgicaux
- À proximité des appareils de thérapie à ondes courtes
- Dans les salles blindées contre les émissions RF des équipements médicaux des systèmes d'IRM
- Dans des environnements spéciaux blindés
- Installés dans les véhicules, y compris les ambulances
- Autres environnements spéciaux

AVERTISSEMENT

- Les appareils RadiForce RX670 requièrent que des précautions spéciales soient prises concernant la CEM et ils doivent être installés. Vous devez lire attentivement les « Informations sur la CEM » et les « PRÉCAUTIONS » de ce document, et observer les instructions suivantes lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Les appareils RadiForce RX670 ne doivent pas être utilisés à proximité d'autres appareils ou être superposés sur de tels appareils. Toutefois, s'il est nécessaire d'utiliser un appareil RadiForce dans de telles conditions, vous devez vérifier si cet équipement ou ce système fonctionne normalement avec la configuration RadiForce.

AVERTISSEMENT

- Lors de l'utilisation d'un équipement de communication RF portable, maintenez-le à une distance de 30 cm (12 pouces) ou plus de toute partie, y compris les câbles, des appareils RadiForce RX670. Sinon, il pourrait en résulter une dégradation des performances de cet appareil.

AVERTISSEMENT

- Toute personne raccordant des appareils supplémentaires aux éléments d'entrée ou de sortie des signaux, dans le cadre de la configuration d'un système médical, est responsable de la conformité du système aux exigences de la norme IEC60601-1-2.

AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas aux connecteurs du signal d'entrée/de sortie lors de l'utilisation des appareils RadiForce RX670. Sinon, l'image affichée pourrait être affectée.

**AVERTISSEMENT**

- Assurez-vous d'utiliser les câbles attachés à l'appareil ou les câbles recommandés par EIZO. L'utilisation de câbles autres que ceux recommandés par EIZO pour cet équipement pourrait entraîner une augmentation des interférences électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement ainsi qu'un mauvais fonctionnement.

Port de signal	Longueur de câble max.	Blindé	Noyau de ferrite	Câble recommandé
DisplayPort	3 m	Blindé	Sans noyaux de ferrite	PP300-V14
HDMI	3 m	Blindé	Avec noyaux de ferrite	HH300PR
USB-C (amont)	1,5 m	Blindé	Sans noyaux de ferrite	CC150SS81G-5A
USB-C (aval)	2 m	Blindé	Sans noyaux de ferrite	-
USB-B (amont)	3 m	Blindé	Avec noyaux de ferrite	UU300/MD-C93
USB-A (aval)	3 m	Blindé	Sans noyaux de ferrite	-
Ethernet	30 m	Non blindé	Sans noyaux de ferrite	-
Entrée CA (ou entrée CA)	3 m	Non blindé	Sans noyaux de ferrite	Avec fil de terre

Descriptions techniques**Émissions électromagnétiques**

Les appareils RadiForce RX670 sont destinés à l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.

Le client ou l'utilisateur d'un appareil RadiForce RX670 doit s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.


Test des émissions	Conformité	Environnement électromagnétique – instructions
Émissions RF CISPR11	Groupe 1	Les appareils RadiForce RX670 utilisent l'énergie RF uniquement pour leur fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences dans un appareil électronique situé à proximité.
Émissions RF CISPR11	Classe B	La gamme RadiForce RX670 convient à une utilisation dans tous les établissements, y compris les établissements à usage privé et ceux qui sont directement raccordés au réseau public d'électricité basse tension alimentant des bâtiments à usage privé.
Émissions d'harmoniques IEC61000-3-2	Classe D	
Variations de tension / émissions de scintillement IEC61000-3-3	Conforme	

Immunité électromagnétique

Les appareils RadiForce RX670 ont été testés aux niveaux de conformité suivants (C) selon les exigences des tests (T) relatifs aux environnements d'établissements de santé professionnels et de soins à domicile spécifiés dans la norme IEC/60601-1-2.

Le client ou l'utilisateur d'un appareil RadiForce RX670 doit s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité	Niveau de test (T)	Niveau de conformité (C)	Environnement électromagnétique – instructions
Décharge électrostatique (ESD) IEC61000-4-2	±8 kV de décharge par contact ±15 kV de décharge dans l'air	±8 kV de décharge par contact ±15 kV de décharge dans l'air	Le sol doit être en bois, en béton ou recouvert de carrelage. Si le sol est recouvert d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être au moins égale à 30 %.
Coupures/décharges électriques de courte durée IEC61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV pour les lignes d'entrée / de sortie	±2 kV pour les lignes d'alimentation ±1 kV pour les lignes d'entrée / de sortie	La qualité de l'alimentation secteur doit correspondre à celle d'un environnement commercial ou hospitalier traditionnel.
Surintensités IEC61000-4-5	±1 kV phase à phase ±2 kV phase à terre	±1 kV phase à phase ±2 kV phase à terre	La qualité de l'alimentation secteur doit correspondre à celle d'un environnement commercial ou hospitalier traditionnel.
Creux de tension, coupures de courant et fluctuations de la tension de l'alimentation électrique IEC61000-4-11	0 % U_T (100 % creux dans U_T) 0,5 cycle et 1 cycle 70 % U_T (30 % creux dans U_T) 25 cycles / 50 Hz 0 % U_T (100 % creux dans U_T) 250 cycles / 50 Hz	0 % U_T (100 % creux dans U_T) 0,5 cycle et 1 cycle 70 % U_T (30 % creux dans U_T) 25 cycles / 50 Hz 0 % U_T (100 % creux dans U_T) 250 cycles / 50 Hz	La qualité de l'alimentation secteur doit correspondre à celle d'un environnement commercial ou hospitalier traditionnel. Si l'appareil RadiForce RX670 doit fonctionner en continu malgré les coupures d'électricité du secteur, il est recommandé d'alimenter le RadiForce RX670 avec un onduleur ou une batterie.
Champs magnétiques induits par fréquence réseau IEC61000-4-8	30 A/m (50 / 60 Hz)	30 A/m	Les champs magnétiques induits par fréquence réseau doivent respecter les niveaux caractéristiques d'un environnement commercial ou hospitalier traditionnel. L'appareil durant son utilisation doit être maintenu à au moins 15 cm de la source d'alimentation de champs magnétiques induit par fréquence réseau.

Test d'immunité	Niveau de test (T)	Niveau de conformité (C)	Environnement électromagnétique – instructions
Perturbations conduites induites par les champs RF IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz – 80 MHz 6 Vrms Bandes ISM ^{*1} et radio amateur ^{*2} entre 150 kHz et 80 MHz	3 Vrms 6 Vrms	Les systèmes de communication portables et mobiles RF ne doivent pas être utilisés à une distance d'un équipement de l'appareil RadiForce RX670, câbles compris, inférieure à celle calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$
Champs des RF émises IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz	10 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz – 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, de 800 MHz – 2,7 GHz « P » désigne la puissance nominale de sortie maximale de l'émetteur transmetteur en watts (W) d'après le fabricant du transmetteur, et « d » représente la distance de séparation recommandée en mètres (m). L'intensité du champ des émetteurs RF fixes, déterminée par une étude électromagnétique du site ^{*3} , doit être inférieure au niveau de conformité dans chaque bande de fréquences ^{*4} . Des interférences peuvent se produire à proximité d'appareils marqués du symbole suivant. 

Remarque

- U_T représente la tension du courant alternatif du secteur avant application du niveau de test.
- Entre 80 MHz et 800 MHz, la bande de fréquences la plus élevée s'applique.
- Les lignes directrices concernant les perturbations conduites induites ou celles rayonnées par les champs RF peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

^{*1} Les bandes ISM (industrielles, scientifiques et médicales) entre 150 kHz et 80 MHz sont les suivantes : de 6,765 MHz à 6,795 MHz, de 13,553 MHz à 13,567 MHz, de 26,957 MHz à 27,283 MHz, et de 40,66 MHz à 40,70 MHz.

^{*2} Les bandes radioamateurs de 0,15 MHz à 80 MHz sont les suivantes : de 1,8 MHz à 2,0 MHz, de 3,5 MHz à 4,0 MHz, de 5,3 MHz à 5,4 MHz, de 7 MHz à 7,3 MHz, de 10,1 MHz à 10,15 MHz, de 14 MHz à 14,2 MHz, de 18,07 MHz à 18,17 MHz, de 21,0 MHz à 21,4 MHz, de 24,89 MHz à 24,99 MHz, de 28,0 MHz à 29,7 MHz, et de 50,0 MHz à 54,0 MHz.

- *3 L'intensité du champ ne peut pas être calculée avec précision pour les émetteurs fixes, tels que les stations de téléphones radio (cellulaire/sans fil) et de radios mobiles terrestres, les postes de radio amateur, la radiodiffusion AM ou FM ou la télédiffusion. Pour évaluer l'environnement électromagnétique créé par des transmetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l'intensité du champ mesurée sur le lieu d'utilisation de l'appareil RadiForce RX670 dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, il est indispensable de vérifier si l'appareil RadiForce RX670 fonctionne normalement. En cas de performances anormales avérées de l'appareil RadiForce RX670, vous pouvez également envisager de le réorienter ou de le déplacer.
- *4 Au-dessus de la bande de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité du champ doit être inférieure à 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables ou mobiles et les appareils RadiForce RX670

Les appareils RadiForce RX670 sont conçus pour les environnements électromagnétiques dont les perturbations RF émises sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'appareil RadiForce RX670 peut supprimer les interférences électromagnétiques en conservant une distance minimale (30 cm) entre les équipements de communication RF portables ou mobiles (transmetteurs) et l'appareil RadiForce RX670. L'appareil RadiForce RX670 a été testé aux niveaux de conformité (C) suivants selon les exigences des tests (T) d'immunité aux champs électromagnétiques de proximité dans les services de communication RF suivants.

Fréquence de test (MHz)	Bande ^{*1} (MHz)	Service ^{*1}	Modulation ^{*2}	Niveau de test (T) ^{*3} (V/m)	Niveau de conformité (C) (V/m)
385	de 380 à 390	TETRA 400	Modulation par impulsions ^{*2} 18 Hz	27	27
450	de 430 à 470	GMRS 460, FRS 460	FM Écart de ± 5 kHz Sinus 1 kHz	28	28
710 745 780	de 704 à 787	Bandes LTE 13, 17	Modulation par impulsions ^{*2} 217 Hz	9	9
810 870 930	de 800 à 960	GSM 800 / 900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE Band 5	Modulation par impulsions ^{*2} 18 Hz	28	28
1720 1845 1970	de 1700 à 1990	GSM 1800 ; CDMA 1900 ; GSM 1900 ; DECT ; LTE Band 1, 3, 4, 25 ; UMTS	Modulation par impulsions ^{*2} 217 Hz	28	28
2450	de 2400 à 2570	Bluetooth®, WLAN, 802,11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Modulation par impulsions ^{*2} 217 Hz	28	28
5240 5500 5785	de 5100 à 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulation par impulsions ^{*2} 217 Hz	9	9

*1 Pour certains services, seules les fréquences de liaison montante sont incluses.

*2 La fréquence porteuse est modulée à l'aide d'un signal carré avec rapport cyclique de 50 %.

*3 Les niveaux de test ont été calculés à une puissance maximale et à une distance de séparation de 30 cm.

Le client ou l'utilisateur de l'appareil RadiForce RX670 peut supprimer les interférences causées par les champs magnétiques de proximité en conservant une distance minimale (15 cm) entre le transmetteur RF et l'appareil RadiForce RX670. L'appareil RadiForce RX670 a été testé aux niveaux de conformité (C) suivants selon les exigences des tests (T) d'immunité aux champs magnétiques de proximité.

Fréquence de test	Modulation	Niveau de test (T) (A/m)	Niveau de conformité (C) (A/m)
30 kHz	CW (onde continue)	8	8
134,2 kHz	Modulation par impulsions* ¹ 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Modulation par impulsions* ¹ 50 kHz	7,5	7,5

*¹ La fréquence porteuse est modulée à l'aide d'un signal carré avec rapport cyclique de 50 %.

Pour les autres équipements de communication RF portables ou mobiles (transmetteurs), la distance minimale entre les équipements de communication RF portables ou mobiles (transmetteurs) et le RX670 en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication, doit respecter les indications ci-dessous.

Puissance nominale de sortie maximale du transmetteur (W)	Distance de séparation en fonction du transmetteur de fréquence (m)		
	150 kHz – 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz – 2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pour les transmetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale ne figure pas ci-dessous, la distance de séparation recommandée « d » en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence du transmetteur, « P » représentant la puissance de sortie nominale maximale du transmetteur en watts (W) préconisée par le fabricant du transmetteur.

Remarque
<ul style="list-style-type: none"> Entre 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la bande de fréquences la plus élevée doit s'appliquer. Les lignes directrices concernant les perturbations conduites induites ou celles rayonnées par les champs RF peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Informations sur les Interférences Radioélectriques

For U.S.A., Canada Only

FCC Supplier's Declaration of Conformity

We, the Responsible Party

Company: EIZO Inc.

Address: 5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO

Model: RadiForce RX670

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (enclosed)


Canadian Notice

This Class B information technology equipment complies with Canadian ICES-003.

Cet équipement informatique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.




EIZO Corporation 
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH 
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

艺卓显像技术(苏州)有限公司
中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

EIZO Limited 
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG 
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



www.eizoglobal.com

00N0N440A5
IFU-RX670

Copyright © 2024 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition – January 31st, 2024